

機械器具16 体温計
管理医療機器 耳赤外線体温計 17887000

耳式赤外線体温計 3000


【禁忌・禁止】

- ・電池は子供の手の届かないところにおいてください。
- ・子供だけで使用させないでください。

【形状・構造及び原理等】


1. 各部の名称

製品本体

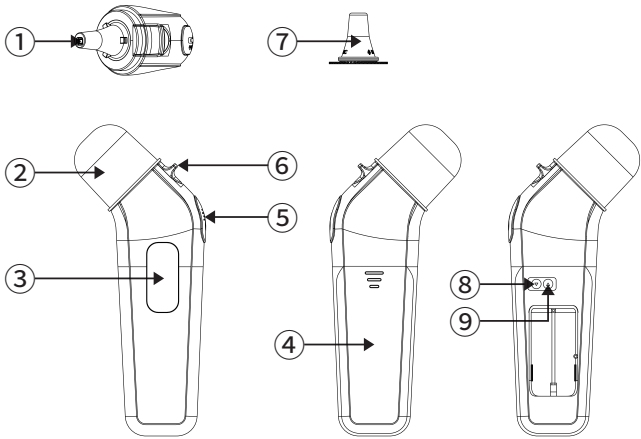

① センサー	⑥ フィルター交換ボタン
② キャップ	⑦ フィルター
③ 表示画面	⑧ サウンドボタン
④ 電池蓋	⑨ メモリーボタン
⑤ 検温ボタン	

表示画面

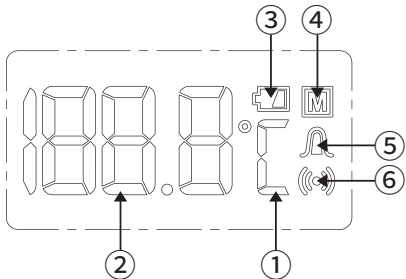

① 単位	④ メモリーマーク
② 測定結果	⑤ フィルター装着警告マーク
③ 電池残量少マーク	⑥ ブルートゥースマーク (HET-3000B)

2. 本体の寸法及び質量

- ・外観寸法：139mm×59mm×33mm
- ・質量：約59g（電池を除く）

3. 電気的定格

- ・電源：アルカリ単4乾電池2本（DC3V）
- ・電池寿命：約2,500回測定可能
- ・電撃に対する保護の形式による分類：内部電源機器
- ・電撃に対する保護の程度による分類：BF形装着部
- ・電磁両立性：IEC 60601-1-2:2014に適合
- ・防塵防水保護等級：IP22

4. 原理

人の外耳道において放射される赤外線を赤外線センサーで測定し、体温に換算して表示する体温計である。
換算は、センサーの出力特性と、複数の係数を用いた計算式によって行われる。
本品は、外耳道の温度を舌下温に換算して表示する。

5. 仕様に係る事項

- ・測定温度範囲：32.0℃ ～ 43.0℃
- ・最大許容誤差：±0.2℃（36℃ ～ 39℃）
- ・使用環境：温度+10℃ ～ +40℃、湿度15% ～ 90%
- ・保管環境：温度-20℃ ～ +50℃、湿度 15% ～ 90%
- ・補正温度：センサーで測定した外耳道の温度を舌下温に換算して表示

【使用目的又は効果】

人の鼓膜及びその周辺の赤外線を測定することによって当該部位の温度を測定することにより、体温を測定し、デジタル表示すること。

【使用方法等】

1)セルフチェックモード

- ・スイッチを押すと、表示画面の中に全てのマークが約1秒間表示され、次に室内の温度が表示されて、体温計モードの画面になります。

2)体温の測定

- ・フィルターをセンサー部に取り付けます。
- ・センサー部を外耳道の中に入れて、検温ボタンを押します。
- ・約1秒でピーと音がするまで、体温計を外耳道から抜かないでください。
- ・表示画面に体温が表示されます。
※フィルターが正しく装着されていないと、Errと表示されて、体温の測定ができません。
※体温測定が終了してから、約15秒で画面が消え、30秒以上使用しないと自動的に電源がOFFになります。

機能の切換え

1)メモリーのチェック

- ・メモリーボタンを押すと、体温の測定記録を確認することができます。
- ・メモリーの確認中は、表示画面にMが表示されています。
- ・メモリーボタンを押すごとに、最後に測定した結果から順次古い結果が表示されます。
- ・メモリーは体温の測定結果のみ100件記録され、100件を超えると古い記録から順次書き換えられます。

2)操作音の切換え

- ・サウンドボタンを押すと、表示画面にOFFと表示されて、その後操作音が鳴らなくなります。
- ・体温の測定時に測定終了を知らせるピーと言う音が鳴りませんので、検温ボタンを押してから約1秒間は体温計を外耳道から抜かないでください。
- ・サウンドボタンを再度押すと、表示画面にonと表示されて、操作音が鳴るようになります。

電池の交換

- ・表示画面に電池残量少のマークが1つだけ表示されたときは、電池を交換してください。
- ・電池蓋を下にスライドさせると、外れます。
- ・充電電池を使用すると動作が不安定になりますので、必ずアルカリ乾電池を使用してください。
- ・電池の極性を確認して、2本とも新しい電池に交換してください。
- ・電池の交換が終わったら、電池蓋を閉めてください。

【使用上の注意】

- ・センサー部分に物を入れたり、触ったりしないでください。
- ・防水構造ではないため、水や液体につけないでください。
- ・修理、分解、改造等は絶対に行わないでください。
- ・動物の体温測定には使用できません。
- ・落下などの強い衝撃を与えないでください。
- ・電池及び電池収納部のふたは、乳幼児が誤飲の恐れがありますので、十分に注意してください。

【保管方法及び有効期間等】

1. 直射日光を避け、乾燥した清潔な場所で保管してください。
2. 耐用期間：5年（自己認証（製造元データによる））

【保守・点検に係る事項】

- ・汚れは乾いた布で拭き取ってください。
- ・汚れがひどい場合は中性洗剤を含ませた布で拭いてください。
- ・水洗いは絶対にしないでください。
- ・有機溶剤等は使用しないでください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：ヒュービディックジャパン株式会社
東京都八王子市北野町507番6号
電話：042-649-1920
製造業者：HuBDIC Co., Ltd
大韓民国