

機械器具32 医療用吸引器

管理医療機器 電動式可搬型吸引器 36616030

鼻水吸引器HNA-3000

【禁忌・禁止】

- ・本書に記載されている使用目的以外の用途で使用しないでください。
- ・鼻の穴に傷、炎症、出血などがみられる場合は、使用しないでください。

2. 本体の寸法及び質量

- ・本体寸法: 140 (W) ×209.5 (D) ×146.5 (H) mm
- ・本体質量: 約844g

3. 電気的定格

- ・定格入力: DC 5V、2A
- ・電撃に対する保護の形式による分類: 内部電源機器
- ・電撃に対する保護の程度による分類: BF形装着部
- ・電磁両立性: IEC 60601-1-2:2014+A1:2020に適合している。
- ・防塵防水保護等級: IP22

4. 原理

電動モーターを使用したポンプで吸引ボトル内を陰圧にして、シリコンチューブに取り付けたシリコンノズルから鼻水を吸引する。

5. 仕様に係る事項

- ・吸引圧: $-10\text{kPa}\pm 20\%$
- ・吸引ポンプの排気流量: $21\text{L} / \text{min}\pm 20\%$

【使用目的又は効果】

乳幼児及び小児の鼻水の吸引に用いる。

【使用方法等】

1. 使用前の準備


- ・本体及び構成品の異常の有無を確認します。
- ・吸引貯蔵部および付属品をあらかじめ洗って乾燥しておきます。
- ① 吸引貯蔵タンクを組み立てます。
- 吸引貯蔵部のスペースにノズル接続部をセットして組み立てます。
- ホース接続部下段に固定部を先に固定してからホースを接続します。
- 接続部の上部に適したノズルを接続します。
- ② 本体を平らで安定した場所に置きます。
- ③ 本体のホース接続キャップと吸引貯蔵タンクをホースで接続します。

2. 使用

- ① 隙間なく組み立てたことを確認したら、上部の電源ボタンを回して適切な吸引強度を決めて始めます。
- ② ノズルを鼻の穴に軽く当てて、鼻水を吸引します。
- ③ 鼻の穴に強く押し込まないでください。
- ④ 使用中に吸引貯蔵タンクを据え置きたい場合は本体の後ろに取付けます。
- ⑤ 使用後、上部の電源スイッチをオフに回して電源を切ります。

【形状・構造及び原理等】

1. 各部の名称

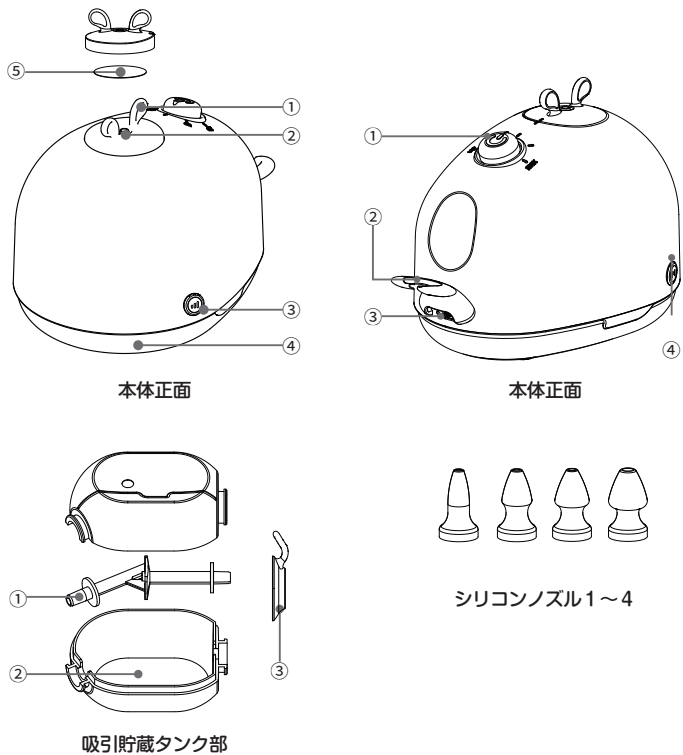

本体 正面	1	ホース接続キャップ
	2	吸引貯蔵部接続
	3	段階調節ボタン
	4	ムードライト拡散板
	5	逆流防止フィルター
本体 後面	1	電源スイッチ
	2	据え置き
	3	USB-C端子・充電LED
	4	モードボタン

吸引貯蔵 タンク部	1	ノズル接続部
	2	吸引貯蔵部
	3	固定部
シリコンノズル1～4		

取扱い説明書を必ずご参照ください

3. 使用後の処置

- ① 使用後は、吸引貯蔵タンクに接続吸引ホース、ノズル、固定部を分離します。
- ② 吸引貯蔵部に集まった吸引物を捨てます。
- ③ 吸引保存部、接続部、吸引先端を流れる水できれいに洗浄します。
- ④ 洗浄後は完全に乾燥して保管します。

【使用上の注意】

- ・ご使用前に取扱説明書をよく読んで正しくお使いください。
- ・初めて又は長期間保管後にご使用になるときは、よく洗浄してからご使用ください。
- ・ご使用後は毎回必ず吸引ボトルからシリコンノズルまでを分解して洗浄し、乾燥した清潔な場所で保管してください。
- ・製品は必ず大人の方が操作してください。また、吸引するときは座るなど、安定した姿勢で使用してください。
- ・シリコンノズルは鼻に軽く押し当てる様にして、ご使用ください。鼻の奥深くに無理に入れないでください。
- ・製品本体は防水構造ではありませんので、水につけないでください。
- ・充電の際は、ACアダプターは同梱されておりませんので、PSEマークがついた市販ACアダプターと合わせて同梱のUSB充電ケーブル (Type A-C) を接続してお使いください。
- ・シリコンノズルは、本製品に付属のものをご使用ください。他社製品のノズルは使用できません。
- ・製品に、落下させるなどの強い衝撃を与えないでください。
- ・製品を分解、改造、修理などは行わないでください。

【保管方法及び有効期間等】

1. 直射日光を避け、乾燥した清潔な場所で保管してください。
2. 耐用期間: 5年 (自己認証 (製造元データによる))

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者: ヒュービディックジャパン株式会社
東京都八王子市北野町507番6号
電話: 042-649-1920

製造業者 : HuBDIC Co., Ltd.
大韓民国

取扱い説明書を必ずご参照ください