


I B スイスクラウン

*【形状・構造及び原理等】

1. 形状（代表モデル）

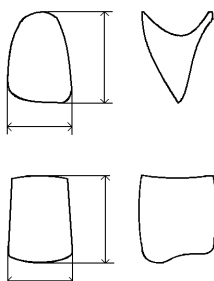

*【保管方法及び有効期間等】

〔貯蔵・保管〕

直射日光のあたる場所、高温になる場所は避け、乾燥した冷暗所で保管すること。

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社エスエスデンタル工業所

電話番号：052-331-2438

製造業者：DIRECTA AB

国名：スウェーデン

サイズ表

上顎	番号	14	13	12	11	10	101	100
右	←→	10.7	10.8	11.0	11.4	12.2	13.0	14.0
中切歯	↑↓	7.5	7.7	8.0	8.3	8.8	9.4	10.0
上顎	番号	103	102	19	18	17	16	15
左	←→	14.0	13.0	12.2	11.4	11.0	10.8	10.7
中切歯	↑↓	10.0	9.4	8.8	8.3	8.0	7.7	7.5
上顎	番号	300	301	30	31	32	33	34
右	←→	13.0	12.4	11.9	11.5	11.0	10.7	10.4
犬歯	↑↓	8.9	8.5	8.2	8.0	7.8	7.5	7.2
上顎	番号	35	36	37	38	39	302	303
左	←→	10.4	10.7	11.0	11.5	11.9	12.4	13.0
犬歯	↑↓	7.2	7.5	7.8	8.0	8.2	8.5	8.9
上顎	番号	24	23	22	21	20	2	
右	←→	8.5	9.5	10.0	10.5	10.9	11.5	
側切歯	↑↓	5.6	6.3	6.5	6.8	7.0	7.3	
上顎	番号	200	29	28	27	26	25	
左	←→	11.5	10.9	10.5	10.0	9.5	8.5	
側切歯	↑↓	7.3	7.0	6.8	6.5	6.3	5.6	
下顎	番号	60	61	62	63	64		
左右	←→	12.3	11.3	11.1	10.5	9.9		
前歯長	↑↓	6.3	5.9	5.6	5.3	5.1		
下顎	番号	65	66	67	68	69		
左右	←→	8.0	8.5	9.1	9.6	10.4		
前歯短	↑↓	5.0	5.1	5.3	5.6	6.0		
小白歯	番号	40	41	42	43	44		
大	←→	9.9	9.2	8.9	8.6	8.1		
	↑↓	7.4	7.0	6.8	6.5	6.2		
小白歯	番号	50	51	52	53	54		
小	←→	10.1	9.8	9.3	8.9	8.4		
	↑↓	7.5	7.0	6.8	6.6	6.4		

2. 材質

ポリカーボネイト

*【使用目的又は効果】

暫間クラウンとして使用する。

*【使用方法等】

〔使用方法等に関連する使用上の注意〕

1. 使用する常温重合レジン of 取扱は取扱説明書又は添付文書の使用方法に従うこと。その注意事項を確認すること。
2. 使用するテンポラリーセメントの取扱は取扱説明書又は添付文書の使用方法に従うこと。その注意事項を確認すること。
3. 本品は樹脂であるので形態修正を行う際は変形を避けるため、必要以上に温度上昇させないこと。