

機械器具 22 検眼用器具
一般医療機器 細隙灯顕微鏡 35148000
スリットランプ METORI-50

【形状・構造及び原理等】

概要


本装置は、撮影レンズの付いた本体部(レンズ付きホルダー)と、着脱可能な照明装置によって構成されている。
本体部にはクリップが付いてあり、スマートフォンに取り付けて、スマートフォンのカメラ機能を利用して観察・撮影を行う。
照明部の照明角度は、撮影レンズの光軸に対して 45 度に設定してある。

*構成

- ・本体部(レンズ付きホルダー)
- ・スリット光照明装置
- ・青色光照明装置(オプション)
- ・蛍光フィルター(オプション・青色光照明装置用)
- ・スポット光照明装置(オプション)
- ・拡散光照明装置(オプション)
- ・安定スティック

なお本品の構成部品は補充等のため単体または任意の組合せにて販売することがある。

*形状

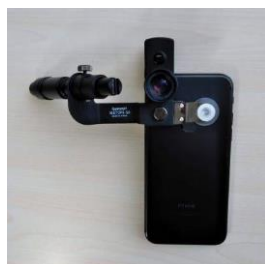

(スマートフォン取り付け時)

電気的定格

- ・電源電圧:DC3V (リチウム電池 CR2 1 本)

仕様

- ・撮影倍率: 3.5 倍
- ・撮影距離: 50mm
- ・照明光の照射角: 撮影レンズの光軸に対して 45°
- ・光源: LED

【使用目的又は効果】

眼球等の観察、検査及び撮影に用いる。眼内圧、角膜厚、前房深度の測定にも用いる。眼球に細隙光を投射し、反射面を観察又は測定する。

*【使用方法等】

1. 照明装置の電池ケース蓋を取り外し、CR2 リチウム電池を入れる。
2. 照明装置を本体部のガイド筒に挿入し、固定ネジを締めて固定する。
3. 安定スティックを使用する場合は本体に差し込み取り付け。
4. 青色光照明装置を使用する場合は、本体部の撮影レンズに蛍光フィルターを装着する。
5. 本体部のクリップにて本装置をスマートフォンに取り付け、吸盤をスマートフォンに圧着させる。このとき本装置の撮影レンズの光軸とスマートフォンの撮影レンズの光軸が一致するようにする。
6. スイッチボタンを押して電源を入れ、照明光を照射する。
7. 本装置の撮影レンズが角膜表面から 50mm の位置になるように保持して、観察を行う。このとき照明光は斜め 45° の位置から照射される。
8. 使用後は電源ボタンを押して電源を切る。

【使用上の注意】

一般的注意事項:

- ・本品に水をかけたり、水に浸けたりしないこと。
- ・気圧、温度、湿度、風通し、日光、ほこり、塩分、硫黄分などを含んだ空気などにより悪影響を生ずるおそれのない場所で使用すること。
- ・振動、衝撃を与えないこと。
- ・化学薬品の保管場所やガスの発生する場所で使用しないこと。麻酔薬など引火性のあるものの近くで使用しないこと。
- ・強力な電磁波を発する機器の周囲では使用しないこと。
- ・他の機器に隣接させた状態で使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

保管方法

- ・水のかからない場所に保管すること。気圧、温度、湿度、風通し、日光、ほこり、塩分、硫黄分などを含んだ空気や、振動、衝撃などにより悪影響の生ずるおそれのない場所に保管すること。
- ・長期間使用しない場合は、電池漏れを防ぐため電池を外して保管すること。

【保守・点検に係る事項】

使用者による保守点検事項

- ・本体は中性洗剤や消毒剤を湿らせた柔らかい布で清拭すること。
- ・撮影レンズおよび照射部のレンズには薬品を使用せず、レンズ専用のクリーニングクロスで清拭すること。

業者による保守点検事項

- ・上記「使用者による保守点検事項」を超える保守・点検及び修理については製造販売業者に依頼すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者:

株式会社エムイーテクニカ
〒170-0002 東京都豊島区巢鴨 1-34-4
TEL: 03-5395-4588 FAX: 03-5395-4866

製造業者:

株式会社井澤