

機械器具 12 理学診療用器具
一般医療機器 体表面用超音波プローブカバー 70014000
ACCURO プローブカバー


再使用禁止

【禁忌・禁止】

- 再使用禁止
- 再滅菌禁止

*** 【形状・構造及び原理等】***** 1. 概要**

超音波画像診断の際に使用し、体液又は汚れから術野及び超音波画像診断装置を保護する目的で使用する。手技の利便性のため、必要な構成部品を予め組合せている。

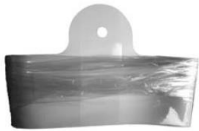

プローブカバー



プローブカバー固定用ゴム



ロケータ



超音波ゲル

*** 2. 原材料**

プローブカバー：ポリエチレン

* ロケータ：ポリカーボネート

*** 【使用目的又は効果】**

本品は、体表面で超音波画像診断を行う際に、超音波画像診断装置の超音波プローブに装着し、体液又は汚れから術野及び超音波画像診断装置を保護する目的で使用する。手技の利便性のため、必要な構成部品を予め組合せている。

*** 【使用方法等】**

1. 滅菌包装からプローブカバーを取り出す。
- * 2. 超音波ゲルをプローブカバーに注入又は超音波プローブに塗布する（プローブカバーの外側又は患者の皮膚に直接塗布する場合もある）。
3. プローブカバーで超音波画像診断装置を覆い、プローブカバー固定用ゴムでプローブカバーを固定する。
4. (ロケータを用いる場合) ロケータを超音波プローブに装着する。
5. 超音波画像診断装置とプローブカバーを一緒に握り、超音波画像診断装置を操作する。
6. (ロケータを用いる場合) ロケータを患者の皮膚に押し当て、ロケータの跡を皮膚に残す。

*** 【使用上の注意】****<重要な基本的注意>**

1. ロケータを装着する際、緩みやがたつきがないことを確認すること。
適切に装着できない場合は使用しないこと。
2. 穿刺針先端でプローブカバーを傷つけないよう挿入すること。

【保管方法及び有効期間等】**1. 保管方法**

本品を保管するときは、次の事項に注意すること。

- 高温多湿及び直射日光を避けて保管すること。
- 水濡れに注意すること。
- 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所を避けて保管すること。

2. 有効期間

本品のパッケージに表示されている「使用期限」までに使用すること。

[自己認証による]

*** 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売元：ビー・ブラウンエスクリップ株式会社

* 問い合わせ窓口：TEL 0120-401-741

* 製造元：リバンナ メディカル社、米国

Rivanna Medical, Inc.