


機械器具 58 整形用機械器具
管理医療機器 電動式骨手術器械 70959010
エラン EC

【形状・構造及び原理等】

1)形状・構造 (GA835)

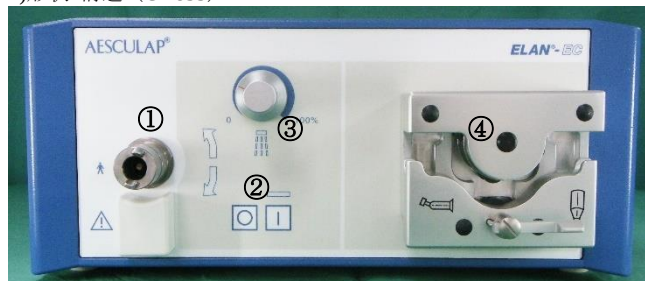

- ① ケーブルコネクター
- ② メインスイッチ
- ③ イリゲーション流量調整ノブ
- ④ イリゲーションポンプ



- ⑤ ボトルホルダーサポート
- ⑥ フットケーブルソケット
- ⑦ フューズボックス
- ⑧ 電源用ソケット

*GA830 にはイリゲーションポンプは付属しておりません。
本添付文書に該当する製品の製品名、製品番号等については、製品の
包装表示ラベル又は本体の記載をご確認下さい。

2)原理

モーターの回転運動を、フレキシブルケーブルを介してツールに伝達する。

【使用目的又は効果】

骨手術に用いる手術器械をいう。電動式のものに限る。

【使用方法等】

準備

1. 本体裏面に付属の専用電源コードを接続し、メインプラグを 100V コンセントに接続する。



2. 本体裏面にフットスイッチコードを接続する。コードプラグは 5 本のピンがあるので、ピンの配列を確認して本体裏面のソケットに差し込むこと。




3. イリゲーションを使用する場合は、付属のボトルホルダーを背面左のホルダーサポートに差し込む。ボトルホルダーのリング部に適量の生食ボトルを下げること。



4. 本体正面左のケーブルコネクターにフレキシブルケーブルを差し込む。



5. 正面パネルにあるメインスイッチ I を押す。

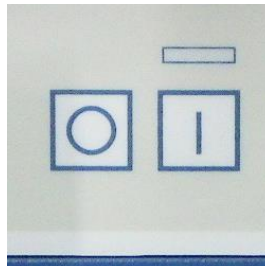

6. イリゲーションチューブをフレキシブルケーブルに這わせ、チューブ付属の専用コネクター数個で固定する。

7. パネル正面右にあるポンプにポンプチューブをセットすること。
コネクタに挟まれた太いポンプチューブを、ポンプローラー
部分に這わせ、ポンプを閉鎖すること。ポンプチューブ両側のコ
ネクタをポンプに挟まないよう注意すること。



8. フットスイッチのイリゲーションボタンを踏み、本体パネルの
イリゲーションのイルミネーションが点灯していることを確認
すること。
9. 流量調節ノブを回して、流量を調節すること。

***＜使用方法等に関連する使用上の注意＞**

1. 使用前
 - ・ ハンドピースにツールを正しくロックしていない場合、フレキシ
ブルケーブルが断線するか、本体のヒューズが切れるので注意す
ること。
 - ・ ハンドピースが正しくメンテナンスされていない場合、フレキシ
ブルケーブルが断線するか、本体のヒューズが切れるので注意す
ること。
 - ・ 自社製品のみと組み合わせて使用すること。
2. 使用中
 - ・ マイクロフレキシブルケーブルを接続すると逆回転が使用でき
るが、マクロフレキシブルケーブルでは正回転のみとなる。
 - ・ イリゲーションがオンになっていても、流量調節ノブが 0%にセ
ットされている場合はポンプは稼動しません。
 - ・ モーターが稼動しているときにフレキシブルケーブルを外さな
いで下さい。
3. 使用後
 - ・ 清拭をする前に必ず電源コードをコンセントから抜くこと。
 - ・ 本器は洗浄・滅菌は出来ないため、汚れた場合は清拭すること。


【保管方法及び有効期間等】

＜保管方法＞

水のかからないところで、高温、多湿、日光の当たる場所を避け
て保管すること。

***【保守・点検に係る事項】**

- ・ ヒューズが切れた場合は次の品番のものを注文すること。
製品番号: TA020436
- ・ ヒューズ交換の際は電源コードをコンセントから抜くこと。

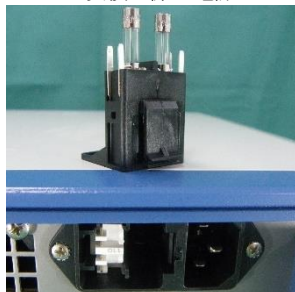

- ・ 1年に1度のオーバーホールを推奨する。

****【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売元：ビー・ブラウンエースクラップ株式会社

** 問い合わせ窓口：0120-401-741

製造元：エースクラップ社、ドイツ

Aesculap AG