

機械器具 51 医療用尿管及び体液誘導管
管理医療機器 間欠泌尿器用カテーテル 36125000
アクトリール (カテーテル長 367mm)

再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造

本品は、カテーテルとコネクタからなる単回使用の間欠導尿用カテーテルである。カテーテル表面には、親水性潤滑剤がコーティング（塗布）されており、尿道口からの挿入を促進する。

男性用の「アクトリール ハイライト カテ」及び採尿バッグ付きの「アクトリール ハイライト セット」がある。

「アクトリール ハイライト カテ」にはカテーテルの先端形状がストレートのネラトン型及びカーブのチーマン型があり、採尿バッグ付きの「アクトリール ハイライト セット」にはカテーテルの先端形状がストレートのネラトン型がある。

種
類

外径		コネクタの	カテーテル長	先端
(mm)	(CH)	色	(mm)	形状

アクトリール ハイライト カテ ネラトン

2.7	8	ブルー	367	2 孔 ストレート
3.3	10	ブラック		
4.0	12	ホワイト		
4.7	14	グリーン		
5.3	16	オレンジ		

コネクタ・ファネル

アクトリール ハイライト カテ チーマン

3.3	10	ブラック	367	2 孔 カーブ
4.0	12	ホワイト		
4.7	14	グリーン		
5.3	16	オレンジ		

コネクタ・ファネル

アクトリール ハイライト セット ネラトン

3.3	10	ブラック	367	2 孔 ストレート
4.0	12	ホワイト		
4.7	14	グリーン		
5.3	16	オレンジ		

2. 原材料

カテーテル：熱可塑性ポリオレフィン

潤滑剤：グリセロール、ヒドロキシエチルセルロース、
アーモンド脂肪酸グリセリル、蒸留水

【使用目的又は効果】

尿道経由で膀胱に挿入し、導尿、採尿に用いる。

【使用方法等】

準備


- 手をよく洗い、尿道口およびその周辺を清拭する。
- 個包装フィルムに傷等がないことを目視で確認し、潤滑剤がカテーテルにむらなく行き渡っていることをパッケージの外から手で触って確認する。

1. 「アクトリール ハイライト カテ」の使用方法等


① 個包装の開封

＜個包装フィルムの一部分を非接触用スリーブとして使用する場合＞

- コネクタ側の個包装フィルムの切込み（印 1）から個包装を開封する。

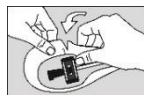

- カテーテル先端側の個包装フィルムの切込み（印 A）、または切込み（印 A）横の穴に親指等を差し込み、個包装を切り離す。

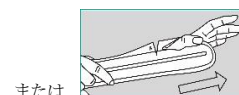


- 非接触用スリーブを短くしたい場合は、カテーテル先端側の個包装フィルムの切込み（印 B）から個包装を切り離す。





＜カテーテル全体を個包装から取り出して使用する場合＞

コネクタ側の切込み（印 1）から個包装を開封し、コネクタをつまんで、カテーテル本体を直接手で触れないように、カテーテルを引き出す。

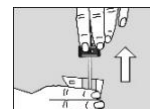

② 挿入

- カテーテル本体を直接手で触れないように、個包装フィルム越しにカテーテルをつかむ。
- 他方の手で、ペニスを持ち、尿道が真っ直ぐになるよう保持しながら、尿が流れ始めるまで、慎重にカテーテルを尿道を通して膀胱まで挿入する。
- 挿入時は、非接触用スリーブを蛇腹状に縮めたり、移動させたりして、カテーテルに触れないようにする。

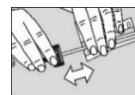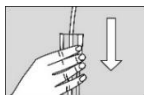

チーマン型の場合は、挿入前にカテーテル先端の曲がっている先が上を向いていることを確認して挿入する。コネクタ・ファネルにある突起物が上向き、コネクタ・ウイングが垂直になると、カテーテル先端の曲がっている先も上を向く。



③ 抜去

- 尿の流れが止ったら、カテーテルをゆっくりと 2-3cm 引き戻す。
- 尿が再び流れ出した場合、数秒待ち、カテーテルをさらにゆっくりと 1-2cm 引き戻す。
- 尿の流れが止まり、膀胱が完全に空になったら、カテーテルをゆっくりと引き抜く。

取扱説明書を必ずご参照ください。

④ 廃棄

使用後のカテーテルは個包装フィルムに戻して、各自治体の処理方法に従って廃棄する。


2. 「アクトリーン ハイライト セット」の使用方法等

① 個包装の開封



1. ステッカーを切り離し、折りたたまれた採尿バッグを広げる。



2. カテーテル先端側の個包装フィルムの切込み（印 A）、または切込み（印 A）横の穴に親指等を差し込み、個包装を切り離す。
3. 非接触用スリーブを短くしたい場合は、カテーテル先端側の個包装フィルムの切込み（印 B）から個包装を切り離す。


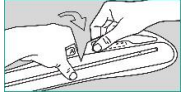


または

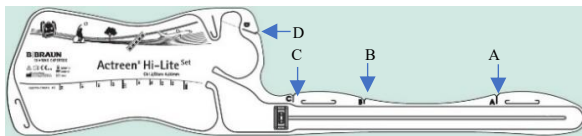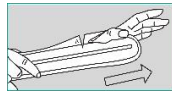

② 挿入

1. カテーテル本体を直接手で触れないように、個包装フィルム越しにカテーテルをつかむ。
2. 他方の手で、ペニスを持ち、尿道が真っ直ぐになるよう保持しながら、尿が流れ始めるまで、慎重にカテーテルを尿道を通して膀胱まで挿入する。
3. 挿入時は、非接触用スリーブを蛇腹状に縮めたり移動させたりして、カテーテルに触れないようにする。

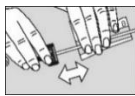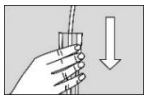

③ 抜去

1. 尿の流れが止ったら、カテーテルをゆっくりと 2-3cm 引き戻す。
2. 尿が再び流れ出した場合、数秒待ち、カテーテルをさらにゆっくりと 1-2cm 引き戻す。
3. 尿の流れが止まり、膀胱が完全に空になったら、カテーテルをゆっくりと引き戻す。

④ 廃棄

1. 採尿バッグの切込み（印 D）から点線に沿ってゆっくり開封し、トイレに尿を排出する。
2. 尿排出後は、採尿バッグを元のように折りたたんでステッカーの一部を再利用して留める。
3. 使用後のカテーテルと採尿バッグは、各自治体の処理方法に従って廃棄する。



<使用方法等に関連する使用上の注意>

- 本品に傷等がないことを目視で確認し、潤滑剤がカテーテルにむらなく行き渡っていることをパッケージの外から手で触って確認すること。
- 本品は滅菌品のため、開封は使用直前に行い、無菌的に取り扱うこと。
- カテーテル挿入前と後によく手を洗って清潔にすること。また、尿道口及びその周辺も清潔にすること。
- 尿道狭窄などにより挿入困難な患者の場合、先端形状がカーブしているチーマンタイプを使用すること。
- 採尿時にはカテーテルコネクタと採尿バッグの接続部をカテーテル挿入位置より低い位置に保持すること。
- 本品と外付けの採尿バッグを併用する場合には、JIS T 3214 に適合した形状のコネクタを備えた外付けの採尿バッグを使用すること。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- 本品を在宅等で患者若しくは介助者が使用する場合には、本品の使用方法及び使用上の注意について、医療従事者が指導を行うこと。
- カテーテル挿入時に異常な抵抗を感じたり、痛みを感じた場合は、直ちに使用を中止して、医師の指示のもと適切な処置を行うこと。

2. 不具合・有害事象

<重大な有害事象>

- 尿路感染
- 膀胱、尿道損傷
- 出血
- 尿道炎症

<その他の不具合>

- 本品の損傷、破損、変形、変色
- カテーテルの閉塞
- 挿入困難

* 3. 小児等への適用

- 3.5 kg 未満の小児には使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

- 高温多湿、直射日光及び水濡れを避けて保管すること。

2. 有効期間

- 製造日より 2 年間。[自己認証による]
- 本品のパッケージに表示されている使用期限までに使用すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：ビー・ブラウンエースクラップ株式会社

問い合わせ窓口：TEL 0120-401-741

製造元：ビー・ブラウン メディカル、フランス

B.Braun Medical

発売元

株式会社大塚製薬工場

徳島県鳴門市撫養町立岩字芥原 115

販売提携

大塚製薬株式会社

東京都千代田区神田司町 2-9

お問い合わせ先

株式会社大塚製薬工場 輸液 DI センター

東京都千代田区神田司町 2-2

TEL：0120-719-814

FAX：03-5296-8400