

機械器具 51 医療用嘴管及び体液誘導管
管理医療機器 輸液・カテーテル用アクセサリセット 70326009
バックチェックバルブ T


再使用禁止

【禁忌・禁止】

- 再使用禁止
- 輸血療法に使用しないこと [血栓が形成され、バルブが閉塞するおそれがあるため。]

【形状・構造及び原理等】

<構造図>

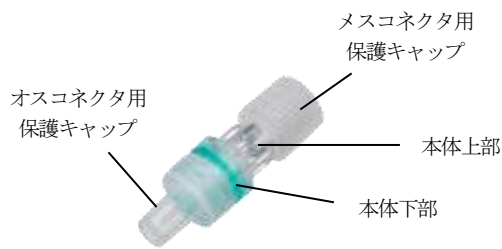

<原材料>

- 本体上部：グリコール変性ポリシクロヘキシレンジメチレンテレフタレート (PCTG)
- 本体下部：MABS 共重合体
- バルブメンブレン：シリコンゴム

【使用目的又は効果】

本品は輸液セット、カテーテル等に接続して使用する逆流防止用のコネクタである。

【使用方法等】

包装より無菌的に取り出し、速やかに輸液セット等へ接続し、薬液等を流す。

<使用方法等に関連する使用上の注意>

1. 使用前
 - 一度取り外した保護キャップは再使用せずに、新しい滅菌済みキャップ（コンビキャップ等）を使用すること。
 - 接続部を汚染させないこと。
 - 本品に 200kPa (2bar) 以上の圧力が加わる使用はしないこと。[接続部の外れや漏れ、破損が生じるおそれがある。]
2. 使用中
 - ライン交換時の締め直し、過度の締め付け又は、増し締め等は、本品のひび割れの発生を助長する要因となるため注意すること。
 - 使用中は本品の破損、接続部のゆるみ及び薬液漏れ等について、定期的に確認すること。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意
 - 本品は MR Safe であり、一般的な MR 検査による影響はない。
2. 不具合・有害事象
以下の事象が発現した場合は、直ちに適切な処置を行うこと。

<重大な不具合>

- 不適切な取り扱い、管理による破損、液漏れ

<重大な有害事象>

- 感染症
- 塞栓症

以上の有害事象の治療のため、再手術が必要な場合もある。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法
水濡れに注意し、直射日光および高温多湿を避けて保管すること。
2. 有効期間
使用期限は外箱に記載。[自己認証（自社データ）による]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：ビー・ブラウンエースクラップ株式会社

問い合わせ窓口：TEL 0120-401-741

製造元：ビー・ブラウン メルズンゲン アーゲー、ドイツ

B.Braun Melsungen AG

販売元：ニプロ株式会社

問い合わせ窓口：フリーダイヤル 0120-226-410

受付時間：9:00～17:15（土・日・祝日を除く）