

機械器具 （76）医療用吸入器
管理医療機器 家庭用超音波吸入器(JMDN コード：71020000)

「ポータブル型超音波吸入器 UN-302」の付属品


付属品セット UN-302-01JC

【禁忌・禁止】

- ・本品の接続可能な機器以外には使用しないでください。
[被接続器が正常に動作しません]

【形状・構造及び原理等】

各部の名前 販売型式名：UN-302-01JC

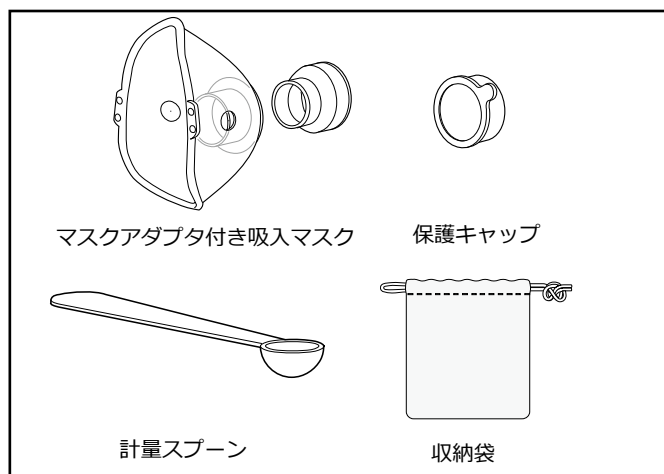

構成部品

マスクアダプタ付き吸入マスク	1 個
保護キャップ	1 個
計量スプーン	1 個
収納袋	1 個
添付文書	1 部

【使用目的又は効果】

ポータブル型超音波吸入器 UN-302 の本体（鼻腔と咽喉の加湿、洗浄により不快感の改善。一般家庭で使用する。）の付属品で吸入用マスク/噴霧部保護キャップ/吸入液作成用計量スプーン/収納袋として使用します。


【使用方法等】

本品に接続可能な機器は以下の通りです。（以下、吸入器と称す）

販売名	認証番号
ポータブル型超音波吸入器 UN-302	303AHBZX00025000


（1）マスクアダプタ付き吸入マスク

吸入器本体に下図のとおり取り付けて、鼻と口をマスクで覆って吸入します。

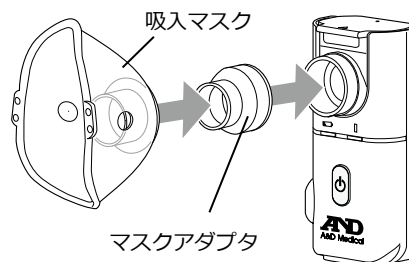


（2）保護キャップ

吸入器本体に下図のとおり取り付けてください。吸入器が持ち運び中に起こりうる損傷から保護します。

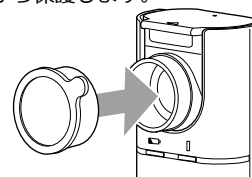

（3）計量スプーン

吸入器の給水ユニットに水 6mL を入れて、計量スプーンで食塩を 1 杯（すり切り）給水ユニットに加えてください。生理食塩水が作れます。（塩分濃度 0.9%）

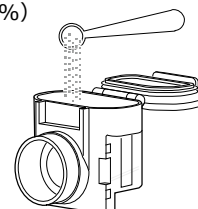

（4）収納袋

吸入器本体と付属品を入れて持ち運ぶことができます。

【使用上の注意】

- 初めて使用するときや長期間使用しなかったとき、または付属品が清浄でない場合には洗浄、消毒してください。
- 構成品を接続する場合は、その互換性、安全性を確認した上で使用してください。
- 吸入器本体の添付文書や取扱説明書もご参照ください。

吸入器本体の取扱説明書を必ずご参照ください。

【保管方法及び有効期間等】

(1) 保管方法

清掃のあと、水ぬれに注意し、直射日光及び高温多湿を避けて保管してください。

(2) 耐用期間

1 年(自己認証による)

【保守・点検に係る事項】

＜使用者による保守点検事項＞

- ・ 給水ユニット、吸入マスク、マスクアダプタ、保護キャップは、消毒用エタノールに浸すことができます。シンナー、ベンジン、その他アルコール等の溶剤は使用しないでください。また、消毒用アルコールに浸漬したあとは水で十分にすすいで乾燥させてください。

消毒方法

1. 本品（収納袋を除く）を 70～75%の消毒用エタノールに約 10 分間浸します。
2. 浸した後、その消毒用エタノールを捨て、水ですすぎます。
3. 糸くずの出ない清潔な紙または布の上に置き乾燥させます。
※綿やその他の素材での布で乾燥させないでください。ほこりや布の繊維がメッシュに残り、噴霧量が低下する可能性があります。
※消毒液に部品全体を浸してください。
※すすぎ残しのないように十分な量の水で給水ユニットや吸入マスクなどの付属品（本体、専用 AC アダプタを除く）を洗浄してください。
※メッシュ部をティッシュペーパーなどで拭かないでください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

名称：株式会社イー・アンド・デイ
住所：〒364-8585 埼玉県北本市朝日 1-243
電話：0120-514-016

製造業者

名称：HEALTH & LIFE Co., Ltd(台湾)
ヘルス アンド ライフ