

機械器具（76）医療用吸入器
管理医療機器 家庭用超音波吸入器（JMDNコード：71020000）


「ポータブル吸入器 Misty」の専用部品 （保護キャップ、給水ユニット、計量スプーン）

【禁忌・禁止】

- ・本品の接続可能な機器以外には使用しないでください。
[被接続器が正常に動作しません]
- ・お子さまが本品で遊ぶことがないようにご注意ください。また、乳幼児やお子さまの手の届かないよう本品を保管してください。
[小さな部品を飲み込むおそれがあります。その場合は、すぐに医師の治療を受けてください]

【形状・構造及び原理等】

各部の名前

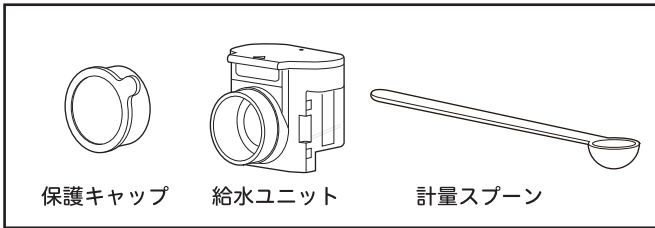

構成部品

保護キャップ	1 個
給水ユニット	1 個
計量スプーン	1 個
添付文書	1 部

【使用目的又は効果】

ポータブル吸入器 Misty（鼻腔と咽喉の加湿、洗浄により不快感の改善。一般家庭で使用する。）の専用部品で給水ユニット及び保護キャップ、計量スプーンとして使用します。


【使用方法等】

本品に接続可能な機器は以下の通りです。（以下、吸入器と称す）

販売名	認証番号
ポータブル吸入器 Misty	307AHBZX00012000


（1）給水ユニット

電動部に右図のように取り付けます。
カチッと音がしたら、給水ユニットが正しく取り付けられています。取り付けが悪い場合、正しく噴霧されない場合があります。

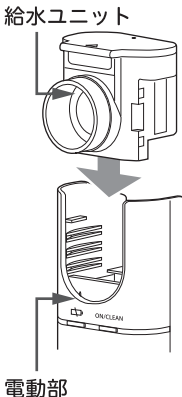


（2）保護キャップ

給水ユニットに下図のとおり取り付けて、吸入器が持ち運び中に起こりうる損傷から保護します。

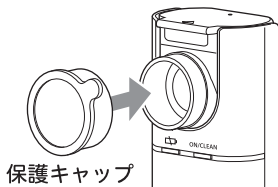

（3）計量スプーン

吸入器の給水ユニットに水 6ml を入れて、計量スプーンで食塩を 1 杯（すり切り）給水ユニットに加えてください。生理食塩水が作れます。（塩分濃度 0.9%）

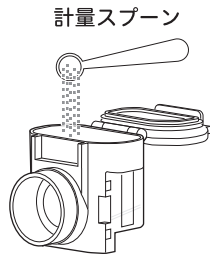

【使用上の注意】

- ・初めて使用するときや長期間使用しなかったとき、または汚れている場合は、洗浄してください。
- ・構成部品を接続する場合は、その互換性、安全性を確認した上で使用してください。
- ・吸入器本体の添付文書や取扱説明書もご参照ください。

【保管方法及び有効期間等】

（1）保管方法

洗浄のあと、直射日光及び高温多湿を避けて保管してください。

（2）耐用期間

1 年（自己認証による）

※耐用期間を超過した場合は交換してください。

【保守・点検に係る事項】

<使用者による保守点検事項>

給水ユニット及び保護キャップ、計量スプーンは下記の手順で消毒出来ます。

シンナー、ベンジン、その他アルコール等の溶剤は使用しないでください。

また、消毒用アルコールに浸漬したあとは水で十分にゆすいで乾燥させてください。

取扱説明書を必ずご参照ください。

消毒方法

給水ユニットや保護キャップ、計量スプーンは、洗浄後に必要に応じて消毒を行うことが可能です。

1. 給水ユニットや保護キャップ、計量スプーンを 81.4v/v%以下の消毒用エタノールに約 10 分間浸します。

※消毒用エタノール以外の消毒や除菌（煮沸消毒、スチーム除菌、電子レンジ除菌、次亜塩素酸ナトリウム等による薬液消毒（ミルクポン等））は行わないでください。

※複数の人に使用する場合、給水ユニットは吸入する人ごとに洗浄、消毒してください。

※消毒液に部品全体を浸してください。

2. 浸した後、その消毒用エタノールを捨て、水でゆすぎます。

※ゆすぎ残しのないように十分な量の水で洗浄してください。

3. 糸くずの出ない清潔な紙または布の上に置き乾燥させます。

※綿やその他の素材での布で乾燥させないでください。ほこりや布の繊維がメッシュに残り、噴霧量が低下する可能性があります。

※メッシュ部をティシュペーパーなどで拭かないでください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元

名称： 株式会社エー・アンド・デイ
住所： 〒364-8585 埼玉県北本市朝日 1-243
電話： 0120-514-016

製造元

名称： HEALTH & LIFE Co., Ltd.(台湾)
ヘルス アンド ライフ

販売元

名称： ピジョン株式会社
住所： 〒103-8480 東京都中央区日本橋久松町 4-4
電話： 0120-741-887（お客様相談窓口）