


機械器具（76）医療用吸入器
管理医療機器 家庭用超音波吸入器（JMDN コード：71020000）

「ポータブル吸入器 Misty」の専用部品（吸入マスク）

【禁忌・禁止】

- ・本品の接続可能な機器以外には使用しないでください。
[被接続器が正常に動作しません]
- ・お子さまが本品で遊ぶことがないようにご注意ください。また、乳幼児やお子さまの手の届かないよう本品を保管してください。
[小さな部品を飲み込むおそれがあります。その場合は、すぐに医師の治療を受けてください]

【形状・構造及び原理等】
各部の名前

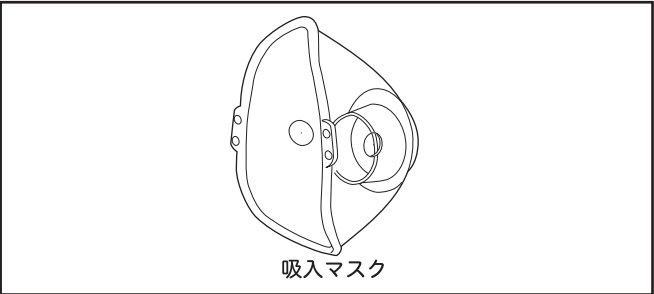

吸入マスク

構成部品

吸入マスク	1 個
添付文書	1 部


体に接触する部分の原材料
吸入マスク：PVC

【使用目的又は効果】
ポータブル吸入器 Misty（鼻腔と咽喉の加湿、洗浄により不快感の改善。一般家庭で使用する。）の専用部品で吸入用マスクとして使用します。

【使用方法等】
本品に接続可能な機器は以下の通りです。（以下、吸入器と称す）

販売名	認証番号
ポータブル吸入器 Misty	307AHBZX00012000

給水ユニットに下図のとおり取り付けて、鼻と口をマスクで覆って吸入します。

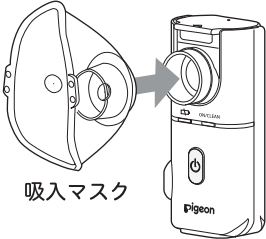

【使用上の注意】
・初めて使用するときや長期間使用しなかったとき、または汚れている場合は洗浄してください。

・構成部品を接続する場合は、その互換性、安全性を確認した上で使用してください。
・吸入器本体の添付文書や取扱説明書もご参照ください。

【保管方法及び有効期間等】

（1）保管方法
洗浄のあと、直射日光及び高温多湿を避けて保管してください。

（2）耐用期間
1 年（自己認証による）
※耐用期間を超過した場合は交換してください。

【保守・点検に係る事項】
<使用者による保守点検事項>
吸入マスクは、下記の手順で消毒出来ます。
シンナー、ベンジン、その他アルコール等の溶剤は使用しないでください。
また、消毒用アルコールに浸漬したあとは水で十分にゆすいで乾燥させてください。

消毒方法
吸入マスクは、洗浄後に必要に応じて消毒を行うことが可能です。
1. 吸入マスクを 81.4v/v%以下の消毒用エタノールに約 10 分間浸します。
※消毒用エタノール以外の消毒や除菌（煮沸消毒、スチーム除菌、電子レンジ除菌、次亜塩素酸ナトリウム等による薬液消毒（ミルキュポン等））は行わないでください。
※複数の人に使用する場合、吸入する人ごとに洗浄、消毒してください。
※消毒液に部品全体を浸してください。
2. 浸した後、その消毒用エタノールを捨て、水でゆすぎます。
※ゆすぎ残しのないように十分な量の水で洗浄してください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元
名称： 株式会社エー・アンド・デイ
住所： 〒364-8585 埼玉県北本市朝日 1-243
電話： 0120-514-016

製造元
名称： HEALTH & LIFE Co., Ltd.(台湾)
ヘルス アンド ライフ

販売元
名称： ビジョン株式会社
住所： 〒103-8480 東京都中央区日本橋久松町 4-4
電話： 0120-741-887（お客様相談窓口）

取扱説明書を必ずご参照ください。