

2020 年 10 月（第一版）

類別：機械器具 80 はり又はきゅう用器具 届出番号：20B2X00003000008

一般医療機器 家庭用貼付型接触粒（JMDN コード 71026000）

## TERAX CARETECT 鉤石付きパッド

### 【禁忌・禁止】

- 次の人には使用しないこと
- アトピーなどによる知覚、皮膚敏感症
- 心臓疾患
- アトピー性皮膚炎
- 金属アレルギー

### 【形状・構造及び原理等】

#### 1. 構成

本体と貼付シールで構成されます。

素材・本体

ポリシリコン

素材・貼付シール

基剤 ポリウレタン不織布

粘着剤 アクリル系粘着剤


離型紙 クラフト紙、ポリエチレン/シリコン

#### 1) 本体

直径 8mm 高さ 3.5mm



#### 2) 貼付シール

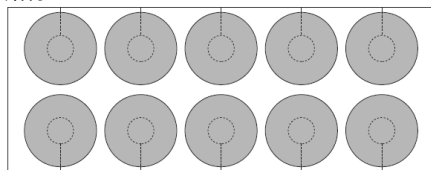

#### 2. 原理

粘着テープ中央に本体を付し、身体のコリの部分に貼付することによる「コリの緩解」

### 【使用目的又は効果】

家庭において、粘着テープの中央に粒状の硬質物を付し、身体のコリの部分に貼付することにより圧迫し、「コリの緩解」を目的とする器具をいう。本品は家庭において使用する。本体は再使用可能。

### 【使用方法等】

1. 使用する際には、説明書をよくお読みになってからご使用してください。
2. 貼付シールの台紙の中央部をはがし本体を貼付シールに貼ります。
3. 貼付シールをすべて台紙からはがし、コリのある箇所に貼ります。
4. 本体は貼替が可能です。台紙に残った貼付シールは本体を貼替える際にご使用ください。

### 【使用上の注意】

#### 1. 重要な基本的注意

- 1) **本品使用時、水晶発振式機器（心臓ペースメーカー、腕時計等）に支障をきたす場合がございます。**
- 2) 着用してしばらくした後、傷み等を感じた場合は使用を中止し、医師に相談して下さい。

#### 2. 不具合・有害事象

その他の有害事象

- 装着部に発しん（疹）、発赤、かゆみなどの症状が現れた場合は、使用を直ちに中止して下さい。

- 装着部に傷、湿疹、かぶれ等の異常がある場合は、直接本品が接触しないようにして下さい。
- 目の周囲、粘膜部分には使用しないで下さい。

#### 3. その他の注意

- 1) 一度使用した後、貼り直すと貼付シールがはがれやすくなりますので新しい貼付シールをご使用下さい。
- 2) 入浴する際は外して下さい。

### 【保管方法及び有効期間等】

#### 1. 保管方法

小児及び監督を必要とする方の手の届かない場所に保管してください。

高温多湿や直射日光を避けて保管して下さい。

### 【保守・点検に係る事項】

#### 1. 使用者による保守点検事項

- 1) 本品に変形、破損がないか点検を行って下さい。
- 2) 煮沸消毒などは、しないで下さい。

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社遠赤技研

住 所：長野県安曇野市豊科 4471-1

製 造 業 者：株式会社遠赤技研

### 【販売業者の連絡先】

東光商事株式会社

住所：大阪市西区土佐堀 1-3-20 三菱重工大阪ビル 10F

電話：06-6479-3598