

類別：医 04 整形用品 届出番号：20B2X00003000052
一般医療機器 家庭用遠赤外線血行促進用衣（JMDN コード 71105001）

FS2 リカバリーウェア

【禁忌・禁止】

次の人には使用しないこと


- 湿疹、かぶれ、傷口など皮膚に異常がある部位には使用しないでください
- 金属アレルギー

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造

本製品は、衣類形状の医療機器です。


① 顔まですっぽりロングトップス

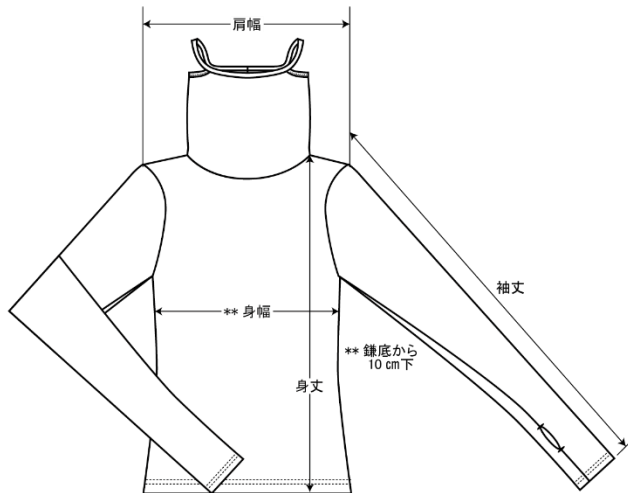

単位：cm

サ イ ズ	M	L	LL	3L
身 丈	58	59	60	61
肩 幅	36	38	41	44
身 幅	**42	**45	**48	**51
袖 丈	67.5	68.5	69.5	70.5


② はら巻き付きレギンス

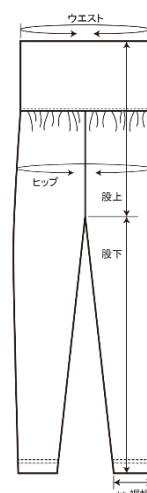

単位：cm

サ イ ズ	M	L	LL	3L
ウ エ ス ト	68	74	80	86
ヒ ッ プ	86	92	98	104
股 上	32.5	34.5	36.5	38.5
股 下	62.5	63.5	64.5	65.5
裾 幅	10.5	11.5	12	12.5


③ 美ハイネックトップス

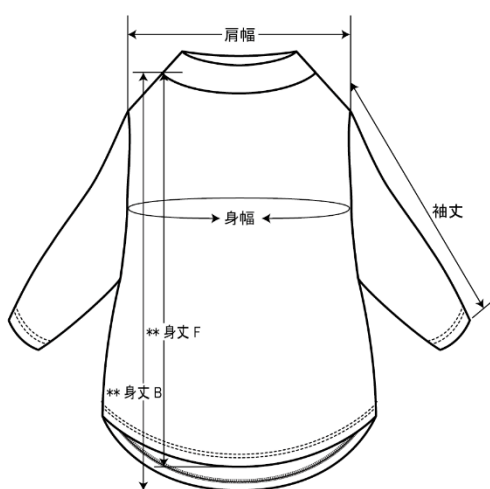

単位：cm

サ イ ズ	M	L	LL	3L
身 丈 F/B	63/67	64/68	65/69	66/70
肩 幅	52	53	54	55
身 幅	106	112	118	124
袖 丈	50	50.5	51	51.5

④ 美ストレートパンツ

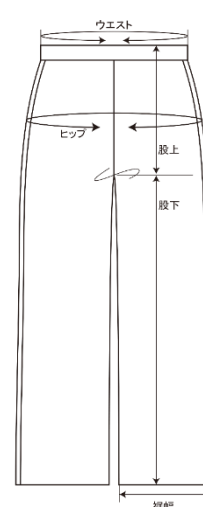

単位：cm

サ イ ズ	M	L	LL	3L
ウ エ ス ト	64	70	76	82
ヒ ッ プ	96	102	108	114
股 上	29	30	31	32
股 下	65	65	65	65
裾 幅	25	26	27	28

2. 原理

本品を着用すると、鉱石パウダーをプリントした生地に体温（熱）が伝わることにより遠赤外線が放射され、血行が促進されます。一般的に血行が促進されると疲労や筋肉の緊張（コリ）症状が緩和されることが報告されています。

* 【使用目的又は効果】

遠赤外線の血行促進効果による

- ・ 血行促進
- ・ 筋肉のこり改善
- ・ 疲労の回復、改善
- ・ 筋肉の疲れを軽減

* 【使用方法等】

1. 本品に変形、破れ、ほつれがないか確認してください。
2. 衣類として直接肌に着用してください。
3. 上下セットでの着用をお勧めします。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意
 - 1) 睡眠時の着用は、発汗作用が高まることから、十分な水分補給を行ってください。
2. その他の注意
 - 1) 体に合ったサイズの物を使用してください。無理に小さい物を着用した場合には、極端な圧迫が加わり血流を妨げる事になります。

* 【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法
高温多湿や直射日光を避けて保管して下さい。

* 【耐用期間】

1. 2 年

【取り扱い上の注意】

1. 本品は繰り返し使用可能ですが、素材の特性上、湿気や日光の影響を受ける事や、長期間の使用により経年劣化で伸びが生じる場合がありますのでご注意ください。
- * 2. 火に近づけますと、繊維が溶けたり、燃えたりする恐れがあります。ご使用の際には、充分ご注意ください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者： 株式会社遠赤技研

住 所： 長野県安曇野市豊科 4471-1

【販売業者の連絡先】

株式会社フェリシモ

〒654-0161 神戸市須磨区弥栄台 2-7

フェリシモ商品センター TEL0120-924-213