

エンドビジョン カメラヘッド 手術用マイクロスコプアダプター

【禁忌・禁止】＊＊

本品をBF形装着部のカメラコントロールユニット、光源装置等の併用機器と接続する場合、心臓及びその近傍へ使用しないこと。また、心臓及びその近傍に接触している処置具や内視鏡等に接触させないこと。[漏れ電流により患者の心臓機能に影響し心室細動などを起こす危険がある]

【形状・構造及び原理等】

1. C-マウントマイクロスコプアダプター



2. C-マウントアダプター



3. オプティカルビームスプリッター50/50



4. TVアダプター




【使用目的又は効果】

本品は、オプティカルビームスプリッターを介して手術用マイクロスコプに各種のカメラヘッドを接続する目的で使用する。

【使用方法等】

1. 使用する手術用マイクロスコプにオプティカルビームスプリッター①を取り付ける。
2. オプティカルビームスプリッターにTVアダプター②を取り付ける。
3. TVアダプターにC-マウントマイクロスコプアダプター③又はC-マウントアダプター④を取り付ける。
4. C-マウントマイクロスコプアダプターを介してC-マウントカメラヘッド⑤を取り付け、C-マウントアダプターを介してパーフォーカルズームレンズ付カメラヘッド⑥を取り付ける。

＜接続図＞

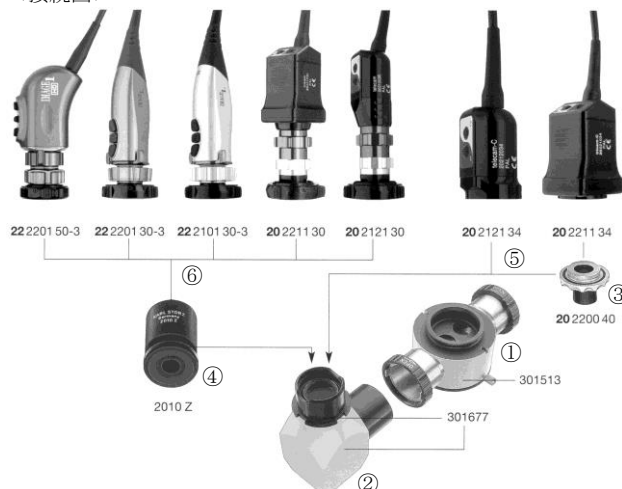

【使用上の注意】

＜重要な基本的注意＞

1. 本装置は完全に乾いた状態で使用すること。

【保管方法及び有効期間等】＊＊

1. 水のかからない場所に保管すること。
2. 気圧、温度、湿度、風通し、日光やほこり、あるいは塩分やイオウ分を含んだ空気などによって悪影響を受けない場所に保管すること。
3. 傾斜、振動、衝撃等のない安定した場所に保管すること。
4. 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に保管しないこと。

【保守・点検に係る事項】＊

1. しばらく使用しなかった後、再使用する時は、使用前に必ず本品が正常かつ安全に作動することを確認すること。
2. 使用前に動作及び外観に異常がないことを確認すること。（特に体内に入る部分及び可動部分については入念に確認すること。）
3. 本品は、使用后乾いた布等で汚れをふき取っておくこと。また、状況に応じて消毒用アルコールで表面を拭き取る。（液体が内部に入らないよう注意すること）

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】＊



製造販売業者： エム・シー・メディカル株式会社

電話：03-5715-2800（代表）

製造業者： カールストルツ社（KARL STORZ SE & Co. KG）

国名：ドイツ