

機械器具(25) 医療用鏡
 一般医療機器 外部電源式内視鏡用光源装置 35158001
 特定保守管理医療機器


パワーLED 175 SCB

【禁忌・禁止】


- 可燃性麻酔剤の付近で装置を使用しないこと。
- 使用中に光の出口や、ライトケーブルの末端を覗かないこと。[閃光により目に損傷を受ける危険がある]

【形状・構造及び原理等】**

正面

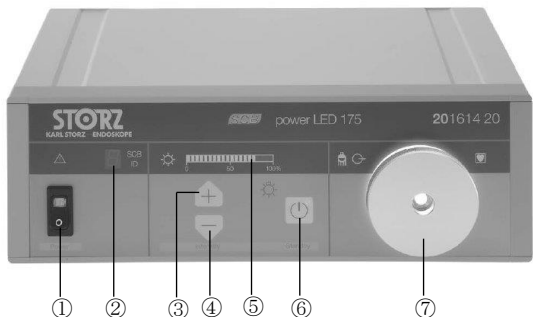

裏面

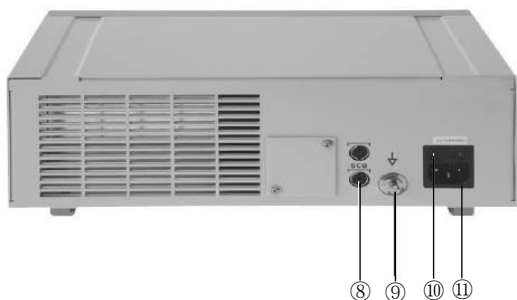

＜各部の名称及び機能＞

番号	名 称	機 能 及 び 動 作
①	主電源スイッチ	医用電源をオン／オフする。
②	SCBインジケータ	SCBシステムの環境下で複数のパワーLED 175 SCBが使用されている際に、個体を認識するために1～9までのシリアル番号を表示する。
③	照度調節ボタン(上)	照度を上げる。
④	照度調節ボタン(下)	照度を下げる。
⑤	照度表示	現在選択中の照度を％で表示する。
⑥	スタンバイボタン	一回押すと、最小照度に切り替わる。再度押すと直前で設定していた照度に切り替わる。
⑦	ライトケーブルアダプター	光伝導器具の接続口
⑧	SCBポート	SCBケーブルの接続口
⑨	アース端子	アース線を接続する。
⑩	ヒューズホルダー	ヒューズの収納
⑪	電源コードコネクタ	電源コードの接続コネクタ

＜電気的定格＞

定格電圧：AC100V
 周 波 数：50/60Hz
 電源入力：110VA

＜機器の分類＞

電撃に対する保護の形式：クラスⅠ機器
 電源に対する保護の程度：CF形装着部

＜仕様＞

LED寿命：約30000時間
 色温度：6000K

【使用目的又は効果】

本品は、硬性又は軟性内視鏡とその付属品の使用時に、手術野及び体腔の観察のために光を供給する目的で使用する外部電源式装置である。

【使用方法等】

- ※取扱説明書の内容を参照のこと。
- アース端子にアース線を接続する。
 - 必要に応じてSCB対応機種と本品をSCBケーブルで接続する。
 - 電源コードを電源コードコネクタに接続し、医用電源コンセントに接続する。
 - ライトケーブルをライトケーブルアダプターに接続する。
 - ライトケーブルの他端を使用する内視鏡等に接続する。
 - 電源スイッチを入れる。
 - 自動的にスタンバイモード(最小照度)で起動する。
 - 必要に応じて照度調節ボタン(上)(下)で目的の照度に設定する。

【使用上の注意】*

- 機器を設置するときは、次の事項に注意すること。
 - 水のかからない場所に保管すること。
 - 気圧、温度、湿度、風通し、日光やほこり、或いは塩分やイオウ分を含んだ空気などによって悪影響を受けない場所に保管すること。
 - 傾斜、振動、衝撃(運搬時を含む)などの安定状態に注意すること。
 - 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に保管しないこと。
- 機器を使用する前には次の事項に注意すること。
 - スイッチ及びディスプレイ等の動作状況の点検を行い、機器が正確に作動することを確認する。
 - 全てのコードの接続が正確で、かつ、安全であることを確認すること。
 - 機器にグリースや油等を使用しないこと。
- 機器の使用中は次の事項に注意すること。
 - 機器全般に異常のないことを絶えず監視すること。
 - 機器に異常が発見された場合には、すみやかに機器の作動を止めるなど、適切な措置をとること。
 - 患者の手に触れないようにすること。
- 機器の使用後は次の事項に注意すること。
 - 定められた手順により、操作スイッチを使用前の状態に戻した後、電源を切ること。
 - コード類を取り外す際は、コードを持って引き抜くなど無理な力をかけないこと。
 - 清掃は、電源プラグを取り外して、機器表面を洗浄剤を用いて拭く。その際に、機器内に液体が入らないように注意して行うこと。

【保管方法及び有効期間等】

- 水のかからない場所に保管すること。
- 気圧、温度、湿度、風通し、日光やほこり、或いは塩分やイオウ分を含んだ空気などによって悪影響を受けない場所に保管すること。
- 傾斜、振動、衝撃(運搬時を含む)などの安定状態に注意すること。
- 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に保管しないこと。

【保守・点検に係る事項】＊

◆使用者による保守点検事項

1. しばらく使用しなかった後、再使用する時は、使用前に必ず機器が正常かつ安全に作動することを確認すること。
2. 使用前に動作及び外観に異常がないことを確認すること。

◆業者による保守点検事項

1. 定期的に当社の保守点検を受けること。
2. 故障したときは、勝手にいじらず適切な表示を行い、修理は当社に任せること。
3. 修理・保守に関するご相談は担当営業者若しくは下記にご連絡ください。

エム・シー・メディカル株式会社 物流センター

TEL:03-5665-7082

FAX:03-5665-7083

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】＊，＊ ＊



製造販売業者： エム・シー・メディカル株式会社
電話:03-5715-2800（代表）

製 造 業 者： カールストルツ社 (KARL STORZ SE & Co. KG)
国名:ドイツ



添KS793-4