

＊ ＊ 2017年12月改訂（第11版）
＊ 2017年7月改訂（第10版）（新記載要領に基づく改訂）

届出番号:13B1X000880mt008


機械器具(51) 医療用嘴管及び体液誘導管
一般医療機器 気腹用チューブ 70353000
(送気送水チューブ 70356000) ＊ ＊

気腹用チュービングセット

再使用禁止

【禁忌・禁止】＊
CO₂ガスフィルター及びルアーロックコネクター付チューブは滅菌済みディスポーザブル製品であるので再使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

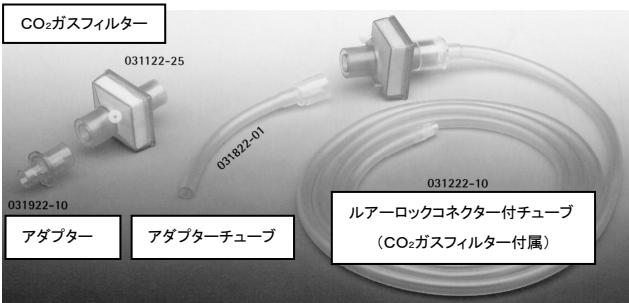

番 号	名 称	機能及び動作
K03192201	アダプター	CO ₂ ガスフィルターをサーモフレーター の炭酸ガス出口に合わせるために用い る。
K03192210		
K03112201	CO ₂ ガスフィルター	体内からの逆流物質除去及び送気ガス 中の微粒子除去
K03112225		
K03182201	アダプターチューブ	CO ₂ ガスフィルターの入力口を、筈ニッ プルタイプの気腹装置へ接続する。
K03122201	ルアーロックコネクター付 チューブ	気腹針又はトロカール等とCO ₂ ガスフイ ルターとの接続に用いる。
K03122210		
K03120001		
K03120010		
K03162201	CO ₂ ガスフィルター付	気腹ガスを気腹針又はトロカール等へ送 るために用いる。
K03162210	送気用チュービングセット	

【使用目的又は効果】 ＊ ＊

本品は、気腹装置と気腹針又はトロカールとの接続、若しくは送気装置と内視鏡又は内視鏡用処置具等に用いる柔軟性のあるチューブでフィルタを含む。

【使用方法等】 ＊ ＊

※ K03162210、K03162201 を使用する場合は、気腹装置の流量を30L/min 以下に設定して送気すること。

※ 気腹装置の添付文書及び取扱説明書を参照のこと。

＜使用前準備＞

1. CO₂ガスフィルター及びルアーロックコネクター付チューブは滅菌包装を開けて無菌的に取り出す。
2. アダプター及びアダプターチューブは包装を開けて取り出す。
3. CO₂ガスフィルター及びルアーロックコネクター付チューブは、包装の開封、破損、汚損又はピンホール等が認められた場合は使用しないこと。

＜使用中＞

1. 気腹装置又は送気装置の送気ガス出口にCO₂ガスフィルター及びルアーロックコネクター付チューブを接続する。必要に応じて、アダプターあるいはアダプターチューブを取り付けること。
2. ルアーロックコネクター側を気腹針又はトロカール又は内視鏡又は内視鏡用処置具等と接続する。

＜使用后＞

1. 気腹装置又は送気装置より取り外したCO₂ガスフィルター及びルアーロックコネクター付チューブは適切な方法により廃棄を行う。同様に取り外したアダプターチューブ、アダプターは適切に洗浄後、再使用のため保管する。
2. CO₂ガスフィルター及びルアーロックコネクター付チューブは、滅菌済みディスポーザブル製品であるため、一回限りの使用のみで再使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】 ＊

＜保管方法＞

1. 水のかからない場所に保管すること。
2. 気圧、温度、湿度、風通し、日光やほこり、或いは塩分やイオウ分を含んだ空気などによって悪影響を受けない場所に保管すること。

3. 傾斜、振動、衝撃(運搬時を含む)などの安定状態に注意すること。
4. 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に保管しないこと。
5. 製品は室温(<55℃max)、湿度70%以下で保管すること。

<有効期間>

個別包装に記載。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】＊



製造販売業者:エム・シー・メディカル株式会社

電話:03-5715-2800 (代表)

製造業者: カールストルツ社 (KARL STORZ SE & Co.KG)

国名:ドイツ



添mt008-11