

＊ ＊ 2017年7月改訂（第4版）（新記載要領に基づく改訂）

＊ 2012年3月改訂（第3版）

届出番号:13B1X000880mt011

機械器具(51) 医療用嘴管及び体液誘導管

一般医療機器 送水吸引チューブ 70355000


クリアビジョンⅡ用チューピングセット

再使用禁止

【禁忌・禁止】 ＊ ＊

滅菌済みディスポーザブル製品であるので再使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

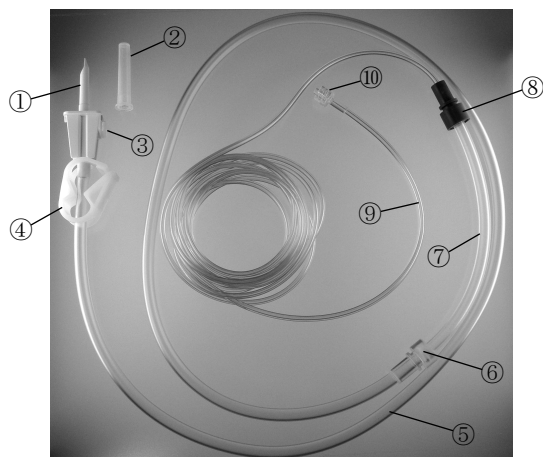

番号	名 称	機 能 及 び 動 作	原 材 料
①	バンクチャーニードル	灌流液バッグに穿刺する。	ABS樹脂 ＊
②	保護キャップ	バンクチャーニードルの保護	高密度ポリエチレン
③	通気口	チューブ内のエア抜きを行なう。	ポリエチレン
④	チューブクランプ	灌流量を調節または停止する。	高密度ポリエチレン ＊
⑤	輸液チューブ	灌流液を送液する。	ポリ塩化ビニル ＊ (DEHP)
⑥	コネクター(無色)	ポンプチューブと輸液チューブとの接続。	ABS樹脂 ＊
⑦	ポンプチューブ	ポンピングを行う部分	シリコーン ＊
⑧	コネクター(青)	ポンプチューブと接続チューブとの接続。	ABS樹脂 ＊
⑨	接続チューブ	灌流液を送液する。	ポリ塩化ビニル ＊ (DEHP)
⑩	接続プラグ	灌流用シースに接続する。	ABS樹脂 ＊


※：組織、体液又は血液に直接又は間接的に接触することがある部分
＊

【使用目的又は効果】

本品は、内視鏡等のレンズに付着した血液や異物を除去するために、液体をレンズ端面に送水する器具に接続し、洗浄液のポンピング及び流路として使用されるディスポーザブルのチューピングセットである。

【使用方法等】

1. 包装を開けて取り出す。
注：包装の開封、破損、汚損又はピンホール等が認められた場合は使用しないこと。
2. 器具のポンプリールレバーを水平方向に下げる。
3. 図のようにポンプチューブをリールに取り付ける。
注：ポンプチューブのコネクターはサイズが異なるので一方方向にのみ挿入することができる。
4. ポンプリールレバーを垂直に上げポンプチューブをロックする。
注：ポンプチューブが固定されないとポンプをスタートさせることができない。
5. チューブクランプを閉じる。
6. バンクチャーニードルから保護キャップを取り、灌流液バッグに差し込み、通気口を開ける。
7. 接続チューブ(細い方)の接続プラグを洗浄用シースに接続する。
8. 洗浄器の取扱説明書に従って、灌流を行う。
9. 使用後は洗浄器より取り外し、再使用せず適切な方法により廃棄を行う。

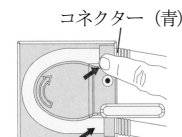

【使用上の注意】 ＊ ＊

<重要な基本的注意>

1. 接続部の径が合わないときには無理に使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】 ＊ ＊

<保管方法>

1. 水のかからない場所に保管すること。
2. 気圧、温度、湿度、風通し、日光やほこり、或いは塩分やイオウ分を含んだ空気などによって悪影響を受けない場所に保管すること。
3. 傾斜、振動、衝撃(運搬時を含む)などの安定状態に注意すること。
4. 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に保管しないこと。

<有効期間>

個別包装に記載。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】 ＊ ＊ ＊



製造販売業者：エム・シー・メディカル株式会社

電話：03-5715-2800（代表）

製造業者：カールストルツ社（KARL STORZ GmbH & Co.KG）

国名：ドイツ