

機械器具(51) 医療用嘴管及び体液誘導管
 一般医療機器 送水吸引チューブ 70355000


E. A. S. I. 用チュービングセット

再使用禁止

【禁忌・禁止】 **
 使用方法
 ・再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

1. 送水チューブ (K03171701, K03171710)

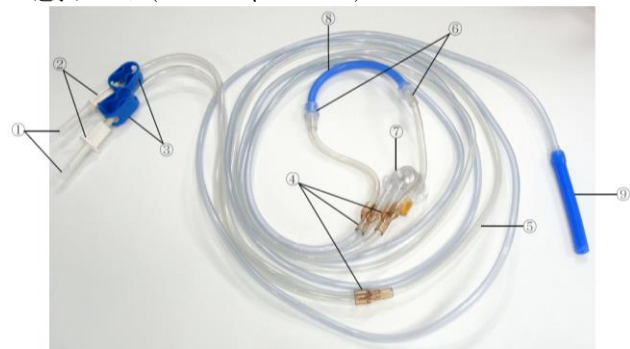


<各部の説明> **

番号	名 称	機能及び動作	原材料*
①	保護キャップ	未使用時のスパイクを保護する。	—
②	スパイク	灌流バッグに差し込む部分。	ABS 樹脂
③	クランプ	灌流量を調節または停止する。	—
④	Yコネクタ	灌流液を分岐する。	ポリ塩化ビニル (DEHP15～20%、ステアリン酸亜鉛 0～1%)
⑤	輸液チューブ	灌流液の流路。	ポリ塩化ビニル (DEHP39.5%)
⑥	リングコネクタ	ポンプチューブと輸液チューブを連結する。	ポリエステル
⑦	圧力測定チャンバー	チューブ内の圧力を装置のセンサーに伝える。	ポリエステル シリコン ステンレス鋼 ポリ塩化ビニル
⑧	ポンプチューブ	装置のローターに装着する部分。	シリコンゴム
⑨	送水用コネクタ	灌流器具等に接続する。	シリコンゴム ポリエステル

※:組織、体液又は血液に直接又は間接的に接触することがある部分


2. 吸引チューブ (K03121701, K03121710)

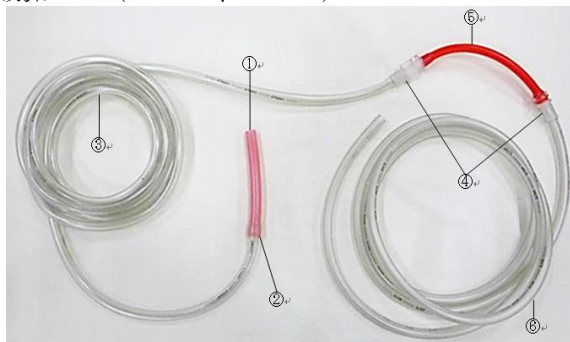

<各部の説明>

番号	名 称	機能及び動作	原材料
①	吸引用コネクタ	吸引器具等に接続する。	—
②	コネクタ	輸液チューブを連結する。	—
③	輸液チューブ	灌流液の流路。	—
④	コネクタ	ポンプチューブと輸液チューブを連結する。	—
⑤	ポンプチューブ	装置のローターに装着する部分。	—
⑥	輸液チューブ	灌流液の流路。	—

3. 送水用ディセクトチューブ (K03176701, K03176710)

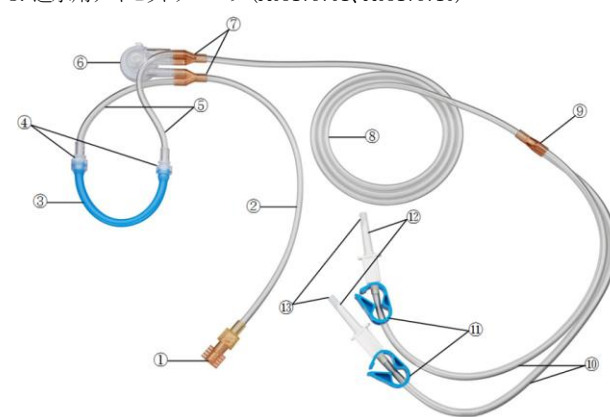


<各部の説明> **

番号	名 称	機能及び動作	原材料*
①	ロックアダプタ	患者チューブに接続する。	ポリ塩化ビニル
②	輸液チューブ	灌流液の流路。	ポリ塩化ビニル (DEHP39.5%)
③	ポンプチューブ	装置のローターに装着する部分。	シリコンゴム
④	リングコネクタ	ポンプチューブと輸液チューブを連結する。	ポリエステル
⑤	輸液チューブ	灌流液の流路。	ポリ塩化ビニル (DEHP39.5%)
⑥	圧力測定チャンバー	チューブ内の圧力を装置のセンサーに伝える。	ポリエステル シリコン ステンレス鋼 ポリ塩化ビニル
⑦	Yコネクタ	灌流液を分岐する。	ポリ塩化ビニル
⑧	輸液チューブ	灌流液の流路。	ポリ塩化ビニル (DEHP39.5%)
⑨	Yコネクタ	灌流液を分岐する。	ポリ塩化ビニル
⑩	輸液チューブ	灌流液の流路。	ポリ塩化ビニル (DEHP39.5%)
⑪	クランプ	灌流量を調節または停止する。	—
⑫	スパイク	灌流バッグに差し込む部分。	ABS 樹脂
⑬	保護キャップ	未使用時のスパイクを保護する。	—

※:組織、体液又は血液に直接又は間接的に接触することがある部分

4. 送水用患者チューブ (K03116201、K03116210)

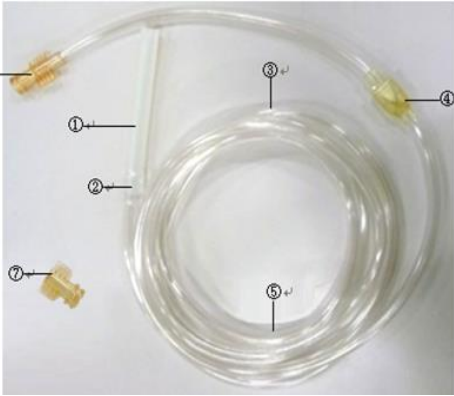

<各部の説明> **

番号	名 称	機能及び動作	原材料※
①	送水用コネクタ	灌流器具等に接続する。	シリコーンゴム
②	リングコネクタ	輸液チューブと送水用コネクタを連結する。	ポリエステル
③	輸液チューブ	灌流液の流路。	ポリ塩化ビニル (DEHP39.5%)
④	チェックバルブ	逆流を防ぐ。	ポリ塩化ビニル
⑤	輸液チューブ	灌流液の流路。	ポリ塩化ビニル (DEHP39.5%)
⑥	ロックアダプタ	ディセツチューブに接続する。	ポリ塩化ビニル
⑦	エキストラキャップ	使用後に、ディセツチューブのロックアダプタと接続する。	—

※:組織、体液又は血液に直接又は間接的に接触することがある部分

【使用目的又は効果】

本品は、送水装置又は吸引装置と、内視鏡又は内視鏡用処置具等との接続に用いる柔軟性のあるチューブである。

【使用方法等】 **

<使用前準備>

1. 滅菌包装を開けて、無菌的に本品を取り出す。
2. 滅菌包装に破損、汚損又はピンホール等が認められた場合、本品を使用しないこと。

<使用中>

1. 本品を送水装置又は吸引装置と灌流器具等に接続する。
2. ポンプを作動させ、チューブ内のエアを抜く。
3. 目的の処置を行う。

<使用后>

1. 本品を取り外し、適切な方法により廃棄を行う。
2. 本品は、滅菌済ディスプレイ製品であるため、一回限りの使用のみで再使用しないこと。

【使用上の注意】 *

<重要な基本的注意>

1. 接続部の径が合わないときには無理に使用しないこと。
2. 使用中は、本品及び患者に異常のないことを絶えず監視すること。
3. 本品に使用されるポリ塩化ビニルには可塑剤としてフタル酸ジ-2-エチルヘキシル (DEHP) が含まれ、溶出する可能性があるので注意すること。

【保管方法及び有効期間等】 *

<保管方法>

1. 室温下で保管すること。
2. 水に濡れないように保管すること。
3. 直射日光の当たる場所、高温・多湿な場所、過度なほりが発生する場所、空气中に塩分やイオウ分を含む場所での保管は避けること。
4. 傾斜、振動、衝撃(運搬時を含む。)等安定状態に注意すること。
5. 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に保管しないこと。

<有効期間>


個別包装に記載。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】 **



製造販売業者： エム・シー・メディカル株式会社
電話:03-5715-2800 (代表)

製 造 業 者： カールストルツ社 (KARL STORZ SE & Co. KG)
国名:ドイツ



添mt019-7