

※ 2017年6月作成 (第4版)  
※ 2017年5月作成 (第3版)

届出番号: 13B1X000880mt022

機械器具(51) 医療用嘴管及び体液誘導管  
一般医療機器 排気用チューブ 70354000  
(送水吸引チューブ 70355000)

Sパイロット用チュービングセット

再使用禁止

【禁忌・禁止】

本品はディスポーザブル製品であるので再使用しないこと。


【形状・構造及び原理等】 ※, ※

※代表的な形状を下記に示す。(滅菌済・単回使用)

K03144701、K03144710



K03145701、K03145710

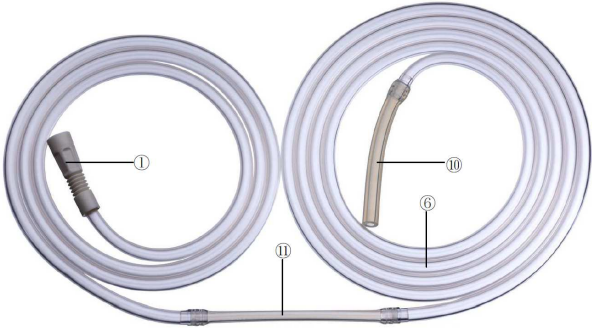

| 番号 | 名 称       | 機能及び動作                                   |
|----|-----------|------------------------------------------|
| ①  | 吸引器側コネクタ  | 吸引器と接続するコネクタ。                            |
| ②  | Y字アダプタ    | 吸引器とメインチュービング及びサブチュービングを繋ぐ。              |
| ③  | チューブクランプ  | サブチュービングを使用しない場合、吸引の流れを停止する。             |
| ④  | サブチュービング  | 吸引した液体又は気体等を吸引器へ送る。                      |
| ⑤  | サブコネクタ    | チューブ (別売品) を介して、吸引カニュレ等と接続する。使用しない場合もある。 |
| ⑥  | メインチュービング | 吸引した液体又は気体等を吸引器へ送る。                      |
| ⑦  | ローラーランプ   | チューブ内を流れる液体又は気体等の流れを調節または停止する。           |

|   |             |                              |
|---|-------------|------------------------------|
| ⑧ | シリコンチューブ    | メインチュービングとルアーロックコネクタを接続する部分。 |
| ⑨ | ルアーロックコネクタ  | トロカール等との接続に用いる。              |
| ⑩ | シリコンチューブエンド | モルセレーターのハンドピース等との接続に用いる。     |
| ⑪ | ピンチバルブチューブ  | 装置のピンチバルブに装着する部分。            |

【使用目的又は効果】

本品は、吸引装置と内視鏡用処置具等との接続に用いる又は／及び気腹器の排気装置と内視鏡用処置具又はトロカールとの接続に用いる柔軟性のあるチューブである。

【使用方法等】

※ Sパイロットの添付文書及び取扱説明書を参照のこと。

＜使用前準備＞

1. 包装の開封、破損、汚損又はピンホール等が認められた場合は使用しないこと。
2. 滅菌包装を開けて本品を無菌的に取り出す。
3. 吸引装置と接続した吸引器に、本品の吸引器側コネクタを接続する。
4. 必要に応じて次のいずれかの接続を行う。
  - (1)トロカール等に接続し排気のみを行う場合
    - ① ルアーロックコネクタをトロカール等と接続する。
    - ② チューブクランプを止める。
  - (2)トロカール等に接続し排気及び吸引を行う場合
    - ① ルアーロックコネクタをトロカール等と接続する。
    - ② 吸引カニュレ等にチューブ (別売品) を介して本品のサブコネクタを接続する。
  - (3)モルセレーターのハンドピース等に接続し吸引を行う場合
    - ① シリコンチューブエンドの先端を切断し、モルセレーターのハンドピース等と接続する。
    - ② チューブクランプを止める。
5. Sパイロットにメインチュービングを装着する。

＜使用中＞

1. 目的の処置を行う。

＜使用后＞

1. 接続した機器より取り外し適切な方法により廃棄を行う。
2. 本品は、滅菌済ディスポーザブル製品であるため、一回限りの使用のみで再使用しないこと。

【使用上の注意】

1. 接続部の径が合わないときには無理に使用しないこと。
2. 瑕疵がないことを製品全体に渡ってチェックすること。
3. コネクタ等が確実に接続されていることを確認すること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 本品の保管については、次のことに注意すること。
  - (1) 室温下で保管すること。
  - (2) 水に濡れないように保管すること。
  - (3) 直射日光の当たる場所、高温・多湿な場所、過度なほこりが発生する場所、空気中に塩分やイオウ分を含む場所での保管は避けること。
  - (4) 傾斜、振動、衝撃(運搬時を含む。)等安定状態に注意すること。
  - (5) 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に保管しないこと。
2. 有効期間  
個別包装に記載。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】



製造販売業者:エム・シー・メディカル株式会社

電話:03-5715-2800 (代表)

製造業者:カールストルツ社 (KARL STORZ GmbH & Co. KG)

国名:ドイツ

