

エンドマット用チュービングセット

再使用禁止


【禁忌・禁止】

本品はディスプレイ製品のため、再使用しないこと。


【形状・構造及び原理等】

※代表的な形状を下記に示す。(滅菌済・単回使用)

- (1) HAMOUエンドマットSCB用及びエンドマットセレクト用
(送水用チュービングセット)

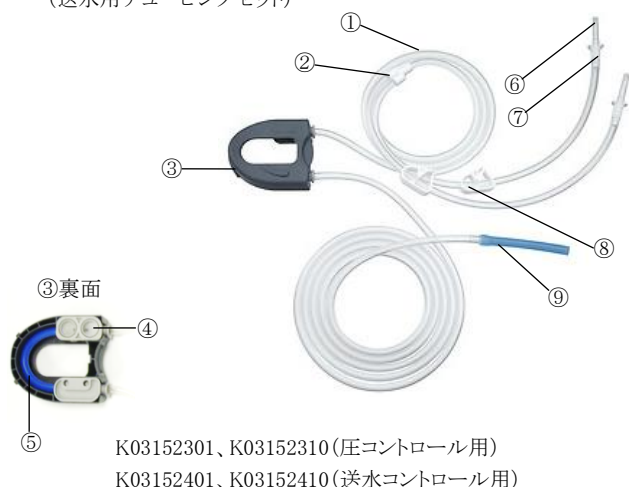

- (2) エンドマットセレクト用(吸引用チュービングセット) *

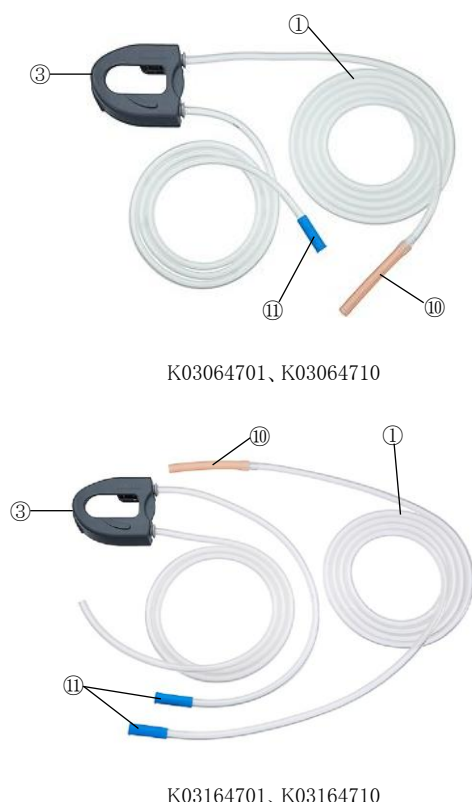

番号	名 称	機能及び動作	原材料
①	輸液チューブ	灌流液の流路。	ポリ塩化ビニル※
②	Yコネクタ	灌流液を分岐する。	ポリ塩化ビニル※
③	チューブカートリッジ	チューブを送水装置又は吸引装置に装着する。	ABS 樹脂
④	メンブレン	チューブ内圧を送水装置又は吸引装置のセンサーに伝える。	シリコーン※
⑤	ポンプチューブ	送水装置又は吸引装置のローラーが回転し、押しつぶされることで、灌流液を送り出す。	シリコーン※
⑥	保護キャップ	未使用時のスパイクを保護する。	ポリエチレン
⑦	スパイク	灌流液バッグに差し込む部分。	ABS 樹脂※
⑧	クランプ	送水量を調節または送水を停止する。	ポリプロピレン
⑨	コネクタ 1	送水器具等に接続する。	シリコーン※
⑩	コネクタ 2	吸引器具等に接続する。	シリコーン※
⑪	コネクタ 3	吸引用ボトル等に接続する。	ポリ塩化ビニル※

※:組織、体液又は血液に間接的又は直接接触することがある部分

【使用目的又は効果】

本品は、送水装置又は吸引装置と、内視鏡又は内視鏡用処置具等との接続に用いる柔軟性のあるチューブである。

【使用方法等】*

<使用前>

- 滅菌包装を開封し、本品を無菌的に取り出す。
- 包装に破損、汚損又はピンホール等がないか確認し、これらが認められた場合には使用しないこと。

<使用中>

・送水用チュービングセットの場合

- チューブカートリッジを送水装置に装着する。
- スパイクを灌流液バッグに挿し込む。
- コネクタ 1 を送水器具等に接続する。
- 送水装置を作動させ、チューブ内のエアを抜いてから目的の処置を行う。

・吸引用チュービングセットの場合

- チューブカートリッジを吸引装置に装着する。
- コネクタ 2 を吸引器具等に接続する。
- コネクタ 3 を吸引用ボトル等に接続する。
- 吸引装置を作動させ、チューブ内のエアを抜いてから目的の処置を行う。

<使用后>

- 本品を送水装置又は吸引装置から取り外し、適切な方法で廃棄する。

【使用上の注意】

<重要な基本的注意>

- 接続部の径が合わないときには無理に使用しないこと。
- コネクタ等が確実に接続されていることを確認すること。
- 接続した内視鏡又は内視鏡用処置具の使用前にポンプを始動させ、チューブ内の気泡を排出させるとともに、正常な灌流液の送排水を確認すること。

【保管方法及び有効期間等】

＜保管方法＞

1. 室温下で保管すること。
2. 水に濡れないように保管すること。
3. 直射日光の当たる場所、高温・多湿な場所、過度なほこりが発生する場所、空气中に塩分やイオウ分を含む場所での保管は避けること。
4. 傾斜、振動、衝撃(運搬時を含む。)等安定状態に注意すること。
5. 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に保管しないこと。

＜有効期間＞

個別包装に記載。

【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称等】



製造販売者： エム・シー・メディカル株式会社
電話:03-5715-2800（代表）

製 造 業 者： カールストルツ社 (KARL STORZ SE & Co. KG)
国名:ドイツ

