

機械器具 50 開創又は開孔用器具
一般医療機器 内視鏡用マウスピース 70951000

再使用禁止

バイト ブロック


*【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止
- ・適用対象（患者）
 - ・プラスチックアレルギー反応を起す患者には使用しないで下さい。

【形状・構造及び原理等】

2. 構造、構成

① バイトブロック 本体

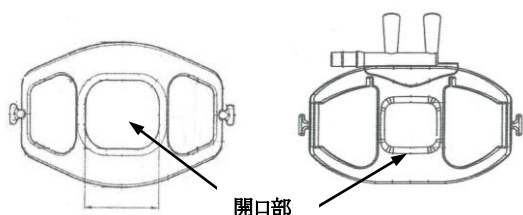

② ストラップ: 550mm



2. 種類

製品番号	開口部 mm		内 容	箱
	縦	横		
MED/102	21	25	大人用、ストラップ付き	50 個
MED/106/P	16	20	小児用、ストラップ付き	50 個
MED/106	18	20	ERCP 用、ストラップ付き	50 個
OXYMED	18	20	酸素チューブ用コネクタ ー付き、ストラップ付き	50 個
** OXY/100	21	25	酸素チューブ用コネクタ ー付き、ストラップ付き	50 個

3. 作動原理

患者の口に装着し、開口状態を保持し内視鏡の挿入を容易にし、また内視鏡の
損傷から保護する。

【使用目的又は効果】

- ・本品は内視鏡使用時に患者の開口状態を保持する器具である。

【使用方法等】

1. 使用前：

- 1) 本品に異常のないことを確認してください。
- 2) 使用前には、本品のサイズと内視鏡が適合していることを確認してください。
- 3) 患者の頭部のサイズに応じて、固定するストライプの長さを調節してください。

2. 使用に際して：

- 1) 本品の患者の口に挿入しストラップで固定します。
- 2) 酸素吸入の必要な患者の場合、病院に備え付けのチューブをチューブ接続口へ
挿入し酸素吸入に備えます。

3. 使用后：

- 1) 内視鏡の検査終了後、本体を患者の口から取り外します。
- 2) 本品は単回使用なので廃棄して下さい。

【使用上の注意】

- ・使用前に内視鏡のサイズが本品に挿入可能なサイズであることを確認して下さい。
- ・使い捨て製品なので再使用しないで下さい。
- * 内視鏡の挿入は、内視鏡に損傷が起きないように本品の中央口部より正しく行っ
てください。

【保管方法及び有効期間等】

・ 保管方法

- ・ 使用後は廃棄して下さい。
- ・ 直射日光を避けて保管して下さい。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

* 販売元：株式会社アビス

連絡先：

TEL：079-275-1188 FAX：079-275-1200

* 製造販売元：株式会社エムディアイジャパン

連絡先：06-6358-8022

製造業者：Meditalia s.a.s.（イタリア）