


再使用禁止

回収用ループネット（滅菌済み）

【禁忌・禁止】 ・再使用禁止

【形状、構造及び原理等】

1. 形状・構造

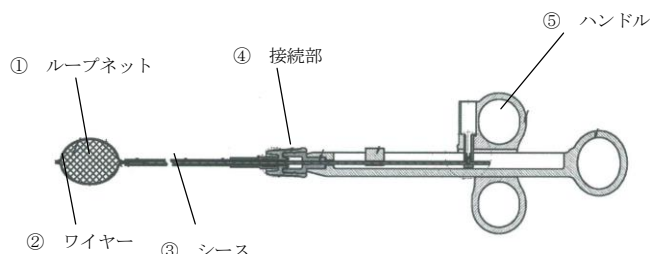

** 2. 種類

カタログ番号	有効長	シース径	ループネット径
MED-132-NET	230cm	2.5mm	40x75mm
MED-133-NET	230cm	2.5mm	30x60mm
MED-194-NET	160cm	1.8mm	25x45mm
MED-195-NET	230cm	2.5mm	25x45mm
MED-201-NET	230cm	2.5mm	50x80mm

原理

- * ハンドルの操作により、先端のネット部を開閉させて切除した組織や、異物の回収を行います。

【使用目的又は効果】

- ・内視鏡的に処置し切除されたたポリープ、異物の回収に使用される器具です。

* 【使用方法等】

1. 手術をシュミレーションして、ハンドルを前後に動かしてください。
2. ループネットはシースより完全に伸び出て、またシース内に完全に収納できることを確認してください。

使用方法：

3. シースを内視鏡に挿入する前に、ループネットをシース内に完全に納めてください。
4. シース先端部を、回収する対象物の異物、食塊、ポリープの少し先まで進めてください。
5. ハンドルを止まるまで前方に押し進め、ループネットを開いて下さい。
6. 内視鏡より観察しながら、ループネットが完全に開いていることを確認してください。
7. 目的対象物の異物、ポリープ等をループネット内に捕捉してください。
8. ループネットを閉じる前に、回収した対象物をネット中央部に集めてください。

9. ハンドルを止まるまで引いてループネットを閉じてください。
10. 閉じた状態のループネットを内視鏡と共に引き抜いてください。
11. ループネットを内視鏡的に視野に入れながらシースを手前に引き込んでください。
12. 回収した異物をループネットを開いて取り出し、一般的な組織学的評価に従って準備をしてください。

使用後：

13. 使用されたループネットを廃棄し再使用をしないでください。

【使用上の注意】 重要な基本的注意

- * シースを手前に引くときは、回収したポリープ等の異物を見ながら行って下さい。

【保管方法及び有効期間等】

・ 保管方法

- ・ 水めれに注意し、常温、常湿で保管してください。
- ・ 直射日光を避けて清潔な場所に保管して下さい。
- ・ 本品の上に物を置いたり、危険物と一緒に保管しないで下さい。

【製造販売業者及び製造業者の氏名及び名称等】

* 販売元：株式会社アビス
連絡先：
TEL：079-275-1188 FAX：079-275-1200

* 製造販売元：株式会社エムディアイジャパン
連絡先：06-6358-8022

製造業者：Meditalia s.a.s. (イタリア)