

機械器具 50 開創又は開孔用器具
一般医療機器 内視鏡用マウスピース 70951000

再使用禁止

ABIS ディスポーザブルホワイトブロック

<禁忌・禁止>
・再使用禁止

【形状・構造及び原理等】


1. 形状、構造

本品は未滅菌品である。


<ホワイトブロックの形状>

①本体 ②内視鏡挿入口 ③ストラップ接続部


< 大人用 >

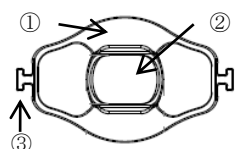

< 小児用 >

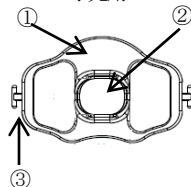


< Z type >

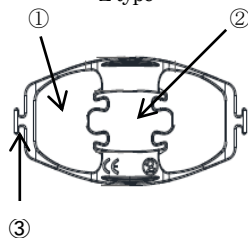


<ストラップの形状>

糸ゴム

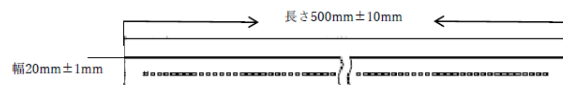

ラバー

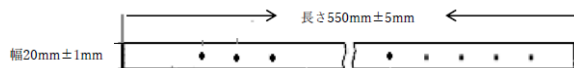

2. 寸法

	開口部内径		内 容
	縦 (mm)	横 (mm)	
大人用	21.5±3.0	31.0±3.0	ストラップ付 (糸ゴム)
小児用	16.5±3.0	25.0±3.0	ストラップ付 (糸ゴム)
Z type	23.1±0.3	38.77±0.3	ストラップ付 (ラバー)

3. 原材料

ポリプロピレン、ポリエステル+合成ラテックス、ゴム

4. 原理

本品は、内視鏡の処置時に患者の口に装着し、患者の開口状態を保持することで内視鏡の挿入を容易にし、患者の歯による内視鏡の破損を防止出来る。

【使用目的又は効果】

本品は、内視鏡の処置時に使用され、患者の口に装着し、患者の開口状態を保持し、内視鏡の挿入を容易にし、患者の歯による内視鏡の破損を防止するために使用される。本品は単回使用である。

【使用方法等】

1. 使用前

- 1) 本品に異常のないことを確認する。
- 2) 使用前には、本品のサイズと内視鏡が適合していることを確認する。
- 3) 患者の頭部のサイズに応じて、固定するストラップの長さを調節する。

2. 使用に際して

- 1) 本品を患者の口に挿入しストラップで固定する。

3. 使用后

- 1) 内視鏡の検査終了後、本品を患者の口から取り外す。
- 2) 使用が終わった本品は、地域の規則に従って破棄する。

【使用上の注意】

- ・使用前に内視鏡のサイズが本品に挿入可能なサイズであることを確認する。
- ・使い捨て製品なので再使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

・ 貯蔵・保管方法

- ・ 使用後は廃棄して下さい。
- ・ 直射日光を避け、空気が汚染・浸食されていない換気が十分にある乾燥した部屋で保管して下さい。
- ・ 有効期間は5年。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称】

販売業者：株式会社アビス

兵庫県揖保郡太子町佐用岡 471-1

連絡先：TEL：079-275-1188 FAX：079-275-1200

製造販売業者：株式会社エムディアイジャパン

連絡先：TEL：06-6358-8022

製造業者：Yangzhou Fartley Medical Instrument Technology Co.,Ltd.
(中国)