

医療器具（71）視力補正用眼鏡
一般医療機器 眼鏡 JMDNコード 35065000
老眼鏡DB-MT

【禁忌・禁止】


- 手元の見づらくなった文字を見る以外には使用しない事。
- 老眼鏡用以外には使用しない事。

【形状・構造及び動作原理等】

構成

- 眼鏡レンズ 1組と眼鏡フレームからなる器具。
- フレーム：プラスチック製（ポリカーボネート樹脂）/メタル
- レンズ：アクリル樹脂 視力補正用短焦点眼鏡レンズ。
- 老眼鏡。 レンズ度数 0.00から+1.00 +0.5毎 +5.00 +6.00まで11 度数。

種類	フレーム形状	フレームカラー	レンズ度数
	プラスチック/メタル	グレイ	+1.00
		ブラック	+1.5 0
		ワイン	+ 2.00
			+ 2.5 0
			+ 3.00
			+ 3.5 0
			+4.00
			+4.5 0
	1種	3種	8種

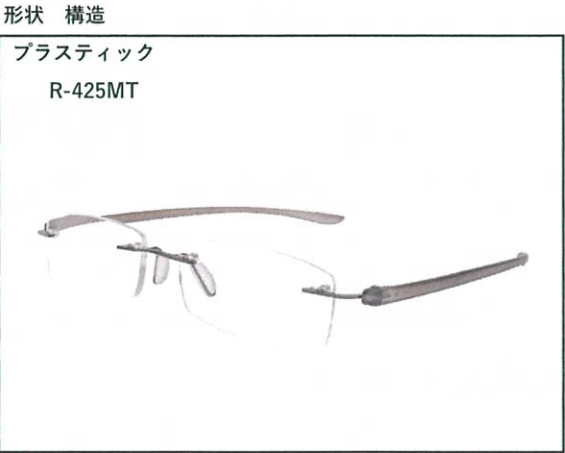

動作原理

適切な度数のレンズを用いて網膜上に結像させることにより
視力を補正する、

【使用目的または効果】

- 眼鏡レンズ 1 組と眼鏡フレームからなる視力補正用眼鏡。

【使用方法】

- 老眼鏡。 手元の文字が見づらくなった場合に耳に掛け使用する。

【品目仕様等】

- レンズ傷、フレーム傷、 度数の外観検査 （検眼器、社内基準書に基づく）

【使用上の注意】

- 手元の見づらくなった文字を見る以外には使用しない事。
- 運転時や歩行時は必ず外す事。
- 階段の上り下りや段差のあるところでの使用を避けること。
- 落下等強い衝撃を与えない事。

【貯蔵・保管方法及び試用期間等】

- 高温多湿の場所には保管しない事。
- 直射日光をさけ、なるべく涼しい所に保管する事。

【包装】

- 1 pc 個装

【主要文献及び文献請求先】

福井県眼鏡検査協会

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者 株式会社エニックス
福井県 福井市 文京 6－2 1－5
☎0 7 7 6－2 1－5 1 0 6
登録番号 18BZ200051

販売元 株式会社エニックス
福井県 福井市 菅谷 2－3－1 4
☎0 7 7 6－2 1－4 4 7 2

外国製造業者 WENZHOU DONGBO TRADE CORP.
登録番号 BG10501036