

歯科材料 02 歯冠材料
管理医療機器 硬質レジン歯 JMDN70808000
MC モーラー


【禁忌・禁止】

本材又はメタクリレート系モノマーに対して、発疹、皮膚炎の過敏症の既往歴のある患者には、使用しないこと。

【形状、構造及び原理等】

〔形態及び色調〕

前歯：上顎 20 形態・下顎 20 形態（色調：A2・A3・A3.5）

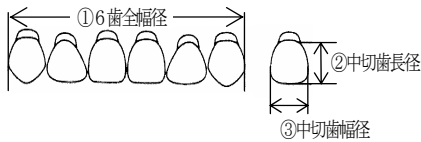

型		寸 法 (単位: mm)		
		①6歯全幅径	②中切歯長径 (カラーを除く)	③中切歯幅径
MS3	上顎	41.0	10.0	7.5
	下顎	33.0	9.0	5.0
MS4	上顎	44.5	10.5	8.0
	下顎	34.5	9.5	5.0
MS5	上顎	47.5	11.0	8.5
	下顎	37.0	10.0	5.5
MS6	上顎	50.0	12.0	9.0
	下顎	40.0	10.5	6.0
MT3	上顎	39.0	9.5	7.5
	下顎	31.5	8.5	5.0
MT4	上顎	41.5	10.5	8.0
	下顎	32.5	9.0	5.0
MT5	上顎	44.5	11.0	8.5
	下顎	34.5	10.0	5.5
MT6	上顎	47.0	11.5	9.0
	下顎	37.0	10.5	5.5
MO3	上顎	39.0	9.5	7.5
	下顎	30.5	8.5	5.0
MO4	上顎	42.0	10.0	8.0
	下顎	32.5	9.0	5.0
MO5	上顎	45.0	10.5	8.5
	下顎	35.0	9.5	5.5
MO6	上顎	47.5	11.0	9.0
	下顎	37.0	10.5	6.0
MC3	上顎	40.0	9.5	7.5
	下顎	33.0	8.5	5.0
MC4	上顎	43.5	10.5	8.0
	下顎	34.5	9.0	5.0
MC5	上顎	45.5	11.0	8.5
	下顎	36.0	9.5	5.5
MC6	上顎	47.5	11.5	9.0
	下顎	38.5	10.0	6.0
MSS3	上顎	39.5	9.0	7.5
	下顎	31.5	8.0	5.0
MSS4	上顎	42.0	9.5	8.0
	下顎	33.0	8.0	5.0
MSS5	上顎	44.0	10.0	8.5
	下顎	35.5	9.0	5.5
MSS6	上顎	47.5	11.0	9.0
	下顎	38.0	10.0	6.0

臼歯：上下顎各 3 形態（色調：A2・A3・A3.5）



型		寸 法 (単位: mm)	
		①片側4歯全幅径	②第1小臼歯の長径(カラーを除く)
M28	上顎	28.0	8.0
	下顎	30.5	8.0
M30	上顎	30.0	9.0
	下顎	32.5	9.0
M32	上顎	32.0	10.0
	下顎	34.5	10.0

【原理】

本品は、人の前歯及び臼歯を模倣した硬質レジン製の既製人工歯である。

【使用目的又は効果】

義歯に植立する。

【使用方法等】

通常の義歯排列法により排列し、義歯床用合成樹脂と結合させて使用する。

〔使用方法に関連する使用上の注意〕

- 形態修正を行った場合は、その部分を十分に研磨すること。
- アクリル樹脂以外の床用樹脂を用いて義歯を作成する場合は接着しないので、床用樹脂メーカー指定の方法に従って維持孔の付与等の前処理をすること。
- 口腔内において色素沈着（煙草のヤニなど）により着色した場合は、みがき粉をつけ義歯用ブラシを用いて研磨して除去し、亜鉛華（酸化亜鉛）をつけ、軟毛ブラシを用いて、艶出し研磨すること。
- 本材は、強アルカリ性の石こう溶解材、義歯洗浄材を使うと変色することがあるので使用しないこと。

【使用上の注意】

- 他の製品との混用しないこと。
- 本材の使用により過敏症状を起こした患者には使用を中止し、すぐに医師の診断を受けさせること。
- 本材に対して過敏症状の既存症のある術者は、本材を使用しないこと。また使用により過敏症状を起こしたときは、使用を中止しすぐに医師の診断を受けること。
- 本材の研磨作業などの際には、集塵装置、防護マスクなどを使用し、粉塵を吸収しないこと。
- 本材の切削、研磨の際には保護めがねなどを使用すること。
- 本材は、歯科医療有資格者以外には使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

歯科医療従事者以外が触れないように適切に保管、管理すること。

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 有限会社 英倫商会

住 所 〒546-0043 大阪府大阪市東住吉区駒川1丁目14番19号

電 話 06-6710-5253

製造業者 SHANGHAI RABBIT DENTAL INDUSTRIAL MATERIAL CO., LTD.

シャンハイ ラビット デンタル マテリアル インダストリアル カンパニー リミテッド

中国