

機械器具（68） 印象採得又は咬合採得用器具
一般医療機器 歯科印象採得用トレイ 16350000

アルミニウム印象トレイ


【禁忌・禁止】

- ◇ 目的以外の使用禁止、歯科領域以外での使用禁止。
- ◇ 本品の使用により金属アレルギーが現れる可能性があるの
で、金属アレルギーの患者には使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】


《形状・構造》 口腔内に装着するトレイ部とハンドル部よりなる。
《原理》 トレイ部に盛り付けた印象材により、印象を採取得する。

《種類》 上顎用

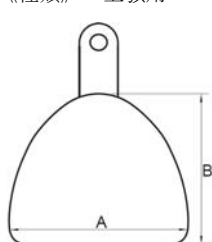


No.	A(mm)	B(mm)
UP1	77	52
UP2	73	52
UP3	70	50
UP4	65	45

下顎用

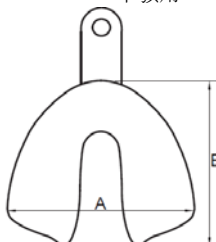

No.	A(mm)	B(mm)
DOWN1	74	52
DOWN2	70	49
DOWN3	69	49
DOWN4	63	45

片顎用

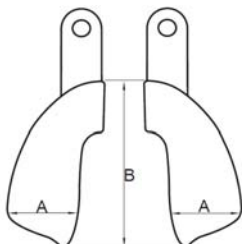

No.	A(mm)	B(mm)
UP5	26	52

No.	A(mm)	B(mm)
DOWN5	26	52

《材質》 アルミニウム

【使用目的又は効果】

印象採得時に印象材を盛り、印象採得のために用いる。

【使用方法等】

1. 印象材をトレイに盛り付けた後、口腔内に装着する。
2. 印象材の硬化後、トレイを口腔から取り出して、歯科用石膏を用いて模型を製作する。

【使用上の注意】

1. 使用注意
 - (1) 本品は歯科医療有資格者のみ使用すること。
 - (2) 使用前及び使用後は本品の洗浄・滅菌を行うこと。
 - (3) 患者の口腔に合ったサイズを用いること。
 - (4) 化学薬品や塩素系消毒剤によっては、本品の表面を変色させたり腐食したりするので注意すること。
 - (5) 金属たわし、クレンザー等は本品の表面に傷をつけるので使用しないこと。
2. 重要な基本的注意
 - (1) 本品に変形、損傷、破損、ひび割れ等の異常が認められる場合は、使用しないこと。
 - (2) 本品の使用により金属アレルギーが現れる可能性があるの
で、異常がある場合は直ちに使用を中止し、専門医の診察を受けること。

【保管方法及び有効期間等】

貯蔵・保存方法

水分や腐食性薬剤及びその蒸気の暴露を避け、温度や湿度が極端に変化しない清潔な場所で、外圧がかからない状態で保管すること。

【保守・点検に係る事項】

1. 使用前、使用後の点検の実施)

- (1) 本品は、日常点検及び使用前点検により、破損や腐食がないか確認すること。異常が認められたときは使用しないこと。
- (2) 本品を洗浄するときはトレイから印象材を取り除き、アルギン酸印象材用清掃液等を溶かした溶液に30分～1時間浸漬する。（清掃液の取扱説明書に従ってください）
- (3) 洗浄後は流水で十分にすすぎを行い、良く乾燥させること。
- (4) 高圧蒸気滅菌を行うときは、121℃で20～30分又は、132℃で5～20分の滅菌を行うこと。

2. 注意事項

《一般的注意事項》

多頻度の使用により、材質の変化（顕著な変色、亀裂など）をきたした場合は、使用しないこと。

【製造販売業者及び製造業者の名称及び住所等】

■製造販売業者

株式会社エスイーエム
お問合せ先：0572-26-8093

■製造（輸入）

レコデント・インターナショナル社
[Reco-Dent International Co., Ltd.]
台湾
[Taiwan]