


皮膚赤外線体温計 BNT400

【禁忌・禁止】

- ・検温結果の自己診断、治療は危険ですので医師の指導に従ってください。
- ・お子様だけで使わせないでください。

*【形状、構造及び原理】

1. 形状、構造

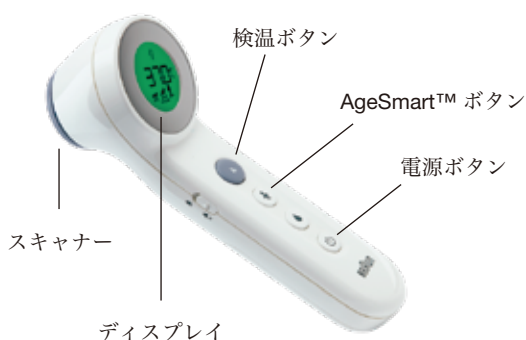

ディスプレイが以下のとおり 3 色のいずれかに点灯して、平熱、中高熱、高熱の状況を使用者に知らせます。
(下記の範囲外の検温結果の場合、点灯しません。)

年齢範囲	点灯色		
	緑	黄	赤
0-3ヶ月	35.8-37.4	37.7-38.5	37.5-
3-36ヶ月	35.4-37.6		38.6-
36ヶ月-成人	35.4-37.7	37.8-39.4	39.5-

単位: °C

2. 原材料

スキャナー: ABS 樹脂、TPR 樹脂

本体: ABS 樹脂

3. 原理

人体表面から発せられる赤外線の放射量を本品先端のスキャナーで読み取り、その放射量を口内温度に換算し、体温をディスプレイにデジタル表示する。

4. その他仕様

電気的分類: 内部電源機器、B 形装着部

電源電圧: 3.0V

使用電池: 単四電池 2 本

【使用目的又は効果】

体表面上の皮膚の体温を測定するために用いること。

*【使用方法】

1. 保護キャップを外し、電源ボタンを押し電源を ON にする。必要に応じて、AgeSmart™ ボタンで年齢範囲を設定する。
2. 体温計のスキャナーを眉の間の額中央の上、もしくは額中央から 2.5cm 以内の距離に温度計をかざす。非接触で測定する場合は、黄色の誘導ライトで測定場所を確認する。測定部位に汗や汚れがついていたらよくふき取り、検温の精度を上げる為 10 分間待つ。
3. 検温ボタンを押し測定を開始する(長押し、もしくは押してすぐ離してもよい)。体温計を正しくかざすと、測定が始まりディスプレイにアニメーションが表示される。
4. 約 2 秒後に検温終了を知らせるブザーが鳴り、ディスプレイに体温が表示される。
5. 表示された体温を確認し、電源ボタンを押し電源を OFF にする。

【使用上の注意】

- (1) 体温測定は同一部位で一定時間行ってください。
- (2) 運動、入浴、食事の後約 30 分間は測定を避けてください。
- (3) 測定部位に汚れがついていたらよくふき取り、検温の精度を上げる為 10 分程度時間を空けてから測定してください。
- (4) 水中に放置したり、水道の蛇口に直接あてないでください。
- (5) 人の体温以外の体温測定には使用しないでください。
- (6) 落としたり、強い衝撃を与えないでください。
- (7) 修理、改造、分解は行わないでください。
- (8) 乳幼児の手の届かないところに保管してください。また、お子様だけでのご使用はさけてください。
- (9) 検温結果の自己診断、治療は危険ですので医師の指導に従ってください。

【保管方法及び有効期間等】

1. 貯蔵方法

高温や直射日光が当たる場所、湿気が強い場所、ホコリが多い場所、腐食性のガスが発生する場所に保管しないでください。長期間ご使用にならない場合は、電池を取り出して保管してください。

2. 使用期間

標準的な使用期間の目安: 5 年 (自己認証による)
約 10000 回使用することができます。

【保守・点検に係る事項】

1. 本品を洗浄する場合は、水洗いはせず、乾いたもしくは水気をよく絞った布で汚れを拭き取ってください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

選任製造販売業者: 株式会社エムビーエス
東京都千代田区外神田 6-16-3 外神田 MN ビル
TEL: 03-4588-9033

外国製造業者: アヴィータ (中華人民共和国)
(AVITA(WUJIANG) CO., LTD)

外国指定高度管理医療機器製造等事業者:
Kaz Europe Sàrl (スイス)
Place Chauderon 18 1003 Lausanne Switzerland

© 2021 All rights reserved.