

ディスポーザブル・インライン・マノメーター

再使用禁止

【警告】


1. 使用前に指針が確実に動く事を確認すること。
2. 毒性、可燃性、有害な化学物質やそれを発生させる可能性のある機械の側では使用しないこと。
3. 酸素を使用している場合は、周囲で火気及びスパークを発生する可能性のある物を使用しないこと。[発火、爆発を誘発する恐れがあるため]

【禁忌・禁止】

1. 再使用禁止。
2. 材質に影響を及ぼす可能性があるオートクレーブ・EO G ガス等の滅菌及び洗浄はしないこと。

【形状・構造及び原理等】

*形状

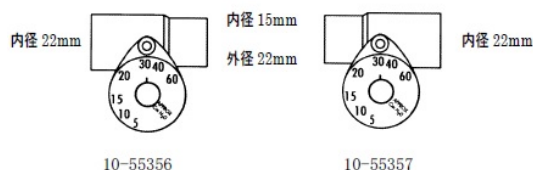

※ 0～20cmH₂O 緑
20～40cmH₂O 黄
40cmH₂O以上 赤

圧力測定範囲：0～60 cmH₂O

材質：ポリカーボネート

構造・構成ユニット

品番	品名・規格
10-55356	ディスポーザブル・インライン・マノメーター (左)
10-55357	ディスポーザブル・インライン・マノメーター (右)

作動・動作原理

手動式蘇生器の呼気側に接続して、気道内圧と PEEP 圧を機械的な圧力計によって測定する。


【使用目的又は効果】

治療又は診断中に人工呼吸器回路の圧力を測定する装置


【使用方法等】

使用方法

気道内圧と PEEP 圧のモニタリングを行うために、手動式蘇生器の呼気側に接続する。(下図参照)

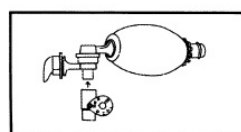

10-55357 使用の図

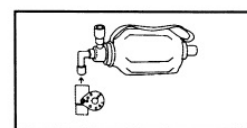

10-55357 使用の図

【使用上の注意】

重要な基本的注意

1. 本製品の使用は、デッド・スペース (15.5ml) を増加させます。
2. 気道内圧をモニタリングする時は、マノメーター (測定範囲 0～60 cmH₂O) の限界を超える圧の圧力源に接続しないこと。
3. 確実な接続が維持できない製品とは接続しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

保管方法

1. 水のかからない場所に保管すること。
2. 気圧、温度、湿度、風通し、日光、ほこり、塩分、硫黄分などを含んだ空気等により悪影響の生ずる恐れのない場所に保管すること。
3. 傾斜、振動、衝撃 (運搬時を含む) など安定状態に注意すること。
4. 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に保管しないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

<製造販売業者>

株式会社エム・ピー・アイ

*TEL : 03-3451-6501

<外国製造業者>

Mercury Medical (アメリカ合衆国)

*Plaxtron Industrial (M) Sdh. Bhd (マレーシア)