

機械器具 13 聴診器
一般医療機器 機械式聴診器 13755000

胸壁聴診器


【禁忌・禁止】

- 1.本製品は絶対に超音波洗浄器・乾熱滅菌器を使用しないこと。
- 2.本製品を廃棄する場合は、医療用廃棄物として適切に処理し、施設外における感染、環境への汚染が起きないようにすること。
- 3.使い捨て製品（ソフトイヤ・ディスポーザブル片耳聴診チューブ）は再使用禁止

*【形状・構造及び原理等】

材質
胸壁聴診器
ステンレススチール
片耳聴診チューブ
ポリ塩化ビニール

*聴診器の種類及び形状

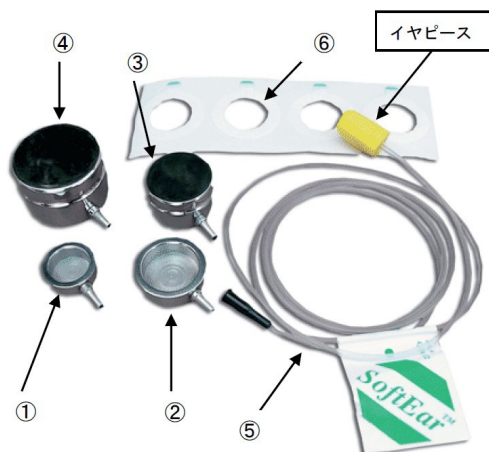

製品番号	品名
6-0025-00	胸壁聴診器 新生児用 直径 22mm 高さ 8mm ステンレス製
6-0025-01	胸壁聴診器 乳児用 直径 28mm 高さ 9mm ステンレス製
6-0025-02	胸壁聴診器 小児用 直径 28mm 高さ 17mm ステンレス製
6-0025-03	胸壁聴診器 成人用 直径 36mm 高さ 24mm ステンレス製
6-1030-01	ソフトイヤ・ディスポーザブル片耳聴診チューブ
6-1030-25	ソフトイヤ・ディスポーザブル片耳聴診チューブ (25 入)
6-0025-25	両面粘着ディスク

作動・動作原理

心臓や肺の音を胸壁聴診器から片耳聴診チューブに伝達し、その音が聞こえる。


【使用目的又は効果】

心臓及び肺の音を聴くために用いる機械式聴診装置。

【使用方法等】

使用方法

- 1.胸壁聴診器に片耳聴診チューブを取り付ける。

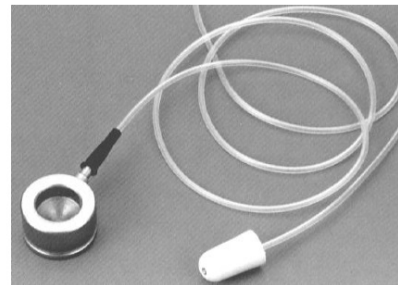

- 2.耳（外耳道）にイヤピースを挿入し装着する。
- 3.胸壁聴診器を両面粘着ディスク等で胸壁に固定する。

【使用上の注意】

- 1.医療専門家以外は使用しないこと。
- 2.使用目的（生体音の聴診）以外の目的で使用しないこと。
- 3.本製品は絶対に超音波洗浄器・乾熱滅菌器を使用しないこと。
- 4.廃棄する場合は、医療用廃棄物として適切に処理し、施設外における感染、環境への汚染が起きないようにすること。

【保管方法及び有効期間等】

保管方法

- 1.消毒後、完全に乾燥した後保管すること。
- 2.水のかからない場所に保管すること。
- 3.気圧、温度、湿度、風通し、日光、ほこり、塩分、硫黄分などを含んだ空気等により悪影響の生ずる恐れのない場所に保管すること。
- 4.傾斜、振動、衝撃（運搬時を含む）など安定状態に注意すること。
- 5.化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に保管しないこと。

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

<製造販売業者>
株式会社エム・ビー・アイ
TEL : 03-3451-6501

<外国製造業者>

**SunMed Holdings, LLC also trading as AirLife (アメリカ)