

機械器具 06 呼吸補助器
管理医療機器 空気・酸素マスク (35171000)

オキシマスク

再使用禁止

【警告】

本製品使用中の喫煙は絶対に行なわないこと。また、本製品使用中、本製品周辺は火気厳禁である〔酸素は可燃物・発火要因が近くにあると発火の原因となり、重大な障害を引き起こし、あるいは死亡することがある。〕




【禁忌・禁止】

- 1.単回使用
- 2.他の患者への再使用禁止

***【形状・構造及び原理等】

** *形状

オキシマスク ETCO2

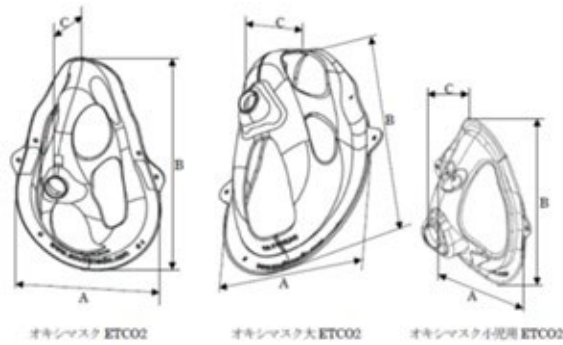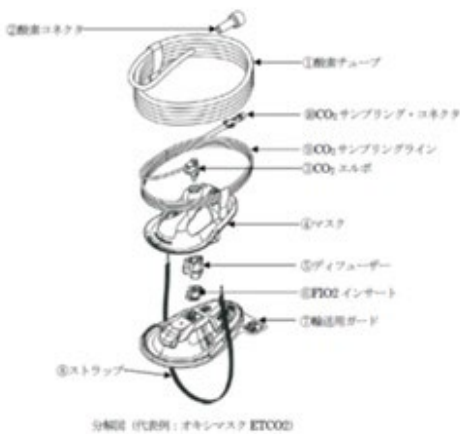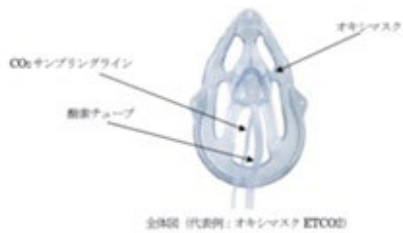

品名	寸法		
	A	B	C
オキシマスク II ETCO2 マイクロストリー ムコネクタ	88.0	131.1	53.7
オキシマスク II 大 ETCO2 マイクロストリー ムコネクタ	120.9	149.7	56.3
オキシマスク II 小児用 ETCO2 マイクロストリー ムコネクタ	82.8	92.8	47.3

単位: mm 寸法許容範囲: ±10%

** *構造・構成ユニット

製品番号	品名
OM-2125-MDT	オキシマスク II ETCO2 マイクロストリームコネクタ
OP-2125-MDT	オキシマスク II 大 ETCO2 マイクロストリームコネクタ
OK-2125-MDT	オキシマスク II 小児用 ETCO2 マイクロストリームコネクタ

※すべて酸素チューブ付き

** *原材料

ポリ塩化ビニル、アクリル樹脂、ポリプロピレン、ナイロン、ABS 樹脂

作動・動作原理

空気・酸素を能動的に供給する装置に接続し、酸素チューブ、ディフューザーを通じて患者の気道に空気・酸素を供給する。

【使用目的又は効果】

患者の気道に空気・酸素を供給すること。

***【使用方法等】

** *使用方法

- 1.酸素チューブのコネクタを酸素ポンプ又は酸素供給装置等に接続する。
- 2.CO2 サンプルング・コネクタを呼気ガス分析装置に接続する。
- 3.医師の指示により流量を設定する。
- 4.ストラップを患者の頭又は耳にかけ、本品を患者の口と鼻を覆うように装着する。
- 5.本品は、一患者専用である。

※オキシマスクには型崩れ防止に保護部材がついた状態で包装されています。ご使用前に保護部材を外してお使い下さい。

使用方法に関連する使用上の注意

酸素流量を設定する場合は医師の指示に従い酸素濃度測定装置等を使用し正しく行ってください。

【使用上の注意】

重要な基本的注意

- 1.使用目的以外の目的で使用しないこと。
- 2.包装袋や製品に破損、汚損がある場合は使用しないこと。
- 3.廃棄する場合は、医療用廃棄物として適切に処理し、施設外における感染、環境への汚染が起きないようにすること。
- 4.本品に使用された原材料に対し、発疹・皮膚炎等の過敏症の既往歴のある患者には使用をしないこと。

【保管方法及び有効期間等】

保管方法

- 1.水のかからない場所に保管すること。
- 2.気圧、温度、湿度、風通し、日光、ほこり、塩分、イオン分などを含んだ空気等により悪影響の生ずる 恐れのない場所に保管すること。
- 3.傾斜、振動、衝撃（運搬時を含む）など安定状態に注意すること。
- 4.化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に保管しないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

＜製造販売業者＞
株式会社エム・ピー・アイ
TEL：03-3451-6501

＜外国製造業者＞
Southmedic Inc.（カナダ）
サウスメディック インコーポレイティッド