

機械器具 32 医療用吸引器
管理医療機器 電動式可搬型吸引器 (JMDNコード:36616030)

Nosiboo Pro 電動鼻水吸引器

【警告】


- 本品は鼻孔内の分泌物、粘液（鼻水）を取り除く専用器具ですので、他の目的には使用しないこと。
- 鼻孔内に病気がある場合、傷、出血や炎症がある場合には使用しないこと。
- 適用対象者に鼻の病気がある場合には、本品の使用可否について医師に相談してから使用すること。
- 本品を新生児、乳幼児の手の届くところには保管しないこと。[ノズル誤飲の恐れがあるため]
- 電源コードやチューブが首なのでからまないように注意すること。
- 本品は鼻洗浄には使用できない。

【禁忌・禁止】

- 以下の場合には使用しないこと
 1. 血友病患者
 2. 頻繁に鼻出血がある患者
 3. 抗凝固薬を投与されている患者
 4. 先天性奇形（口蓋裂）の患者
- 本体を水又は液体で洗浄しないこと。また、濡れた手で電源コードを取り扱わないこと。[感電や故障の原因となるため]
- 本品の仕様及び使用上の注意等に示された使用条件を満たさない条件で使用・保管、修理や改造、調整などは行わないこと。[けがや故障の原因となるため]

【形状・構造及び原理等】

1. 本体の形状図および機能

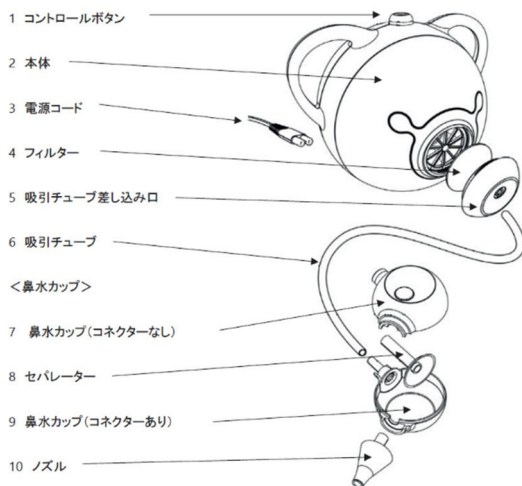

番号	名称	機能
1	コントロールボタン	電源のOn/Off及び吸引力の無段階調整
2	本体	吸引源
3	電源コード	電源部に電源を供給する
4	フィルター	粒子の本体への侵入を防ぐ
5	吸引チューブ差し込み口	吸引チューブを本体へ繋ぐ差し込み口
6	吸引チューブ	カップと本体を繋ぐ
7	鼻水カップ（コネクタなし）	吸引した鼻孔内の分泌物、粘液（鼻水）を貯留する
8	セパレーター	吸引した鼻孔内の分泌物、粘液（鼻水）の逆流を防止する
9	鼻水カップ（コネクタあり）	吸引した鼻孔内の分泌物、粘液（鼻水）を貯留する
10	ノズル（標準タイプ、新生児タイプ）	鼻孔の挿入する先端部で、粘液（鼻水）を鼻水カップへ移す

取扱説明書を必ず確認して下さい。

2. 性能及び仕様

- ・ 電源電圧: AC100V 50/60Hz
- ・ 消費電力: 290W(最大)
- ・ 定格入力: 300VA
- ・ 作動モード: 非連続作動運転
- ・ 最大作動(入)時間: 15分
- ・ 最小休止(切)時間: 50分
- ・ 電撃に対する保護の形式: クラスⅡ機器
- ・ 電気機械器具の外郭による保護等級: IP21
- ・ 吸引圧: -8kPa(80mbar)±15%
- ・ ポンプ排気流量: 35L/min±15%

3. 動作原理

本品の主な作用機序は、物理的・機械的な作用に基づいており、電動モーターによって生成される真空(陰圧)と気流を利用して、鼻腔から粘液を除去する仕組みになっている。

【使用目的又は効果】

本品は、鼻孔内の分泌物及び粘液（鼻水）を吸引するための電動式吸引器である。

【使用方法等】

本品は、主に6歳未満の子供の鼻水を除去するために家庭で使用するよう設計されている。

1. 使用前準備

- ・ 鼻水カップを分解し、各部品を清掃して乾燥させる。
- ・ 各パーツが汚れなく乾燥しているか確認する。
- (1) セパレーターを鼻水カップ（コネクタあり）のコネクタ部に差し込み、反対側の鼻水カップ（コネクタなし）と組み合わせる。
- (2) 鼻水カップにノズルを取り付ける。（生後6か月未満の乳児には新生児タイプ、生後6か月以上の乳児には標準タイプを使用すること）
- (3) 吸引チューブを鼻水カップのコネクタ部に接続する。
- (4) (3)で接続した反対側の吸引チューブの端を本体の吸引チューブ差し込み口に接続する。
- (5) 本体に電源コードを接続する。
- (6) 電源コードのプラグをコンセントに差し込む。

2. 使用方法

- (1) コントロールボタンを時計回りに回して、本体の電源を入れる。（電源ネットワークへの接続又は切断は、コントロールボタンがOFF位置（電源オフ）になっている時のみ行うこと）
- (2) 適切な吸引圧を選択する。（新生児は弱(min)、乳幼児は中（弱(min)と強(max)の間）、幼児・小児は強(max)）
- (3) お子様を安定した姿勢で保持する。
- (4) 清潔で乾いたノズルをお子様の鼻孔に挿入する。使用中は、鼻水カップとチューブの接続部を下向きにすること。
- (5) 円を描くようにノズルを動かして、分泌物や粘液を吸引する。吸引された分泌物や粘液（鼻水）は鼻水カップに流れる。必要に応じて、反対の鼻孔でも同様に行う。
- (6) ノズルを鼻孔から取り外す。
- (7) 使用後は、コントロールボタンで本体の電源を切る。

3. 使用後

<電源の取り外し方>

- (1) コントロールボタンがオフになっており、モーターが停止していることを確認する。
- (2) 電源コードをコンセントから抜く。
- (3) 電源コードを本体から抜く。

<鼻水カップ等>

- (1) 本体の吸引チューブ差し込み口から吸引チューブを取り外す。
- (2) 吸引チューブとノズルを鼻水カップから取り外す。
- (3) 鼻水カップを分解し、セパレーターを取り外し、各部に付着した分泌物や粘液(鼻水)を廃棄する。

<洗浄・消毒等>

使用後は、必ず取扱説明書をよく読み、定められた手順に従って洗浄、消毒を行うこと。

【使用上の注意】

<重要な基本的注意>

- ・ 本品は、小児ならびに身体的、感覚的又は精神的能力が低下している方による使用を想定していない。
- ・ 10 秒以上連続して吸引を行わないこと。
- ・ 複数人で共有する場合は、新品のノズルを使用するか、消毒を必ず行うこと。

<使用上の注意>

- ・ 使用前には毎回、各パーツがしっかり取り付けられているか確認すること。
- ・ 使用中に発疹、発赤、かゆみ等の症状が現れた場合は、すぐに使用を中止し、医師に相談すること。
- ・ 使用中は、本体背面の通気口をふさがないこと。
- ・ 使用中は、過熱した熱気が通気口より排出される場合があるため、近づかないこと。
- ・ 吸引カップの最大容量は 5ml であるため、これ以上の容量の吸引は行わないこと。
- ・ 電源を off にした後もモーターの冷却プロセスを行うため短時間作動する。冷却プロセス停止後、電源コードをコンセントから抜くこと。
- ・ 過度に負荷がかかる又は機器が過熱した場合、保護装置が作動し、機器が停止し、運転操作が行えなくなる。モーターが冷却されて、保護装置が解除されると、再び使用できる。
- ・ 機器に強い衝撃を与えたり、落としたりしないこと。
- ・ 本品の付属品以外は使用しないこと。
- ・ 機器の分解・修理・改造をしないこと。
- ・ 機器に損傷や故障、異常が疑われる場合は使用しないこと。また、これらが使用中に生じた場合は、直ちに使用を中止すること。
- ・ シンナー、溶剤等、溶剤等でパーツの洗浄を行わないこと。
- ・ 高出力の放射を発する機器の近くでは使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

- ・ 周囲温度:0~+40℃ 相対湿度:10-75%RH(結露なきこと)
- ・ 直射日光、電磁波、ホコリなどは避けて保管すること。
- ・ 乳幼児や小さな子供の手の届くところは避けて保管すること。
- ・ 傾斜、振動、衝撃等に注意し、安定した場所に保管すること。
- ・ 本品を水やその他の液体がかからない場所に保管すること。
- ・ 耐用期間 3 年[自己認証(当社データによる)]

【保守・点検に係る事項】

1. 日常点検

安全にご使用いただくため、使用前には下記の点検を実施すること。

- (1) 機器に折れ、キズ、ひび割れ、汚れ、腐食がないことを確認すること。
- (2) 電源コードの破損、断線、キズ、プラグの変形がないことを確認すること。
- (3) 洗浄剤や消毒剤が機器に残っていないかを確認すること。
- (4) フィルターの汚れ、目詰まりの確認を行い、ひどい場合は、交換すること。

2. 機器の洗浄、消毒方法

使用後は、定められた手順に従って洗浄、消毒を行い、取扱説明書を参照して、元の状態に戻すこと。

<本体>

- ・ 本体は柔らかい乾いた布で拭き、液体や洗剤、薬品類は使用しないこと。汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤を含ませた布を固く絞り、汚れをふき取ること。

<ノズル、鼻水カップ>

- ・ 鼻水カップから吸引チューブとノズルを外す。
- ・ 鼻水カップを分解し、セパレーターを外し、各パーツに付着している鼻孔内分泌物、粘液(鼻水)を廃棄して、ぬるま湯、中性洗剤で洗浄する。
- ・ 必要に応じて、付属品(ノズル、鼻水カップ、吸引チューブ)を消毒することができる。使用する消毒液がベビー用品に安全に使用できることを必ず確認すること。
- ・ 使用者が交換可能な予備部品: 鼻水カップ、ノズル(標準タイプ、新生児タイプ)、吸引チューブ、フィルター。
- ・ 鼻水カップ及びノズルについては、使用後 3 カ月での交換を推奨する。

3. 詳細は、取扱説明書を参照すること。

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

選任製造販売業者: マイクレン・ヘルスケア株式会社

電話番号: 03-3513-6641

外国特例認証取得者及び製造業者: Attract Kft.(ハンガリー)

日本総販売代理店: H international株式会社

取扱説明書を必ず確認して下さい。