


歯科用クランプ鉗子

【禁忌・禁止】

- この製品はステンレスを使用している。金属アレルギーの既往症のある患者に使用する際は十分な監視を行い、アレルギー症状が現れた場合はすぐに使用を中止し専門医に相談すること。
- 本品を漂白剤に浸さないこと。破損の恐れがある。
- スチールウール及び金属製のブラシで本品を洗浄しないこと。破損の恐れがある。

【形状・構造及び原理等】

本品の先端にてラバーダムクランプの適用及び除去を行う。

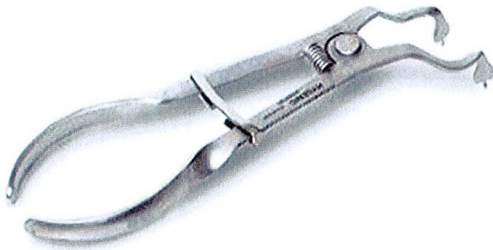

写真は製品の例を示す。

寸法

型番	寸法(幅×長)
H01262	90mm×160mm

主材料 ステンレススチール

【使用目的又は効果】

ラバーダムクランプの適用及び除去を適切に行う。

【使用方法等】

ラバーダムクランプ(販売名カラークランプ届出番号: 13B1X10231000126 推奨)の適用及び除去を行う。

【使用上の注意】

重要な基本的注意

- 使用前に洗浄および高圧蒸気滅菌器で滅菌すること。
- 損傷、摩耗、又は機能していない部位がないかを必ず点検すること。
- 本品に対してかゆみ、発赤、蕁麻疹、むくみなどの過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。
- 本品に対してかゆみ、発赤、蕁麻疹、むくみなどの過敏症状があらわれた患者には、直ちに使用を中止し、専門医の診断を受けさせること。
- 使用後は温水で洗浄後、超音波洗浄器を使用して付着物を完全に取り除くこと。洗浄後は十分に乾燥させること。
- 高圧蒸気滅菌器を使用する際は130℃で15分間行うこと。
- 洗浄、消毒、滅菌後の器具のさびやシミ等の原因になるので十分に乾燥させてから保管すること。
- 本品は歯科用以外の用途には使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

高温、多湿、直射日光及び水濡れを避け室温で保管すること。
錆びている器具と一緒に収納保管しないこと。
ヨードグリセリンなどの化学薬品と一緒に収納保管しないこと。
機能の低下が特に目立った場合は使用を止めること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

AJMD株式会社

電話番号:03-5614-0733

外国製造業者

Colte()ne/Whaledent Inc.,
コルテン/ウエルデント インク
(アメリカ合衆国)

販売業者

東京歯科産業株式会社

電話番号:03-3831-0176