



2017年5月(第1版)

機械器具 55 医療用洗浄器
一般医療機器 器具除染用洗浄器 JMDN コード:35424000

StatClean超音波洗浄器

【形状・構造及び原理等】

1.形状・構造

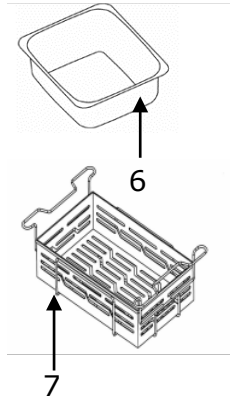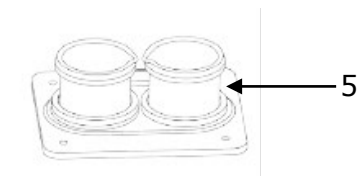

番号	名称
1	洗浄器本体
2	タッチパネル
3	トップカバー
4	排水バルブハンドル
5	ダブルビーカーホルダー (オプション)
6	間接洗浄用タンク (オプション)
7	ステンレスバスケット (オプション)

2. 寸法及び重量

外寸:W515mm×D305mm×H240mm

重量:7.5kg

タンク容量:6ℓ

3.電気的定格

電源電圧: AC100V

電源周波数: 50Hz/60Hz

4. 作動原理

本器は、洗浄液中で超音波によって医療器具を洗浄する。

【使用目的又は効果】

再使用可能な手術器具、麻酔器具、及び他の手術用具の(化学的又は加熱)除染・消毒のために用いる洗浄器である。

【使用方法等】

操作方法又は使用方法

詳細は取扱説明書を参照のこと。

【設置】

乾燥した平らな場所に設置すること。

【使用方法】

- ① トップカバーを開け、濾過水もしくは水道水及び洗浄剤をタンク内の目盛まで入れる。
- ② 電源を入れる。
- ③ タッチパネルの操作により温度及び作動時間を設定し、洗浄する医療器具を付属のバスケットに入れてタンクにセットする。
- ④ トップカバーを閉め、ON/OFF キーを押して、洗浄を開始する。
- ⑤ 洗浄終了後、電源を切り、トップカバーを開け、バスケットをタンクから引き揚げ、被洗浄物を取り出す。
- ⑥ 排水ホースを接続し、排水バルブハンドルを開けてタンクから排水する。
- ⑦ タンクを拭いて乾燥させる。
- ⑧ 排水バルブハンドルを閉める。

【使用上の注意】

重要な基本的な注意

- ・本品は記載の使用目的のみに使用すること。
- ・直射日光の当たる場所や熱電の近く、多湿の場所には設置しないこと。
- ・タンクが空のまま使用しないこと。
- ・本体を水に浸さないこと。
- ・取扱説明書の注意事項をよく読んで厳守すること。
- ・医療器具の洗浄と手入れ方法については製造元の指示に従うこと。
- ・トップカバーを開けた状態で使用しないこと。
- ・研磨剤入り洗浄剤及び腐食性の洗浄剤を使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

常温常湿

耐用年数 5000 時間[自己認証(製造元データ)による]

【保守・点検に係る事項】

詳細は取扱説明書を参照すること。

通風孔を清潔に保ち、詰まらないようにすること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

AJMD株式会社

電話番号:03-5614-0733

外国製造業者

SciCan Ltd.

サイキャン(カナダ)

取扱説明書を必ずご参照ください