

RYSEN システム

【禁忌・禁止】

- ・患者の体重が 135kg を超える場合
- ・脊椎不安定症、不全骨折の場合
- ・脊柱に装具を使用している場合
- ・リハビリテーションの妨げとなる症状がある場合。(例、呼吸器疾患、妊娠中、整形治療中、神経心理障害、感染性または炎症性疾患、骨髄炎など)
- ・傷・皮膚障害のある箇所にハーネスが接触する場合
- ・認知機能の欠損によりコミュニケーションに制限がある場合

以下の併用は行わないこと


- ・モーションプラットフォーム
- ・床から高さ 30cm 以上のステッピングサーフェス
- ・床から高さ 1.2m 以上の物体で、スリングバー、ハーネスと接触する恐れのある物。
- ・普通歩行や階段昇降(30cm 以内)以上のタスクを実行する装置
- ・人工関節等の埋植医療機器
- ・トレッドミル

【形状・構造及び原理等】

1. 概要

本品は、患者の歩行訓練を補助することを目的としたリハビリテーション用非能動型装置である。

2. 形状・構成

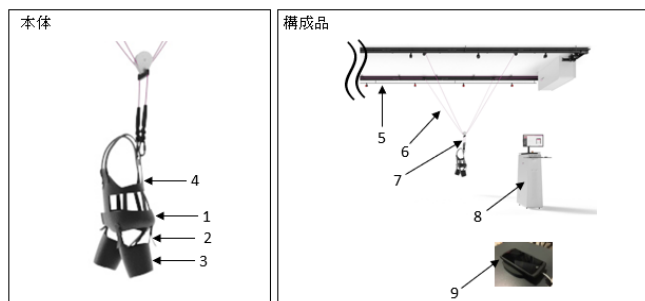

	番号	名称	サイズ
本体	1	ハーネス	S、M、L
	2	レッグストラップ	35cm、50cm
	3	レッグループ	—
	4	サスペンションストラップ	—
構成品	5	メカニカルトラック	—
	6	安全ベルト	—
	7	スリングバー	—
	8	コンソール・グラフィカルユーザーインターフェース	—
	9	リモートコントロール	—

【使用目的又は効果】

- ・患者の歩行訓練を補助することを目的としたリハビリテーション用非能動型装置である

【使用方法等】

1. 使用方法

- ・取扱説明書を参照すること

2. 環境動作

- ・温度：1°C－40°C
- ・相対湿度：20%－80%
- ・気圧：860hPa－1060hPa
- ・高度：最大 3000m

電力	電圧	電流
3680VA	単相：230±10%	16A (230VAC)

【使用上の注意】

重要な基本的事項

- ・使用の際は取扱説明書を熟読すること。
- ・システムの設置、修理等は Motek Medical BV の認定技術者が行うこと。
- ・使用前に、電圧が正しいことをラベルにて確認すること。
- ・固定装置である為、装置を動かす事は意図されていない。
- ・皮膚感覚の低下がある場合、過度な摩擦に気を付けること。
- ・スリングバーを装着、離す際には十分に気を付けること。取扱説明書の指示に従い安全機能が確保されることを確認すること。
- ・患者に、スリングバー、システムに触らないように指示すること。
- ・感電を防ぐため、装置は保護接地で接続すること。
- ・システム、備品の操作はトレーニングを受けた者、医療専門家、システムオペレーターのみによって行われること。
- ・故障等が検出された場合、装置を直ちに停止、使用を中止し、取扱業者または Motek Medical BV サポートに連絡すること。
- ・メンテナンス期限が切れた状態での使用、備品の改造は保証の無効となる。
- ・地面から患者を完全に持ち上げないこと。
- ・運送を目的として設計されていない為、そのような使用は患者、システムに損害が生じる可能性がある。
- ・使用中はリモートコントロールを常に保持すること。またリモートコントロールおよびオペレーターデスク以外の部分に触れないこと。
- ・ポータブル、モバイル RF は、システムに影響を及ぼす可能性がある。
- ・備品等の汚れ、濡れた場合などは誤作動の原因となる為、措置が提供されるまで使用しないこと。

取扱説明書を必ずご参照ください

【保管方法及び有効期間等】

＜保管条件＞

- ・ 温度：1℃ - 40℃
- ・ 湿度：相対湿度 20 - 90%
- ・ 気圧：860hPa - 1060hPa

＜使用期限＞

- ・ 10 年

＜有効期間＞

- ・ 保証 1 年

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 AJMD 株式会社
電話番号：03-5614-0733

外国製造業者 Motek Medical BV
モーテック メディカル BV（オランダ）