

再使用禁止（本体及びキャップ）

W&H イリゲーションチューブ

【禁忌・禁止】

- ・ 指定された機器以外に使用しないこと。
- ・ 再使用禁止（本体及びキャップ）

*【形状・構造及び原理等】

1. 概要

本品は、W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH 社の一般名称：歯科用電気回転駆動装置又は、電動式骨手術器械の注水ポンプに取付け、一般名称：ストレート・ギアードアングルハンドピース又は、手術用ドリルアタッチメントに送水を行う。

2. 構成

本品は、以下の構成品より構成される。

（1）本体

	タイプ名	備考
1	イリゲーションチューブ 2.2 m	タイプ名の 2.2 m と 3.8 m は注水ポンプに取付けられた部分から先端までの公称の長さを示す。
2	イリゲーションチューブ 3.8 m	

これらの本体は選択して供給される。

（2）付属品（アクセサリ）

（2）－1 キャップ

（2）－2 Y マニホールド

3. 形状：

（1）本体

	タイプ名	全長 mm	質量 g
1	イリゲーションチューブ 2.2 m	2650	33
2	イリゲーションチューブ 3.8 m	4250	77

（2）付属品（アクセサリ）

（2）－1 キャップ

寸法（mm）：長さ 40、幅 10.2


質量（g）：0.6

（2）－2 Y マニホールド

寸法（mm）：幅 6.5、厚さ 2.0、長さ 58.5

質量（g）：0.8

【外観】

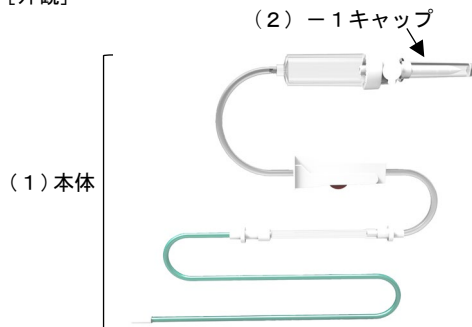

（2）－2 Y マニホールド



【材質】

ABS 樹脂、ポリスチレン、ポリ塩化ビニル、シリコン
ステンレス鋼

4. 作動原理

本品を用いる一般名称：電動式骨手術器械又は、歯科用電気回転駆動装置に備え付けられたポンプの蠕動動作により、当該装置で設定された流量の液体がチューブ内を流れる。

【使用目的又は効果】

歯科用電気回転駆動装置又は、電動式骨手術器械の注水ポンプに取付け、ストレート・ギアードアングルハンドピース又は、手術用ドリルアタッチメントに送水を行う。

【使用方法等】

準備：

- （1）Y マニホールドを用いる場合は、Y マニホールドが滅菌済みであることを確認すること。

使用：

- （1）本体及びキャップをパッケージから取り出す。
- （2）本品のチューブ先端のコネクタを一般名称：ストレート・ギアードアングルハンドピース又は、手術用ドリルアタッチメントに接続する。ストレート・ギアードアングルハンドピース又は、手術用ドリルアタッチメントに注水部分が 2 カ所ある場合は Y マニホールドを用いる。
- （3）本品のポンプ挿入部分を、一般名称：歯科用電気回転駆動装置又は、電動式骨手術器械の注水ポンプ部分に取付ける。
- （4）本品のドリップチャンバー先端から保護用のキャップを取外しイリゲーションバッグに差し込む。
- （5）一般名称：歯科用電気回転駆動装置又は、電動式骨手術器械の操作方法に従い、送水を行う。また必要に応じて、ローラーランプを用いて送水量を調節する。

使用後：

- （1）本品を歯科用電気回転駆動装置又は、電動式骨手術器械から取り外す。
- （2）単回使用である本体及びキャップを廃棄する。
- （3）Y マニホールドのクリーニングと滅菌を行う。

【使用上の注意】

- （1）包装に損傷があった場合は使用しないこと。
- （2）常にチューブが送水ライン上で押しつぶれたり折れ曲がったりすることなく、また張力がかかっていない状態にしておくこと。
- （3）イリゲーションバッグ（生理食塩液等の容器）及びその注入ラインからの液漏れがないことを確認すること。

【クリーニング】（対象：Y マニホールド）

- ・ 内部に残留している生理食塩水等をきれいな水で洗い流す。
- ・ 表面の汚れをブラシ（金属製は不可）等で払い落とし、消毒用アルコールを含ませた綿等で拭き取る。

取扱い説明書を必ずご参照下さい

【滅菌方法】（対象：Y マニホールド）

推奨される滅菌条件の例：

高圧蒸気滅菌

方式	温度／時間
バキューム式滅菌器	134 °C 3 min.
	132 °C 4 min.
重力置換式滅菌器	121 °C 30 min.

その他にも詳細な注意事項が付属の取扱説明書に記載されているので熟読した上で厳守すること。

【保管方法及び有効期間等】

【保管方法】

直射日光及び高温多湿を避けて、清潔な状態で保管すること。

【有効期間】

包装の表示ラベルの記載を参照すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：AJMD 株式会社

電 話 番 号：03-5614-0733

製 造 業 者：ASSAmed GmbH （アッサメッド社）

国 名：ドイツ

製 造 業 者：W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH
（ダブリューアンドエイチデンタルヴェルク
 ビュルモース社）

国 名：オーストリア

取扱い説明書を必ずご参照下さい