

医療用品(05) 副木
一般医療機器 手・指用副木 16210000

Dr.Scholl 巻き爪クリップ

【警告】

糖尿病と診断された方は、ご使用になる前に医師にご相談ください。
[糖尿病に伴う爪症状を悪化させるおそれがある]

【禁忌・禁止】


- 以下の症状、疾患をお持ちの方は使用しないでください。
- ・ 本品の材料に過敏症またはアレルギーのある方。
 - ・ 重篤な糖尿病や重度の血行障害のある方。[糖尿病による足爪症状を引き起こしたり悪化させるおそれがある]
 - ・ 足、手指の爪に感染症の症状がある方。[症状を悪化させるおそれがある]
 - ・ 爪や爪周辺に皮膚疾患がある方。[症状を悪化させるおそれがある]
 - ・ 爪が極度に薄い方。[爪が割れる可能性がある]

【形状・構造及び原理等】

1. 概要

変形力と復元力に富んだ形状記憶合金製の平らなクリップで、足指の爪の固定材料です。

2. 形状・構造

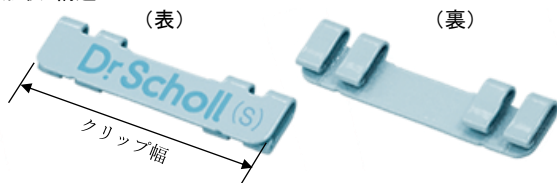

サイズ	クリップ幅
S	14.5 mm
M	16.5 mm
L	18.5 mm

付属品: 保存用プラスチックケース
入り数: 1個

3. 主な原材料

銅、アルミニウム、マンガン合金

4. 原理

形状記憶合金の形状復元作用を利用し、湾曲した足指の爪に本品を装着することで爪を伸ばします。

【使用目的、効能又は効果】

本品を足指の巻き爪や変形爪に装着し、痛みの軽減や爪の形状の改善を促します。

【使用方法等】

＜使用前＞

- 1) クリップの幅と、本品を装着する足指の爪を上から目視し幅を比べ、爪の幅を超えない範囲でほぼ等しいサイズを選択してください。
- 2) 本品を装着する爪ができるだけ伸びていること(2～3mm 目安)を確認します。
- 3) 装着したい爪周辺を清潔にし、十分に乾燥させます。

＜装着方法＞

- 1) 「Dr.Scholl」ロゴのある面を上にして、巻き爪となっている足指の爪にクリップの左右のフックを片方ずつゆっくり挿し込みます。

- 2) クリップがしっかり固定されていることを確認してください。爪の中央を支点として、両端が少し持ち上がる形となります。
- 3) クリップが脱落しないよう、上からテープ(本製品には含まれません)で固定してください。その際、テープを強く巻き付けたりせずに、上から貼ってクリップと爪を固定するようにします。付属の保存ケースにご使用のテープを収納できます。

＜使用后＞

使用後はテープを剥がし、本品を丁寧に指から取り外してください。

＜使用方法に関連する使用上の注意＞

- 1) 爪が厚い場合は、あらかじめ、やすりなどで薄く削ってください。
- 2) 巻き込みが強い場合、爪の幅が広い場合は、左右どちらかに寄せてご使用ください。
- 3) 爪が短くフックがかけられない場合は、爪が伸びてから使用してください。(目安: 2～3mm 程度)
- 4) テープ等を強く巻き付けたり、指全体を覆わないでください。
- 5) 使用したテープが濡れたり湿った場合は、テープを取り替えてください。
- 6) 本品を使用中はゆったりした靴を履いてください。装着中はクリップを圧迫する靴は避けてください。
- 7) クリップで巻き爪の状態が改善した場合でも、使用を中止すると爪が元の形に戻る場合があります。
- 8) 本品で靴下やストッキングを破る可能性があります。
- 9) 運動時、サウナ・入浴・温泉等に入る時は、クリップを取り外してください。

【使用上の注意】

＜重要な基本的注意＞

- 1) 本品の使用中に、痛み・刺激・違和感・かぶれなどの異常がある場合は、直ちに使用を中止し医師にご相談ください。
- 2) 入浴後、爪が柔らかくなり矯正効果が強くなる場合があります。異常を感じた場合は直ちに使用を中止し医師にご相談ください。
- 3) 巻き爪の状態や使用状況によって、クリップの使用期間が異なります。クリップが劣化したときは、新しいクリップに交換してください。
- 4) フックが折れたクリップは、効果が発揮できないので使用しないでください。
- 5) 本品をはさみで切るなどの加工はしないでください。

【保管方法及び有効期間等】

＜保管方法＞

- 1) 本品を指から取り外した後、消毒用のエタノールで軽く拭くなどして本品を清浄し、十分に乾かしてから付属のケースに収納してください。
 - 2) 水濡れ、高温多湿及び直射日光を避け、保管してください。
- ＜有効期間＞通常の使用状況下で約2か月 [自社データによる]
- 1) 本品が完全に折り曲がって元に戻らなくなった場合、塗装がぼろぼろに剥けてきた場合などは、上記有効期間に関わらず、それ以上使用せず新しいものに交換してください。

【製造販売業者及び製造業者等の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者: AJMD 株式会社

製造業者: 協伸特殊金属株式会社

発売元: Scholl's Wellness Company 株式会社

お客様相談室: 0120-816-818