

機械器具 71 視力補正用眼鏡
一般医療機器 眼鏡（35065000）

evil eye スポーツグラス

【警告】

<使用方法>

1. 本製品を着用して太陽や強い光、日食などを決して直視しないでください。[直視することにより失明のおそれがあります]
2. 夜間の車の運転中は、本製品を着用しないでください。[重大な事故を引き起こすおそれがあります]
3. 室内外に関わらず、物が良く見えないような暗い場所では本製品を使用しないでください。[重大な事故やケガのおそれがあります]

【禁忌・禁止】

<使用方法>


1. UVランプなど機械や装置から発生する紫外線への保護メガネとして本製品を使用しないでください。[紫外線を受け続けることにより眼病につながる可能性があります]
2. フレームやレンズが肌に触れる箇所に、かゆみ、かぶれ、湿疹などの異常があるときは、ただちに使用をやめて医師の診断を受けてください。[皮膚炎を発症する可能性があります]
3. ご使用になる間に見え方が変わったと感じられる場合、また見え方が適切でない場合は、ただちに使用を中止し、医師による検眼、または販売店での測定を受けてください。[視力不良により事故を引き起こす可能性があります]

【形状・構造及び原理等】

1. 概要

本品は眼鏡のフレームとレンズにより構成されます。フレームのデザインにより外観形状は異なりますが、代表的なモデルの構造や各部の名称は以下のとおりです。また、フレームやレンズのカラーは選べる場合があります。

<眼鏡本体>

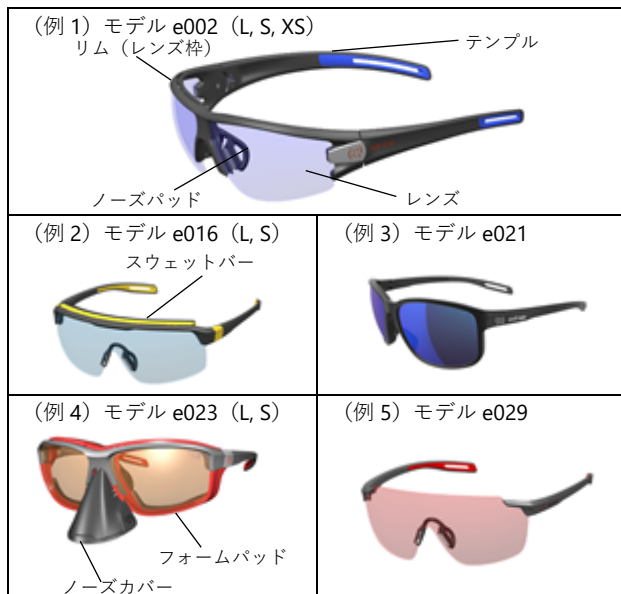

<アクセサリ>

- (1) 専用ハードケース（付属）
- (2) 専用ソフトケース（付属）
- (3) ヘッドストラップ（対象製品に付属）
- (4) ノーズカバー（対象製品に付属）

2. 主な原材料

フレーム： ポリアミド樹脂（Trogamid®）

レ ン ズ： ポリカーボネート

3. 原理

本品は眼鏡フレームとプラスチックレンズから成り、レンズ部分には度入りレンズを組み込むことができます。レンズは UV 光線を 100% 遮蔽することで、太陽光の眩しさや紫外線から目を保護します。レンズの Light Stabilizing Technology (LST®) により、視野のコントラストを拡大し、明暗の変化への自然な適応、また光の強さを快適なレベルに調整します。

【使用目的又は効果】

本品は眼鏡レンズ 1 組と眼鏡フレームから成るスポーツ用サングラスで、視力矯正のために用いるレンズを組み込むことができます。

【使用方法等】

使用前にこの添付文書と取扱説明書をお読みください。

- (1) ケースから取り出した眼鏡が破損していないか、レンズに傷がないか確認してください。
- (2) 左右のテンプレを両手で持ち、テンプレをゆっくり開きます。
- (3) 左右のテンプレをこめかみから顔に沿わせるように装着します。
- (4) 眼鏡をはずす時は左右のテンプレを両手で持ち、少し持ち上げるようにまっすぐ前に引き外してください。
- (5) 使用後は、レンズに付着したゴミやほこりを軽くふき取り、ケースに入れて保管してください。

【使用上の注意】

<重要な基本的注意>

- (1) 使用中に激しい衝撃を受けた場合や、レンズがフレームに確実に固定されていない場合は、レンズの破損や脱落により目や顔を負傷する可能性がありますので、注意してください。
- (2) 本製品は、一般の眼鏡よりも広い視野が確保できるデザインのため、慣れるまで一般の眼鏡より見え方に違和感があることがあります。違和感は徐々に緩和されますが、長期に渡り感じられる場合は運転やスポーツなどでのご使用は避けてください。
- (3) 本製品を高温状態に放置しないでください。お湯を使つての洗浄や、炎天下の車内や砂浜などでの放置、サウナ等の高温環境では使用しないでください。
- (4) レンズの集光作用により周囲を焦がすおそれがあるため、本

取扱説明書を必ずご参照ください。

品を直射日光が当たる場所に放置しないでください。

【保管方法及び有効期間等】

眼鏡の損傷を避けるため、保管や持ち運びの際は付属のハードケースなど適切なケースに入れ、常温で保管してください。

【保守・点検に係る事項】

- (1) 清浄な水と柔らかい布を用い、定期的に洗浄してください。台所用中性洗剤や市販の眼鏡洗浄剤も使用できます。
- (2) 眼鏡の清掃のときにシンナー、ベンジン等の溶剤、また塩素系洗剤（カビ取り用洗剤等）、アルカリ系洗剤（浴室用洗剤等）は使用しないでください。
- (3) 超音波洗浄機の使用は避けてください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者： AJMD 株式会社
03-5614-0733

外国製造業者： Silhouette International Schmied AG
（オーストリア）