

機械器具 56 採血又は輸血用器具
管理医療機器 開放型採血用チューブ JMDN コード 34590000
(一般医療機器 赤血球沈降速度測定装置 35488000)

再使用禁止


Microvette 微量採血管

【禁忌・禁止】

- 毛細血管採血管、チューブ本体、サポートチューブ、キャップ類、キャピラリー管は再使用禁止のため、使用後は廃棄すること。
- バリ、傷、割れ、その他有害な欠点が認められた場合は、本品を使用しないこと。
- 本品を使用して採血した血液を人体に戻さないこと。[採取した血液の安全性が確保できていないため。]

本品は、採血に用いる開放型採血用チューブである。ランセット等で皮膚を穿刺し、漏出した血液を採取し輸送するために用いる。外観形状は、1)毛細血管採血管有り、2)毛細血管採血管無し、3) 毛細血管採血管有りがかつキャピラリー管(届出番号 13B1X10231000150)付属、及び延長した外筒を有し穿孔式キャップを使用することができる 4) APT (Automated Processing Tube)の四種類がある。添加物の種類によりキャップの色が異なる。

*【形状・構造及び原理等】

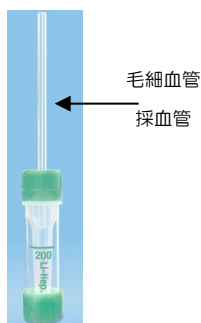

1)毛細血管採血管有り



2)毛細血管採血管無し



3)毛細血管採血管有り



付属品: キャピラリー管



250 μ l
毛細血管採血管有り



250 μ l / 500 μ l
毛細血管採血管無し

4) APT

【使用目的又は効果】

血液検体の採取、輸送又は保管、または赤血球沈降速度測定に用いること。

*【使用方法等】

1)毛細血管採血管有り

- ・ ランセット等にて皮膚を穿刺し、体表に漏出した血液を毛細血管採血管の先端より採取する。




- ・ 毛細血管採血管が満たされるまで血液を採取する。



- ・ チューブ本体を垂直に保持し、毛細血管採血管より血液がチューブ本体内部に流れ落ち切るのを待つ。




- ・ 毛細血管採血管と上部キャップを廃棄する。

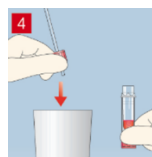

- ・ 底部キャップにてチューブ本体を密閉する。




- ・ 穏やかに転倒混和する。

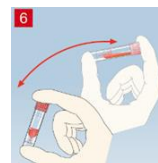


2) 毛細血管採血管無し

- チューブ本体よりキャップを取り外す。

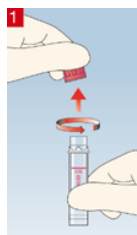

- 取り外したキャップを本体底部に取り付ける。

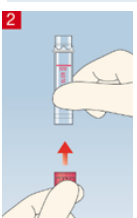


- ランセット等にて皮膚を穿刺し、表面に漏出した血液を、穿刺部位より下に位置するチューブ本体内部に採取する。



- キャップを取り付け、チューブ本体を密閉する。




- 穏やかに転倒混和する。

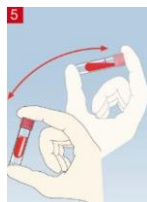


3) 毛細血管採血管有るかつキャピラリー管付属


- 本体キャップを取り外し、毛細血管採血管付きの上部キャップをチューブ本体に取り付ける。

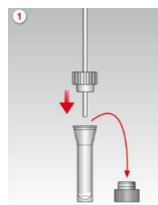

- ランセット等で穿刺した皮膚表面に漏出した血液を、毛細血管採血管により採取する。

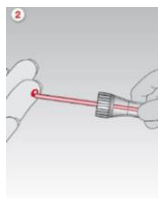


- 毛細血管採血管付きの上部キャップを取り外し、本体キャップをチューブ本体に取り付ける。

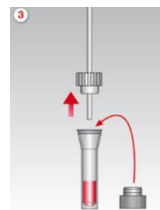

- 穏やかに転倒混和する。



- 本体キャップを取り外し、キャピラリー管を取り付ける。

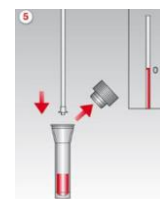


4) APT


250 μ l: 毛細血管採血管有り

(方法 A)


- ランセット等にて皮膚を穿刺し、体表に漏出した血液を毛細血管採血管の先端より採取する。穿孔式キャップを手元に準備しておく。

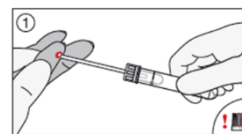


- 毛細血管採血管が満たされるまで血液を採取する。穿孔式キャップを手元に準備しておく。

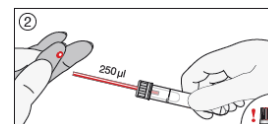


- チューブ本体を垂直に保持し、毛細血管採血管より血液がチューブ本体内部に流れ落ち切るのを待つ。穿孔式キャップを手元に準備しておく。

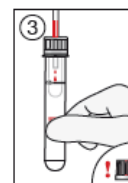


- 毛細血管採血管と上部キャップを廃棄する。穿孔式キャップを手元に準備しておく。

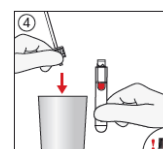

- ・穿孔式キャップにてチューブ本体を密閉する。

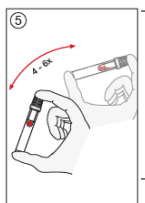

- ・穿孔式キャップを押し下げ、音で封を確認する。

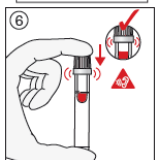


- ・穏やかに転倒混和する。




(方法 B)


- ・毛細血管採血管と上部キャップを廃棄する。穿孔式キャップを手元に準備しておく。

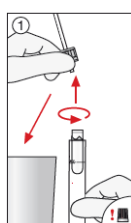


- ・ランセット等にて皮膚を穿刺し、表面に漏出した血液を、穿刺部位より下に位置するチューブ本体内部に採取する。穿孔式キャップを手元に準備しておく。

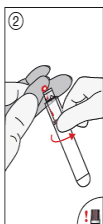

- ・穿孔式キャップで封をする。

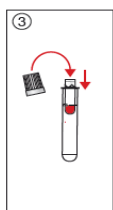


- ・穿孔式キャップを押し下げ、音で封を確認する。

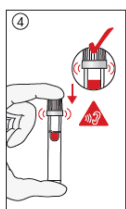


- ・穏やかに転倒混和する。

250 μ l / 500 μ l : 毛細血管採血管なし

- ・チューブ本体より穿孔式キャップを取り外す。

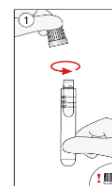

- ・ランセット等にて皮膚を穿刺し、表面に漏出した血液を、穿刺部位より下に位置するチューブ本体内部に採取する。穿孔式キャップを手元に準備しておく。

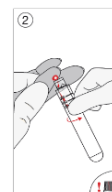


- ・穿孔式キャップで封をする。



- ・穿孔式キャップを押し下げ、音で封を確認する。



- ・穏やかに転倒混和する。

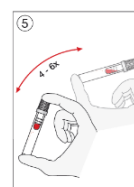

- ・ランセットは本製品に含まれない。

【使用上の注意】

- ・本品には種々の添加物が添加されているので、適切な種類を選択すること。
- ・適切な量の試料を採取すること。

【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

有効期間: 本体ラベル表示の有効期限までに使用すること。
水漏れ、直射日光、高温多湿を避けて、室温で保管すること。

【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称等】

選任製造販売業者	AJMD 株式会社
電話番号	03-5614-0733
外国製造業者	SARSTEDT AG & Co. KG (ザルシュテット)
国名	ドイツ
発売元	ザルスタート株式会社
電話番号	03-3526-3530