


機械器具 (39) 医療用鉗子
一般医療機器 内視鏡手術用イントロデューサ及びエキストラクタ（JMDN コード：70940000）

サスガイド

再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

＜形状・構造＞

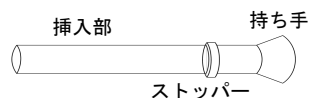

原材料：ポリプロピレン
全長：69mm
挿入部長：47.5mm
挿入部最大外径：12.5mm
挿入部内径：11.8mm

＜原理＞

トロッカーに本品を差し込んで、トロッカー内の逆止弁を広げ、斜視内視鏡レンズ面にコーティングしたコーティング剤が物理的に剥がれるのを防止する。

【使用目的又は効果】

本品は内視鏡手術で、各種の器具を挿入するために用いる筒状の器具である。

【使用方法等】

- ① 本品の滅菌及びガス抜きを行う。
- ② 使用前に損傷や異常がないことを確認する。
- ③ 本品を無菌的に取り出し、内径 12mm のトロッカーに差し込む。
- ④ 使用後は感染防止に留意し、医療廃棄物として適切な方法で廃棄すること。

滅菌方法

使用前にエチレンオキサイドガス滅菌または高圧蒸気滅菌を行うこと。

- ・使用前に本品を滅菌バッグに入れて滅菌を行うこと。
- ・本品は下記の条件で滅菌した時、無菌性及び耐性が確認されている。
- ・エチレンオキサイドガス滅菌終了後は、必ず残留ガスを除去するための十分なガス抜き（エアレーション）を行うこと。

滅菌の種類	エチレンオキサイドガス滅菌
装置名	カートリッジ式全自動滅菌器 SA-H1700 酸化エチレンガス除去装置 ECO-SR730a
メーカー	キャノンメドテックサプライ（株）
滅菌条件	滅菌温度：50℃ 滅菌時間：4時間 EO濃度：約750mg/L

滅菌の種類	高圧蒸気滅菌
装置名	TR-24LA
メーカー	アルプ（株）
滅菌条件	滅菌温度：121.0℃ 滅菌時間：20分

【使用上の注意】

＜併用医療機器＞

- ・内径12mmのトロッカーを使用すること。

＜使用方法＞

- ・本品は未滅菌であるため、滅菌してから使用すること。
- ・トロッカーを使用し、本品を直接体内に挿入しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

＜貯蔵・保管方法＞

- ・水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避け、清潔な場所に保管すること

＜使用期限＞

製造から3年（自己認証による）

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

*製造販売業者

株式会社ニューロシューティカルズ
東京都文京区本郷一丁目28番10号 本郷TKビル
TEL：03-3818-6622

製造業者

株式会社ニューロシューティカルズ