

AQB・ABIインプラント株式会社

* 2021年7月（第2版）
2019年6月（初版）

製造販売届出番号 11B1X10027060402

器58 整形用機械器具
一般医療機器 歯科インプラント補綴用器具 70722000

AQBピックアップコーピング

再使用禁止

* 【禁忌、禁止】

- * ・ 当社AQBインプラントBタイプ（2ピースタイプ）及びAQBABIインプラントの手術以外に使用しないこと。〔磨耗、破損の可能性があります〕
- * ・ 再使用の禁止。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：

AQB・ABIインプラント株式会社

製造元：


AQB・ABIインプラント株式会社

* 【形状・構造及び原理等】

1 原材料

ポリアセタール

* 2 構造

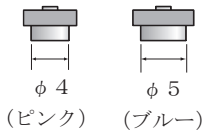

型番：φ 4、φ 5

使用するAQBインプラントBタイプ
(2ピースタイプ) 又はAQBABI
インプラントに合わせて選択

3 原理

AQBインプラント・マルチアバットメント先端を内包するような形状を有しています。マルチアバットメントと接合後、印象採得することにより、印象材に取り込まれるための突起を有しています。

【使用目的又は効果】

歯科インプラント用の補綴物の設計、製作、装着・固定などの目的に用いる器具。

* 【使用方法等】

詳細な使用方法については「AQBインプラントシステム・2Pieceタイプ技工マニュアル」を参照してください。

- * 1 植立したAQBインプラントBタイプ（2ピースタイプ）又はAQBABIインプラントにAQBインプラント・マルチアバットメントを装着し、その上部にAQBピックアップコーピングをしっかりと取り付けして下さい。
- 2 印象採得の通法に従い、口腔内印象を採得して下さい。
- 3 印象材の内部にAQBピックアップコーピングが残っていることを確認して下さい。
- 4 内部に残存しているAQBピックアップコーピングにマルチアバットメントに接続した状態のAQBインプラントアナログを戻し、石膏模型作製の通法に従い石膏模型を作製することにより、インプラントの位置関係を模型上に再現します。

【使用上の注意】

<重要な基本的注意>

- 1 本製品の使用に際し、使用前にAQBインプラント講習会に参加し、必要な知識と技術を修得して下さい。また、AQBインプラントの取扱説明書等を参照の上、正しい使い方により操作して下さい。
- 2 使用前に破損など使用に支障がないか確認して下さい。
- 3 AQBピックアップコーピングはマルチアバットメントに確実に装着して使用して下さい。

【保管方法及び有効期間等】

高温、多湿、直射日光を避け、常温で保管。

取扱説明書等を必ずご参照下さい。