

機械器具 6 呼吸補助器
一般医療機器 人工呼吸器用マスク JMDNコード70564000
レスコン フルフェイスマスク

【警告】

1. 接続する機器に電源が入っていない、又は機器に不具合が生じた場合には、本品を使用しないでください。
2. マスクのエルボーにある穴(呼吸排出部)を絶対に塞がないこと。
この呼吸排出部から患者の呼気が排出されます。
装置が作動しているときは、この呼吸排出部からはほとんどの呼気が排出されますが、装置が作動していないにもかかわらず、マスクを装着したまま呼吸すると、CO₂ のレベルが上がリ、状況によっては傾眠を引き起こし、最悪の場合、死にいたる場合があります。
3. 本マスク使用の際に、鼻または気道の極度の乾燥、ドライアイ、敏感肌、鼻水、耳の痛み、副鼻腔の不快感、アレルギー反応、皮膚の炎症などの症状が認められた場合は、使用を中止し、医師に相談すること。
4. 自発呼吸の無い患者には使用しないこと。

【禁忌・禁止】



1. 本品は、同一患者にのみ使用が可能な製品であるため、処方された患者以外に使用しないこと。
2. 破損した場合は使用しないこと。
3. 嘔吐等、不具合が発生した場合に使用者自身でマスクを外すことができる患者へ使用すること。
4. 体重 30Kg 以上の成人にのみ使用すること。
5. 自身でマスクの取り外しが出来ない患者には使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

1. 構成

本器具は、マスク及びマスクを固定するためのヘッドギアにより構成され、フレームが2タイプ(FM-003、FM-009)あり、シリコンクッション部分は共通パーツでサイズはM、Lの2種類からなる。

2. 外観図及び各部の名称

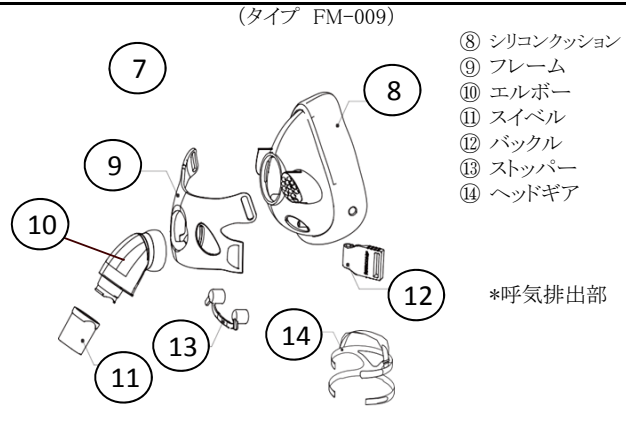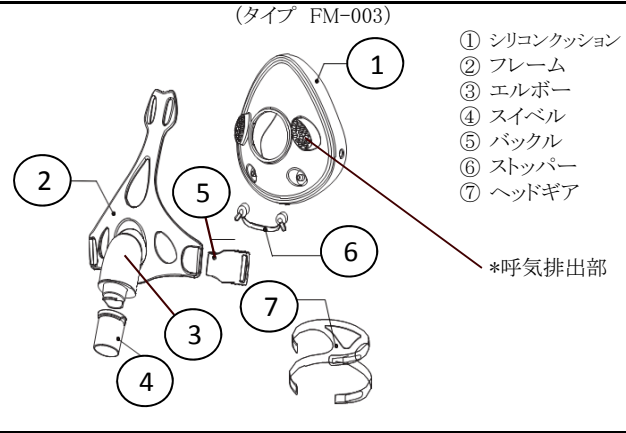

【使用目的又は効果】


本器具は、人工呼吸器または持続的気道陽圧ユニット(CPAP)を用いて使用する際のマスクとして用いる。

【使用方法等】

1. マスクの装着


ヘッドギアとマスクを準備してください。バックルにヘッドギアを通したあと、フレームにヘッドギアを取り付けてください。

タイプ FM-003

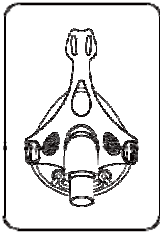


(FM-003)

タイプ NM-009

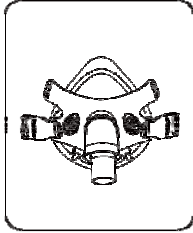


(FM-009)

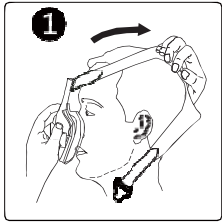


①マスクを鼻とフレームに装着し、ヘッドギアを頭からかぶります。(FM-003 / FM-009 装着手順共通)

(FM-003)

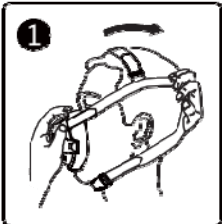


(FM-009)

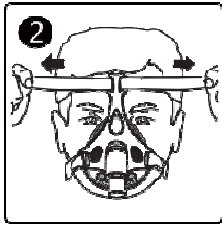


②クリップをフレームに接続します。アッパーヘッドギアのストラップを、しっかりとした感触が得られるまで調整します。(FM-003 / FM-009 装着手順共通)

(FM-003)

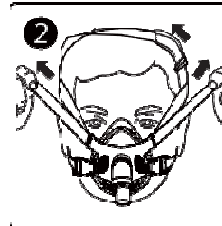


(FM-009)

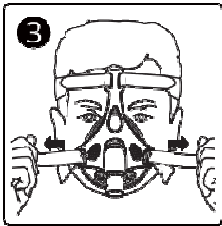


③下のヘッドギアストラップも手順2を繰り返します。(FM-003 / FM-009 装着手順共通)


(FM-003)

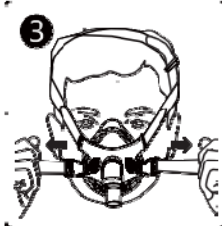

(FM-009)

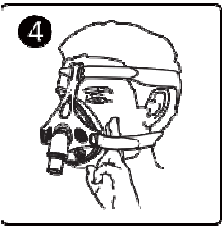


④指が2本入る程度のスペースを確保すると、より快適にお使いいただけます。(FM-003 / FM-009 装着手順共通)

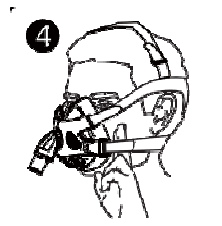


本製品には取扱説明書がありますので、必ず確認してください。

【使用方法等】

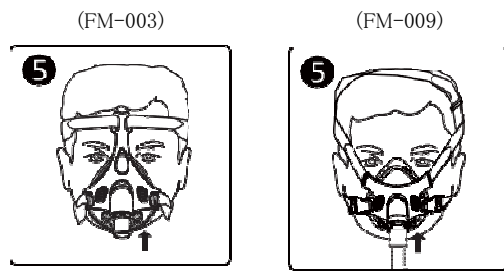

⑤チューブをスイベルに接続します。
(FM-003 / FM-009 装着手順共通)

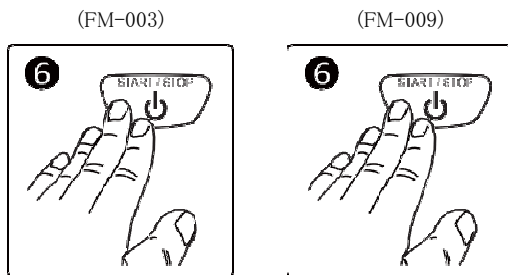

⑥チューブのもう一方の端を人工呼吸器またはCPAP装置に接続します。人工呼吸器またはCPAP装置の電源を入れ、治療を開始します。
(FM-003 / FM-009 手順共通)



⑦ 装着の際の注意事項

- 1) エルボー（呼気排出部）の穴を絶対に塞がないこと。
- 2) マスクは必ず人工呼吸器または持続的気道陽圧ユニット（CPAP）が動作しているときのみ使用すること。
- 3) ヘッドギアを強く締め過ぎないこと。
- 4) マスクが壊れた状態で使用しないこと。

2. マスクの組み立て

本器具をクリーニング後、再度組み立てる場合

- 1) シリコンクッションをフレームに取り付けます。
- 2) ヘッドギアを取りつけます。

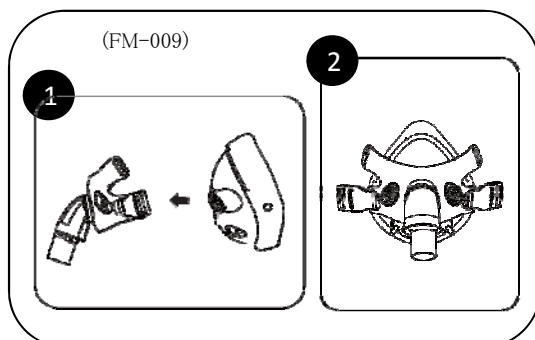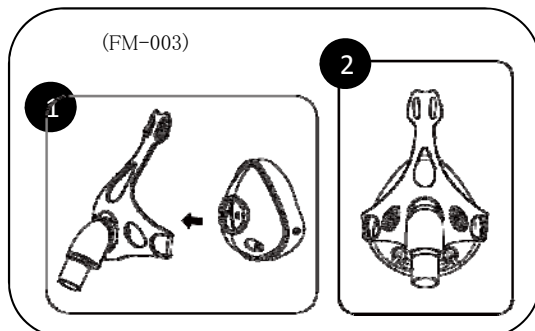

【使用上の注意】

1. 使用中は以下の事項に留意すること。
 - 1) マスクの呼気排出部の穴を絶対に塞がないこと。
 - 2) 持続的気道陽圧ユニットの電源を切ったら、すぐにマスクを外すこと。

2. 次回の使用に支障のないよう必ず【保守・点検に係る事項】の内容に従い、クリーニングすること。
3. 本器具と併用する医療機器に関しては、その医療機器に付属の添付文書等を参照すること。

【保管方法及び有効期間】

- (1) 本品は以下の条件で操作・保管すること。
操作環境: 温度5℃～40℃
保管環境: 温度-22℃～55℃
湿度: 95%以下、結露なし
- (2) 水濡れに注意し、高温・多湿・直射日光のあたる場所を避け室温で保管すること。

【保守・点検に係る事項】

1. 注意事項
 - 1) アルコールや塩素又は漂白剤等でマスクを洗浄しないこと。マスクを食器洗浄機で洗浄しないこと。マスクの劣化や破損、寿命低下の原因となります。
 - 2) マスクに劣化や亀裂が生じた場合、直ちに新品と交換すること。
2. マスクのクリーニング
 - 1) 使用前
本器具が破損していないか確認すること。劣化や破損がある場合は使用しないこと。
 - 2) 使用后
 - ① フレームからヘッドギア、シリコンマスク、額パッドを取り外す。
 - ② シリコンマスクと額パッドとマスク本体をぬるま湯の石鹸水で洗浄し、きれいな水ですすぐ。
 - ③ 呼気ポートに付着物が無い状態を確認し、全ての部品を乾燥させてから組み立てる。
3. ヘッドギアのクリーニング
ヘッドギアは、1週間に1度を目安に中性洗剤を使ってぬるま湯で手洗いし、自然乾燥する。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者: SMI合同会社

電話番号: 0561-59-2708

製造業者: Guangdong EDA Technology Co., Ltd.

(中華人民共和国)

本製品には取扱説明書がありますので、必ず確認してください。