

シングルユース MST I/A Allegro（SP）

再使用禁止

【警告】

- ・本品は繊細な機器です。取扱いに注意すること。[機器の破損を防止するため。]
- ・本品の滅菌包装が破損している場合は、使用しないこと。[患者の感染、負傷を防止するため。]
- ・本品に損傷がある場合は、使用しないこと。[患者の負傷を防止するため。]

【禁忌・禁止】

- ・本品はチップとハンドピースの一体型で、照射滅菌により滅菌されており、全体が単回使用品である。再滅菌又は再使用しないこと。[患者の感染や負傷を防止するため。]
- ・本品は、他のデバイスとの接触を避けること。[機器の破損を防止するため。]
- ・本品の修理や、角度を付けたり、改造をしないこと。[患者の負傷を防止するため。]

【形状・構造及び原理等】



1. 概要

本品は、眼科手術用の I/A チップと付属品であるハンドピースからなる、単回使用眼科手術用チューブ付カニューレである。I/A チップは、カニューレとシリコンスリーブで構成されている。

I/A チップとハンドピースが一体型で、全体が滅菌品で単回使用品である。

2. 構成

SP（I/A チップとハンドピースが一体型のタイプ）

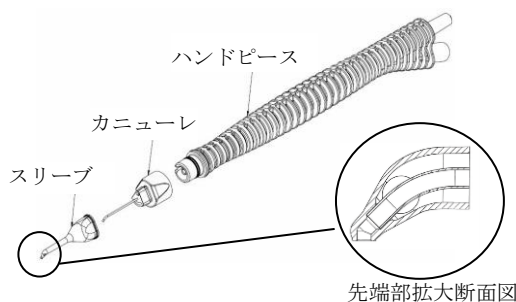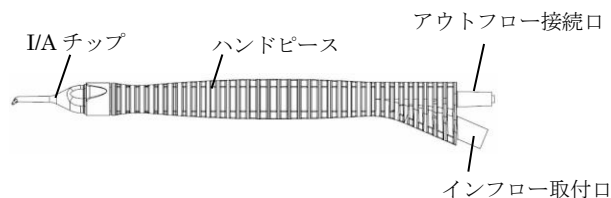

眼球に直接または間接的に接触する部品

I/A チップ：シリコンゴム、ステンレススチール、ポリエチレン

ハンドピース：ポリカーボネート

3. 原理

眼科手術時に灌流液などの注入及び及び眼内物質および眼内レンズ等の吸引に使用する。


【使用目的又は効果】

眼科手術時に灌流液などの注入及び及び眼内物質やレンズの吸引に使用する。

【使用方法等】

本品はチップとハンドピースの一体型で、照射滅菌により滅菌されており、全体が単回使用品である。本品のプライミングと、操作方法は、水晶体吸引機器等の使用説明書あるいは添付文書を参照すること。

- 1 使用前に必ず、本品に損傷がないことを確認すること。チップを改造しないこと。
- 2 本品は、滅菌済みであるので、そのまま使用できる。併用する水晶体吸引機器等の取扱説明書に従って、ハンドピースを水晶体吸引機器等のチューブにセットする。

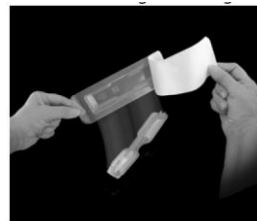

- 3 本品を外側容器から取り出す際、不潔野に触れる看護師等が外側容器のシールを開封し、内側容器のみを滅菌野に落とすか、清潔野に触れる看護師等が内側容器を取り出す。

注意：先端のねじれ/破損が発生する恐れがあるため、シリコン部分に触れないこと。



【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- (1) 使用期限が過ぎている場合には使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

- 1 保管方法：
水ぬれに注意し、高温多湿及び直射日光を避けて、保管すること。
- 2 使用期限：
使用期限は包装ラベルに記載されている。
(自己認証データによる)

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

選任製造販売業者：株式会社エムエスティー

住 所：大阪府箕面市船場西 1-8-9 箕面船場ビル 2F

製 造 業 者：マイクロサージカルテクノロジー、インク
(Microsurgical Technology, Inc.)

国 名：アメリカ