

Osher/Malyugin リングマニピュレータ

【禁忌・禁止】


- ・ 本品を改造しないこと。[患者の感染や負傷を防止するため。]

【形状、構造及び原理等】

1. 概要

本品は、再使用可能な眼科用鉤である。
本品の先端構造は、Malyugin リングのリング部と適合し、眼科手術時に眼組織（虹彩）を非外傷性に把持、支持又は拡張する Malyugin リングを移動、配置に用いる。

2. 形状

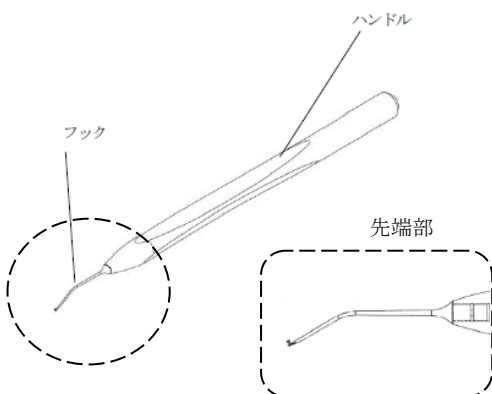

フック：チタン

【使用目的又は効果】

本品は、遠位端に行くに従って細くなる軸状のハンドルをもつ再使用可能な眼科用鉤であり、眼科手術時に眼組織（虹彩）を非外傷性に把持、支持又は拡張する「Malyugin リング」を移動、配置に用いる。本品は再使用可能である。

【使用方法等】

1. 本品は使用前に必ず滅菌をすること。

標準的な滅菌方法及び滅菌条件は以下のとおり。

- ・ 滅菌方法：高圧蒸気滅菌
- ・ 滅菌条件：132℃ 4 分以上（プレバキューム）あるいは、10 分（大気圧）
- ・ 乾燥時間（包装されている場合）：20 分（プレバキューム）あるいは、15 分（大気圧）
- ・

2. 本品のフックの先端構造は、Malyugin リングのコイル部と適合し、Malyugin リングを移動、配置する。
3. 使用後は適切に洗浄・滅菌を行う。
洗浄工程：蒸留水で洗浄する。清潔な蒸留水で 3 分間超音波洗浄する。不織布で水けをふき取り乾燥する。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- (1) 本品に異常・不具合があった場合には直ちに使用を中止すること。
- (2) 本品は、本来の使用目的以外の用途に使用しないこと。
[誤って使用した場合、本品又は周辺組織等に損傷・障害を与える可能性がある。]
- (3) 使用前は、洗浄及び滅菌処置済みの本品に、外観上の損傷等がないことを確認すること。

- (4) 新しく使用を開始する製品は、使用前に十分に洗浄及び滅菌を行って使用すること。
- (5) 落下等による衝撃を受けた製品は、異常のないことを必ず確認すること。
- (6) 本品に付着した血液・体液・異物等は、清掃・洗浄により完全に除去してから消毒・滅菌処置を行うこと。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

1. 本品を保管する際は以下の事項に注意すること。
 - (1) 気圧、温度、湿度、風通し、日光、埃、塩分、イオン分等、本品に悪影響を及ぼす恐れがない場所であること。
 - (2) ガスや蒸気が発生しない場所であること。
 - (3) 水等がかからない場所であること。

【包装】

1 本/ 箱

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者名：株式会社エムエスティー
住 所：大阪府箕面市船場西 1-8-9 箕面船場ビル 2F
製 造 国 名：アメリカ
製 造 業 者 名：マイクロサージカルテクノロジー、インク
(Microsurgical Technology, Inc.)