

医療用品 05 副木
一般医療機器 成形副木 JMDN コード: 35354000
サーブマックス・頸椎カラー

再使用禁止

【禁忌・禁止】

<適用対象(患者)>


- ・異物に対する重篤なアレルギーが判明している患者には使用しないこと。[炎症等の原因となるため]

<使用方法>

- ・再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

1. 形状

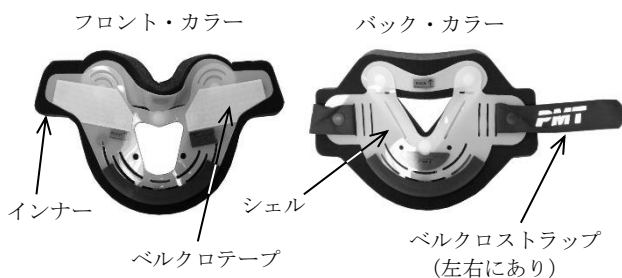

2. 原材料

インナー: エステル系ポリウレタン
シェル: ポリエチレン

3. 寸法等

外装に記載

【使用目的又は効果】


頸椎手術後、又は外傷等により損傷した頸部の補助的な支持・固定。

【使用方法等】

1. サイズの決定

- ①正面を向いた状態で、肩の中央の位置(高さ)に付属の採寸カードの底面を合わせ、首にあてがう。
(カード底面は床と平行にすること。)


- ②アゴの先端と採寸カードを、定規等を使って直線で結ぶ。

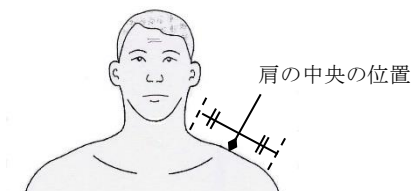

- ③採寸カードを読み取り、適合するサイズを選択する。

<例>

採寸カード

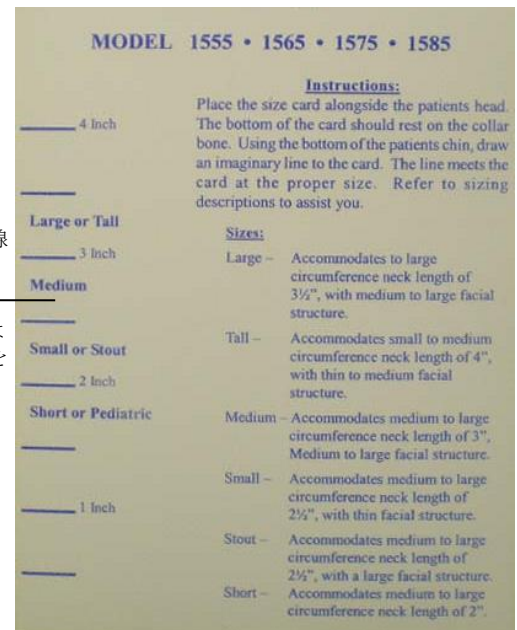

※小児の場合は採寸カード裏面に記載されている、年齢、体重、身長等のサイジング情報を参考にしてサイズを決定する。

2. 装着方法


- ①フロント・カラーにてアゴを支えるように、やや下方からあてがう。

- *②バック・カラーにて後頭部を支えるようにあてがい、ベルクロストラップを正面に回して固定する。

3. インナーの交換

本品には交換用のインナーが1組付属しており、必要に応じて取り替えが可能。取り換える際は、シェルの周囲からインナーが均等にはみ出る位置に設置し、偏らない様にする。

フロント用インナー

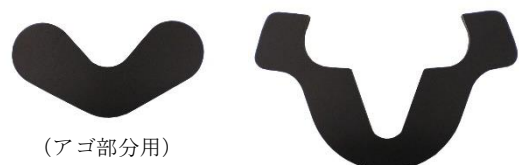

バック用インナー



【使用上の注意】

重要な基本的注意

1. 化学物質に対し過敏症が疑われる患者に使用する際は、皮膚の炎症等が生じる可能性がある点を注意喚起すること。
2. フロント・カラーのシェルを濡らさないこと。[ベルクロテープの剥がれ防止のため]
3. 他社製の類似品と組み合わせて使用しないこと。[接続不良、故障の原因となるため]

*4. 本品はMR Safe であり、一般的なMR 検査による影響はない。

【保管方法及び有効期間等】

高温、多湿、直射日光、水ぬれを避け、常温にて保管すること。

【保守・点検に係る事項】

1. 使用前・使用後の点検
外観、機構等、異常がないことを確認すること。
- *2. 故障時のお願い
異常のあるもの及びその疑いのあるものは使用を中止し、本文書に記載の問い合わせ先に連絡するか、新しい物と取り替えること。
3. 洗浄方法
①異物が付着した場合は速やかに付着物を取除くこと。
②インナーを洗う際は、中性洗剤を使用すること。
③シェルを拭く際は、シンナー、ベンジンなどの溶剤を使用しないこと。
④本品は滅菌の必要はない。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

<製造販売業者>

欧和通商株式会社：TEL 03 (5803) 7172

<製造業者>

日本語名：ピーエムティー社（アメリカ合衆国）

英 名：PMT Corporation (U.S.A)

<問い合わせ先>

欧和通商株式会社 札幌営業所：TEL 011 (708) 7725

東京営業所：TEL 03 (3813) 8201

大阪営業所：TEL 06 (6304) 9305

福岡営業所：TEL 092 (526) 3618

住所等につきましては下記ホームページにてご確認願います。

ホームページアドレス <http://www.ohwa-tsusho.com>