

医04 整形用品

一般医療機器 アイパッド 11661000

オオサキ 貼る眼帯


再使用禁止

【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止
- ・再滅菌禁止

【形状・構造及び原理等】

- ・パッドとそれを固定する用途の粘着テープから成る眼帯を滅菌した製品です。
- ・粘着テープ：ポリエステル不織布、アクリル系粘着剤
パッド：ポリエチレンネット状フィルム両面付脱脂綿

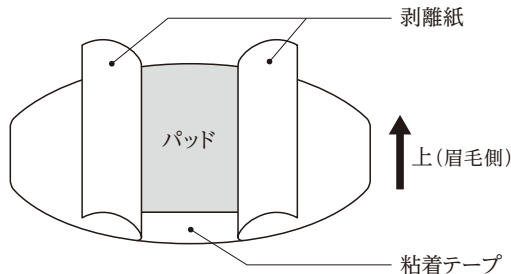

【使用目的又は効果】

眼の保護又は分泌物の吸収に用いる。

【使用方法等】

1. あらかじめ眼の周りを清潔にする(皮膚に水分やクリーム、汚れなどが残っていると密着性が損なわれるため、きれいに拭き取ってから使用する)。
2. 剥離紙を開く(粘着面やパッド部に手が触れないように注意する)。
3. 粘着テープが付いていない方を上(眉毛側)にする。
4. パッド部が眼を覆うように当て、剥離紙を剥がしながら貼る。

【使用上の注意】

1. 使用注意
 - 1) 本品の使用により、発疹、発赤、かゆみなどの症状が現れた場合には使用を中止し、医師又は薬剤師に相談すること。
 - 2) 粘着面を傷や湿疹、かぶれなどの患部に貼らないこと。
 - 3) 包装が開封、破損及び汚損している場合は使用しないこと。
 - 4) 使用前にパッドに異常がないか確認して使用すること。
 - 5) 使用中にパッドが汚れたり水に濡れた際は、新しい物に貼り替えること。
 - 6) 本品の使用中に粘着剤のおいを感じる場合があるが、品質上問題はない。
 - 7) 皮膚刺激の発生原因になるため、長時間貼付したり、急激に剥がしたりしないこと。
 - 8) 使用回数は、機能・衛生上1枚につき1回限りとする。
 - 9) 小児の手の届かない所に保管すること。
 - 10) 本品は滅菌済のため、個包装を破らないように保管し、開封後は速やかに使用すること。
2. 重要な基本的注意
 - 1) 斜視・弱視訓練用ではありません。
 - 2) 本品の使用中は歩行や階段の昇り降りに注意すること。また、自動車や自転車などの運転は避けること。
 - 3) 複数の患者には使用しないこと。
3. その他の注意
使用後の本品は、感染防止に留意し、安全な方法で処分すること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法
直射日光及び火気を避け、湿気の少ない清潔な場所に保管すること。
2. 有効期間
容器又は被包の「使用期限」に表示【自己認証(当社データ)による】。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者
オオサキメディカル株式会社
お問い合わせ先 Tel 0120-15-0039