


油圧プレス

【警告】

- ・ 本品は、歯科医療有資格者のみが使用すること。
- ・ 加圧の際には、指などの人体を挟まないように十分に注意して使用すること。

【形状・構造等及び原理等】

1. 形状

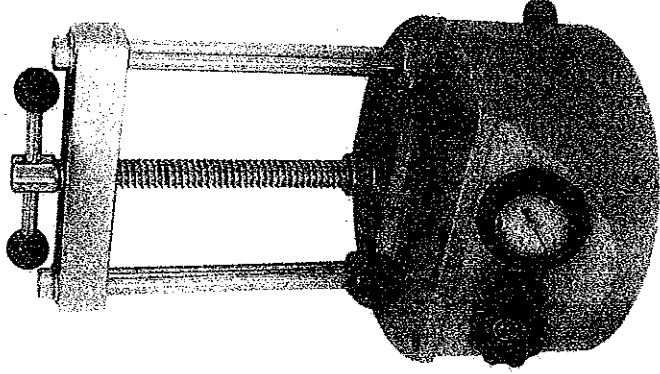

重量	28kg
フラスコ装着寸法	177mm x 152mm (高さ x 幅)

【使用目的、效能又は効果】

歯科技工室で可塑性鑲歯を作製する場合、床用材料を成形・重合するために、二分された鋳型同士を圧接するために用いる装置をいう。

【品目仕様等】

最大加圧力：10MPa

【操作方法、使用方法等】

- ① 加圧台の中心にフラスコを載せる。
- ② 押さえネジでフラスコを軽く締める。
- ③ 圧力開閉バルブを閉じ、加圧ハンドルを上下に作動する。
- ④ 圧力計は、フラスコ内の余剰レジンが抜け出すまで安定しませんが、圧力計の針が安定したとき、最適な圧力に到達したことになります。
- ⑤ 圧力開閉バルブを開くと、加圧台が下がり、フラスコを取り出すことができます。

【使用上の注意】

- ① 本品は、過度な加圧による故障、油漏れ等の防止の為、安全弁装置付です。
8mpa 前後で作動、6mpa 前後まで落ちます。
- ② 設置は平らな安定した場所を選んで下さい。
- ③ 本品は、本説明書に記載の用途以外には使用しないで下さい。
- ④ 本品の使用前、使用中に不具合が生じた場合は使用を中止して下さい。
- ⑤ 故障の原因となりますので、本品が汚れた場合は清掃して下さい。
- ⑥ 本品との接触により手荒れなどの過敏症状が現れた場合、直ちに使用を中止し、医師の診断を受けて下さい。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

- ① 直射日光を避けて冷暗所に保管すること。
- ② 歯科の従事者以外が触れることのないよう適切に保管・管理すること

【包装】

1台

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者：株式会社オオタキ

住 所： 〒452-0833

愛知県名古屋市中区山本1丁目128番地の1

TEL： 052-501-9711

FAX： 052-502-2785

製造業者： 株式会社オオタキ