


器械器具 68 印象採得又は咬合採得用器具
一般医療機器 歯科用咬合器 (10201000)

コレクト咬合器

【形状・構造等】

1) 構造：外観写真の通り。

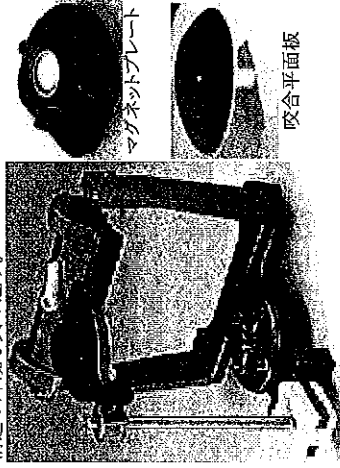

2) 材質
①本体：アルミニウム合金、SUS304
②切歯指導釘：アルミニウム合金

③切歯指導板：ABS樹脂
④スプリットキヤストプレート：亜鉛

⑤マグネットプレート：ABS樹脂
⑥咬合平面板：SUS304

3) 寸法
①高さ：138mm±1.0mm
②幅：166mm±0.5mm
③頭間距離：100mm±0.2mm
④頤間距離：105mm±0.1mm

【使用目的、効能又は効果】

患者の上顎及び下顎模型を本品に取り付け、下顎運動をシュミレートするための器具

【品目仕様】

外観：正しい輪郭を持ち、サビ、歪み、汚染、その他欠陥があつてはならない。

【操作方法又は使用方法等】

適法に従い、患者の口腔内模型を本品に装着し、咬合機能の調整に使用する。

【使用上の注意】

1) 一般

①適用対象：口腔内模型による下顎運動のシュミレート
②併用医療機器：歯科用石膏こう、歯科用ワックス

2) 使用上の注意

①本品は、[使用目的、効能又は効果]の項に記載の用途以外には使用しないこと。

②本品を使用前に予備の稼働を行い、不具合がないことを確認すること。

③本品の使用前、使用中に不具合が生じた場合は使用を中止すること。

④過度圧力での使用は避けること。

⑤本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

3) 重要な基本的注意

①本品に対して発疹、湿疹、発赤、潰瘍、腫脹、かゆみ、しびれ等の過敏症状のある者は、手袋などを用いて直接本品には触れないこと。

②本品に対して発疹、湿疹、発赤、潰瘍、腫脹、かゆみ、しびれ等の過敏症状があらわれた場合は、使用を中止し、医師の診断を受けること。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

【貯蔵・保管方法】

- ・水のかからない場所に設置、保管すること。
- ・歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【包装】

【本体セット】

本体 1台
スプリットキャストプレート 2個
切歯指導釘 1本
切歯指導板 1個

【単品】

咬合平面板 1個
マグネットプレート 5個

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者：株式会社オオタキ

住所：〒452-0833

愛知県名古屋市中区山本1丁目128番地の1

電話番号：052-501-9711

製造業者：山八齒材工業（常熟）有限公司

製造先国名：中華人民共和国