


機械器具 68 印象採得又は咬合採得器
一般医療機器 歯科用咬合器(10201000)

南加大咬合器

【形状・構造及び原理等】

構造：外観写真の通り。

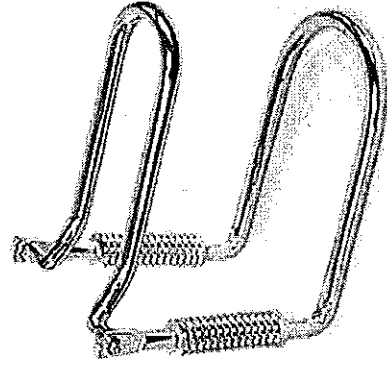

材質：真鍮（クロームメッキ）

【使用目的、効能又は効果】

患者の上顎及び下顎模型を本品に取り付け、下顎運動をシミュレートするための器具

【品目仕様】

寸法	高さ	幅	顎間距離	顎頭間距離
	62 mm	47 mm	50 mm	40 mm

【操作方法又は使用方法等】

通法に使い、患者の口腔内模型を本品に装着し、咬合機能の調整に使用する。

【使用方法に関連する使用上の注意】

本品を使用前に予備の稼働を行い、不具合がないことを確認すること。

【使用上の注意】

- 1) 一般
 - ①適用対象：口腔内模型による下顎運動のシミュレート
 - ②併用医療機器：歯科用石膏、歯科用ワックス
- 2) 使用上の注意
 - ①本品は記載の用途以外には使用しないこと。
 - ②本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。
- 3) 重要な基本的注意
 - ①本品の使用前、使用中に不具合が生じた場合は使用を中止すること。
 - ②本品の使用により、手荒れ等過敏症状があらわれた場合は使用を中止し、医師の診断を受けること。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

〔貯蔵・保管方法〕

- ・機器及び付属品は歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。
- ・水のかからない場所に設置、保管すること。

【包装】

本体

1 台

【製造販売業者及び製造業者等の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者：株式会社オオタキ

住所：〒452-0833

愛知県名古屋市中区山本1丁目128番地の1

電話番号：052-501-9711

製造業者：株式会社オオタキ