

機械器具 09 汎用 X 線診断装置用電動式患者台（40655000）

一般医療機器 特定保守管理医療機器 設置管理医療機器

リーダー撮影台 VB-57C (TYPE 2)

【警告】

1. X 線防護について

X 線を誤って使用すると、身体に危害を及ぼす場合があります。

2. 被検者に対する指導・警告

- ・介護者の必要な被検者の場合には介護者に X 線防護衣を装着させ、被ばくに注意すること。
- ・被検者の受像部へのセット時には転倒・ケガをしないよう注意すること。
- ・装置を動かすときは被検者に装置が動く事を伝え、注意を促すこと。


3. 使用上の警告

- ・操作者は常に被ばくを防ぐように注意すること。
- ・設置時は、必ずアンカー固定を行うこと。
- ・装置の可動範囲域にストレッチャー・イス・踏み台等のものを置かないこと。
- ・被検者がスイッチ等に触れないように注意すること。
- ・スイッチの押しまちがいに注意すること。
- ・故障、トラブルが発生した場合には専門のサービスマンに依頼すること。
- ・ケガ・事故を招く恐れがあります。

【禁忌・禁止】

この装置は防爆型ではないので、装置の近くで可燃性及び爆発性の気体を使用しないこと。

2) 各部の名称

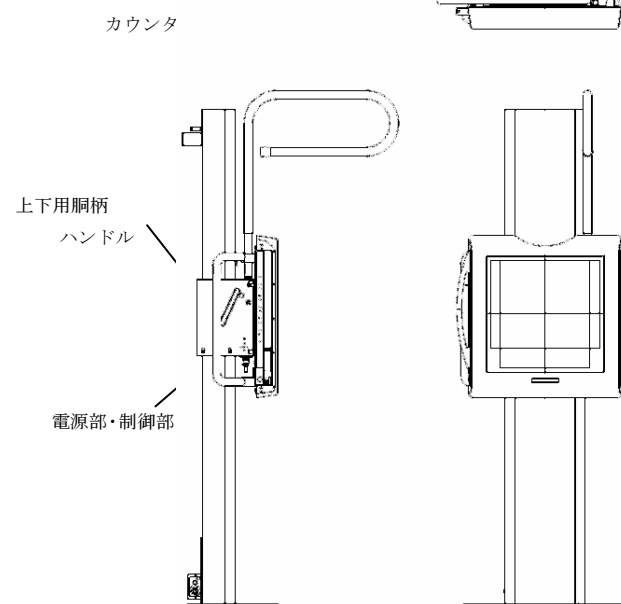

3) 電気的定格

定格電圧	AC 100V
周波数	50/60Hz
電源入力	0.2KVA
保護の形式	クラス1
保護の程度	B型

4) 本体寸法及び重量

寸法 (mm) 幅 665 × 奥行 358
高さ 1965

重量 約 130Kg

【形状・構造及び原理等】

1) 構成

本装置は以下のユニットにより構成される。

- (1) 受像部
- (2) 基台ベース
- (3) 柱 (スタンド)
- (4) 上下動用胴柄・ハンドル
- (5) カウンターバランス・チェーン
- (6) 電源部 (制御部)
- (7) 付属品

5) 作動・動作上の原理

上下動ロック

の解除 : 上下のロック方式は電源OFF時にロックされるオフロック方式である。
ハンドルスイッチをONさせるにより、電磁オフロックが作動して、受像部の上下ロックを解除する。
このスイッチはONしている間のみロックを解除するデッドマン方式である。

取扱説明書を必ずご参照下さい。

【仕様、使用目的、効能又は効果】

1) 仕様

寸法(単位mm)

外形寸法：幅 665×奥行 358×高さ 1965

上下動ストローク：床から半切タテ中心

最上位 1683

最下位 471

上下動機構部

ロック方式：オフロック方式

ロックの解除：ハンドルスイッチ

受像部

CXD I-50G

電源

電源：AC100V・50/60HZ・0.2KVA

電源コード：3芯（1.25SQ×2，2SQ×1）10m

重量

：約 130 kg

2) 使用目的

立位による X 線一般撮影を効率的に行うことを目的とした撮影台である。

【操作方法又は使用方法】

使用環境条件

温度：+10℃～+40℃

湿度：30%～75%RH（結露のないこと）

設置上の注意

据え付け設置時は床面の状態を確かめ、スペーサー等の調整により垂直を確保すること。

設置時は必ずアンカー固定を行なうこと・
詳細は取扱説明書を参照してください。

操作方法

- ①受像部の上下動は上下動スイッチをONして、ロックを解除することにより行ないます。
- ②受像部の取扱いは、受像部の取扱説明書を参照してください。

詳細は取扱説明書を参照してください。

【使用上の注意】

警告

1. X 線防護について

X 線を誤って使用すると、身体に危害を及ぼす場合があります。

2. 被検者に対する指導・警告

- ・介護者の必要な被検者の場合には介護者に X 線防護衣を着せ、被ばくにご注意すること。
- ・被検者の受像部へのセット時には転倒・ケガをしないよう注意すること。
- ・装置を動かすときは被検者に装置が動く事を伝え、注意を促すこと。

3. 使用上の警告

- ・操作者は常に被ばくを防ぐように注意すること。
- ・設置時は、必ずアンカー固定を行うこと。
- ・装置の可動範囲域にストレッチャー・イス・踏み台等のものを置かないこと。
- ・被検者がスイッチ等に触れないように注意すること。
- ・スイッチの押しまちがいに注意すること。
- ・故障、トラブルが発生した場合には専門のサービスマンに依頼すること。
ケガ・事故を招く恐れがあります。

禁忌・禁止

この装置は防爆型ではないので、装置の近くで可燃性及び爆発性の気体を使用しないこと。

重要な基本的注意

- ①検査を開始する前に装置に異常がないこと、構成品、付属品が確実に固定されていることを確認すること
- ②検査前に患者の位置、状態をよく確認すること。

高齢者適応

高齢者は握力など体力に問題がある場合は X 線防護衣を着用した介助者を付けるなどして検査に臨むこと。

妊婦・産婦、授乳婦及び小児への適応

- ①妊婦及び妊娠の疑いのある者及び授乳中の者へ使用する場合は医師の指示のもとで慎重に行うこと
- ②小児の検査の場合は X 線防護衣を着用した介助者を付けること。

その他の注意

この装置を廃棄する場合は、産業廃棄物となります。必ず地方自治体の条例・規則に従い、許可を得た産業廃棄物処分業者に廃棄を依頼すること。

【貯蔵方法及び有効期間等】

使用耐用年数（自主基準）

指定された保守点検を実施した場合
7 年

【保守点検に係わる事項】

1) 使用者による保守点検事項

項目	点検頻度	点検内容
目視点検	始業時	キズ、変形、汚れ、等の異常の有無 製品上や周囲に障害物の有無
動作点検	始業時	動作不良、異音、引っ掛り、等の異常の有無
ガタ、ゆるみ、等	月 1 回	各部のガタ、ゆるみ、等が発生していないか
グリス切れ、ホコリ等	月 1 回	駆動部にゴミ、ホコリ等が溜まっていないか グリス・オイル切れが発生していないか

取扱説明書を必ずご参照下さい。

2) 業者による保守点検事項

項目	点検時期	点検内容
定期メンテナンス	年1回	各部のチェック、調整、増締め、注油、グリスUP、部品交換、等

* 保守契約、あるいは定期的なスポット点検依頼をして頂く様にお願いします。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者

住所 : 埼玉県川口市弥平 2-15-15
 氏名 : 株式会社 大林製作所 川口工場
 連絡先 : 埼玉県川口市弥平 2-15-15
 株式会社 大林製作所 川口工場
 TEL (048) 222-3800
 FAX (048) 222-4074

製造業者

住所 : 埼玉県川口市弥平 2-15-15
 氏名 : 株式会社 大林製作所 川口工場

取扱説明書を必ずご参照下さい。