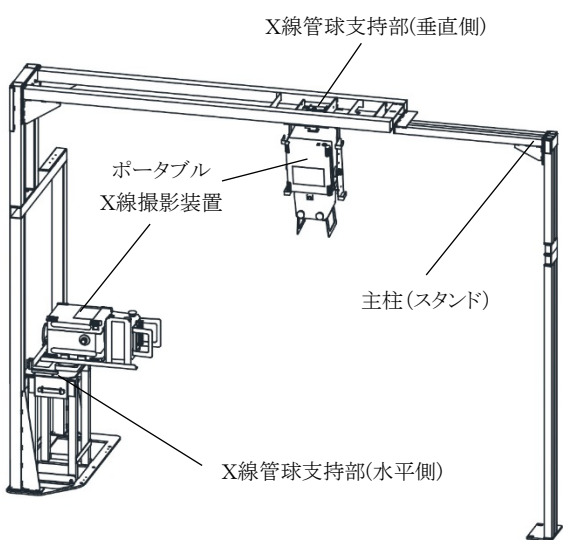


機械器具 09 X 線管支持床支持台（37076000）
一般医療機器 特定保守管理医療機器 設置管理医療機器

X 線管球支持スタンド NV341

【形状・構造及び原理等】	【使用目的又は効果】
1) 形状と各部の名称  2) 構成 本装置は以下のユニットにより構成される。 (1) 主柱(スタンド) (2) X線管球支持部(垂直側) (3) X線管球支持部(水平側) (4) ポータブル X線撮影装置 3) 原理 ポータブル X線撮影装置を 2 台、想定した位置に保持することが可能で、必要に応じて位置の微調整が可能である。 4) 仕様 寸法：幅 3000×奥行 1019 ×高さ(最大)2280 (単位：mm) 重量 ：約 240 kg	X 線一般撮影を効率的に行う為に、想定した位置にポータブル X線撮影装置を保持し、同条件の X線撮影を容易に行う事を目的とした X 線管支持台である。 【使用方法等】 使用環境条件 温度 ：+10℃～+40℃ 湿度 ：30%～75%RH（結露のないこと） 設置上の注意 据え付け設置時は床面の状態を確かめ、スペーサー等の調整により垂直を確保すること。 設置位置を確定した後は、必ずアンカー固定を行なうこと・ 詳細は取扱説明書を参照してください。 操作方法 ① X線撮影装置を支持器の取り付け箇所に取り付けます。 ② 照射野及び照射位置を調整し、X線撮影を行います。 詳細は取扱説明書を参照してください。 【使用上の注意】 重要な基本的注意 ① 検査を開始する前に装置に異常がないこと、構成品、が確実に固定されていることを確認すること ② 検査前に患者の位置、状態をよく確認すること。 高齢者適応 高齢者は握力など体力に問題がある場合は X 線防護衣を装着した介助者を付けるなどして検査に臨むこと。

取扱説明書を必ずご参照下さい。

妊婦・産婦、授乳婦及び小児への適応

- ①妊婦及び妊娠の疑いのある者及び授乳中の者へ使用する場合は医師の指示のもとで慎重に行うこと
- ②小児の検査の場合は X 線防護衣を装着した介助者を付けること。

その他の注意

この装置を廃棄する場合は、産業廃棄物となります。必ず地方自治体の条例・規則に従い、許可を得た産業廃棄物処分業者に廃棄を依頼すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者
住所 : 埼玉県川口市弥平 2-15-15
氏名 : 株式会社 大林製作所 川口工場
連絡先 : 埼玉県川口市弥平 2-15-15
株式会社 大林製作所 川口工場
TEL (048) 222-3800
FAX (048) 222-4074

製造業者
住所 : 埼玉県川口市弥平 2-15-15
氏名 : 株式会社 大林製作所 川口工場

【保管方法及び有効期間等】

保管方法
使用環境条件に準ずる
温度 : + 1 0℃～+ 4 0℃
湿度 : 3 0 %～7 5 %RH (結露のないこと)

使用耐用年数 (自主基準)
使用環境を満たした環境で
指定された保守点検を実施した場合 7 年

【保守点検に係わる事項】

1) 使用者による保守点検事項

項目	点検頻度	点検内容
目視点検	始業時	キズ、変形、汚れ、等の異常の有無 製品上や周囲に障害物の有無
動作点検	始業時	動作不良、異音、引っ掛り、等の異常の有無
ガタ、ゆるみ、等	月 1 回	各部のガタ、ゆるみ、等が発生していないか
グリス切れ、ホコリ等	月 1 回	駆動部にゴミ、ホコリ等が溜まっていないか グリス・オイル切れが発生していないか

2) 業者による保守点検事項

項目	点検時期	点検内容
定期メンテナンス	年 1 回	各部のチェック、調整、増締め、注油、グリスUP、部品交換、等

* 保守契約、あるいは定期的なスポット点検依頼をして頂く様にお願いします。

取扱説明書を必ずご参照下さい。